

GC EUROPE N.V.
Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.46.78.474
Fax. +385.1.46.78.473
info@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO – Russia
129626, Москва
Кулаков переулок 13, офис 316
Тел.: (926) 007-21-31
russia@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Официальный импортер и
дистрибьютор продукции
компании ДЖИ СИ в России
ООО Крафтвэй Медикал
129626, Москва
3-я Мытищинская ул. 16
Тел.: (495) 232-69-33, 287-67-67
Факс: (495) 737-78-88
DENTAL@kraftway.ru

z M CA RU 11 05 08/09

GC EUROPE КАТАЛОГ ДЛЯ ВРАЧА И ДЛЯ ТЕХНИКА 2009-2010



GC EUROPE

КАТАЛОГ **2009-2010**

ДЛЯ ВРАЧА & ДЛЯ ТЕХНИКА

ПО ВСЕМУ МИРУ
УЛЫБКИ

Содержание

2009-2010

Алфавитный указатель:
КАТЕГОРИИ

ДЛЯ ВРАЧА
Б Бондинг 28
В Временные материалы (фиксация, пломбирование, коронки, мостовидные протезы) 40-42
З Защитные покрытия 29-30
К Композитные реставрационные материалы 20-23
Контроль качества припасовки и регистрация прикусных соотношений 38
Кондиционирование 29-30
М Минимальная интервенция 12-15
П Перебазировка 43-45
Прокладочные материалы 28
С Слепочные материалы 34-39
Стеклоиономерные реставрационные материалы 16-19
Ф Фиксирующие материалы 24-27
Финирование 31

ДЛЯ ТЕХНИКА
Б Бондинговые системы 58-59
Г Гипсы 62-63
З Защитные покрытия 60
К Керамика 48-55
Композиты 56-57
П Пластмассы 61
Паковочные массы 64-69

Алфавитный указатель:
МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ВРАЧА
A Aroma Fine Dust Free III 39
B Bite Compound 39
C Caviton 42
Cavity Conditioner 30
Closed-Bite Trays 37
Coe-Pak (Automix) 45
D Day & Night Concept 12
Dentin Conditioner 30
Dentulous Trays 37
Dry Mouth Gel 12
E Edentulous Trays 37
Epitex 31
EQUIA 16
Exabite II NDS 38
Exafast NDS / Exafast Putty 36
Exajet 36
EXA'lence 34
Examix NDS / Exaflex Putty 36
F Fit Checker I 38
Fit Checker II 38
Freegenol 42
Fuji BOND LC 28
Fuji COAT LC 30
Fuji I 26
Fuji II LC Improved 19
Fuji IX GP (FAST) 18
Fuji LINING LC 28
Fuji LINING LC Paste Pak 28
Fuji ORTHO 27
Fuji ORTHO BAND Paste Pak 27
Fuji ORTHO LC 27
Fuji PLUS (EWT) 26
Fuji TRIAGE 14
Fuji VIII GP 19
FujiCEM (Automix) 25
G G-Bond 23
G-CEM (Automix) 24
G-Coat PLUS 29
Gradia Direct 20
Gradia Direct Flo 22
Gradia Direct LoFlo 22
I ISO Functional Sticks 39
L Luting Indications Руководство по применению фиксирующих и бондинговых материалов 33
M MI Paste Plus 13
N New Metal Strips 31
P Plaque Indicator Kit 15
Pliers 42
R Reline 45
Reline Extra Soft 44
Reline Soft 44
Restorative Indications Руководство по применению реставрационных и прокладочных материалов 32
Revotek LC 41
S Saliva-Check Buffer 15
Saliva-Check Mutans 15
T Tissue Conditioner 43
Tooth Mousse 13
Treclean 39
U Unifast III 40
Unifast LC 41
Unifast TRAD 41

ДЛЯ ТЕХНИКА
C Ceramic Primer 59
Composite Primer 59
Cosmotech VEST 69
F Fujirock EP 62
Fujirock OptiFlow 63
Fujirock OptiXscan 63
Fujivest II 66
Fujivest Platinum 65
Fujivest Premium 65
Fujivest Super 66
G G-Cera ORBIT VEST 69
Gradia 56
Gradia gum shades 57
I Initial Ceramic System 48
Initial Connector Paste 53
Initial IQ Press Concept 50
Initial IQ Lustre Pastes 50
Initial Lustre Pastes 51
Initial INmetalbond 53
Initial MC, Initial Ti and Initial LF 52
Initial PC, Initial LF 55
Initial Zr-FS, Initial AL 54
Initial Ti Bonder 53
L Labolight LV-III 57
M Metal Primer II 59
MultiPressVest 67
N New Casting LINER 68
O Optiglaze 60
Ostron 61
P Pattern Resin LS 61
S Soldervest QUICK 69
Stellavest 67
Steplight SL-I 57
V Vest-G 68

Оттенки зубов, упоминаемые в данном Каталоге, соответствуют шкале оттенков Vita® либо GC. Vita® является зарегистрированной торговой маркой Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, Germany. RECALDENT является торговой маркой, используемой по лицензии.

GC EUROPE



,'GC,'

,'GC,'

Введение

Корпорация ДЖИ СИ 2
ДЖИ СИ в Европе 3
Новинки Для Врача 4-6
Новинки Для Техника 7

Для врача

Планирование лечения в соответствии с концепцией MI 10-11
Минимальная Интервенция (MI) 12-15
Стеклоиономерные Реставрационные Материалы 16-19
Композитные Реставрационные Материалы 20-23
Фиксирующие материалы 24-27
Прокладочные материалы & бондинг 28
Защитные покрытия & Кондиционирование 29-30
Финирование 31
Руководство по применению реставрационных и прокладочных материалов 32
Руководство по применению фиксирующих и бондинговых материалов 33
Слепочные материалы 34-37
Контроль качества припасовки и регистрация прикусных соотношений 38-39
Материалы для временных коронок и мостовидных протезов 40-41
Материалы для временной фиксации и временного пломбирования 42
Материалы для перебазировки 43-45

Для техника

Система керамики Initial 48-49
Система Initial IQ 50
Initial IQ Пасты для глянца 51
Керамика 52-55
Композиты 56-57
Ремонт с помощью праймеров 58
Бондинговые системы 59
Защитные покрытия 60
Пластмассы 61
Гипсы 62-63
Паковочные массы 64-69

Центр Обучения

GC Europe Campus 70-71



GC Corporation

2009-2010

БЕЗОПАСНОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ежедневно люди во всем мире мечтают быть здоровее, красивее и моложе. Исполнение этих желаний – самый большой вклад, который стоматология может внести сейчас и в ближайшем будущем. Будучи одной из передовых стоматологических компаний, мы стремимся продолжать наши постоянные исследования и развитие, чтобы добиться прорывов в стоматологии. Наша основная цель – разработка продуктов, не только превосходящих по своим качествам общепринятые мировые стандарты, но и защищающих окружающую среду, а, следовательно, и каждого индивидуума на планете. Со времени своего основания в 1921 году корпорация ДЖИ СИ по сути стремилась взять на себя определенные обязательства, связанные со стоматологией, и серьезную ответственность. Мы хотим гарантировать, что 21-й век станет «столетием здоровых зубов».



Макото Накао
Президент и Генеральный Директор

НАШИ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Ключом к нашему успеху, без сомнения, является тот факт, что мы точно понимаем интересы и желания наших покупателей, и в то же время непрерывно расширяем и улучшаем наши основные компетенции. Следовательно, базисом нашей корпоративной философии являются применяемые к нашим продуктам самые современные стандарты исследований и развития, а также тот факт, что мы постоянно проверяем и улучшаем нашу продукцию.

Корпорация ДЖИ СИ, обладатель Медали Качества Японии, самой высокой награды за контроль качества во всем мире, производит более 600 различных стоматологических продуктов, охватывая весь спектр расходных материалов, инструментов и аппаратов для стоматологической практики и зуботехнических лабораторий. В 2007 году Корпорация ДЖИ СИ открыла новый исследовательский центр, который предназначен для дальнейшего расширения программ исследования и разработки новых идей. Внутреннее «творческое» пространство центра также способствует свободному, непринуждённому общению, что помогает сотрудникам обмениваться идеями и мнениями и вдохновлять друг друга на дальнейшие открытия. С помощью наших новых концепций и продуктов, ориентированных на врачебное применение, будут достигнуты новые важные вехи стоматологии.

“SEMUI”: ДЛЯ ВСЕОБЩЕЙ ВЫГОДЫ

Ежедневно мы следуем принципу “Semui” – нашей традиционной корпоративной философии и успешному базису нашей работы. В широком смысле это учение означает сочетание самоотверженности, абсолютной объективности, милосердия и истинной мудрости. Работа нашего коллектива основана на усвоении и реализации этой философской концепции. В связи с этим нашим приоритетом является постоянное поддержание высокого качества продукции и максимальное удовлетворение нужд наших клиентов. Мы уверены, и не без оснований, что 21-й век действительно станет «столетием здоровых зубов», и корпорация ДЖИ СИ, несомненно, внесет свой вклад в достижение этой цели.

Макото Накао
Президент и Генеральный Директор
Корпорация ДЖИ СИ



GC в Европе

ТРАДИЦИИ
ДЖИ СИ Европа, европейское подразделение Корпорации GC, уже более 25 лет известна среди стоматологов и зубных техников постоянно высоким качеством продукции, простотой применения материалов и самыми высокими стандартами обслуживания клиентов. МЕЧТА компании ДЖИ СИ Европа – стать образцом для подражания на европейском рынке стоматологических материалов, а потому мы будем продолжать инвестиции в инновационные системы и материалы, которые, как и прежде, будут приносить заметную выгоду нашим клиентам. Таким образом, мы решим и поставленную перед собой ЗАДАЧУ по трансформации ДЖИ СИ в одну из ведущих компаний в сфере стоматологического здравоохранения. Мы стремимся стать компанией, которая предоставляет материалы и услуги мирового класса всем стоматологам и зубным техникам Европы.

ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Наша цель определена четко: будучи одной из передовых компаний и обладая традициями и опытом, мы хотим добиться новых прорывов в сфере стоматологии, всегда в сочетании с наисовременнейшими научными достижениями. Вот почему ДЖИ СИ Европа в течение многих лет поддерживает знаменитый Факультет Стоматологии Университета г. Левен в Бельгии, а также многие другие центры повышения квалификации. С помощью Кафедры Тошио Накао мы содействуем исследованиям в области адгезии всех стоматологических материалов, чтобы достичь лучшего понимания механизмов адгезии к эмали и дентину, а затем применить эти знания при разработке инновационных продуктов.

ИННОВАЦИИ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Благодаря напряженным усилиям отделов по связям с общественностью и постоянному диалогу со стоматологами и зубными техниками мы теперь способны определять тенденции развития, нужды потребителей и требования к продукции на очень ранних стадиях. Результатом этого стало представление новаторской концепции Минимальной Интервенции, основанной на трех принципах – определение, предотвращение и восстановление. Следом за первыми продуктами, разработанными в рамках этой концепции и предназначенными для предотвращения и диагностики кариеса – Tooth Mousse, MI Paste Plus, Saliva-Check Buffer и Plaque Indicator Kit – мы продолжаем расширять спектр продукции этого типа, и предлагаем Вам Dry Mouth Gel и Saliva-Check Mutans.

РЯДОМ С ВАМИ
Отвечая на разнообразие требований региональных рынков, ДЖИ СИ Европа имеет свои подразделения в основных европейских странах и мощные «команды помощников», состоящие из местных экспертов специализированной стоматологической торговли. Что еще более важно, наша централизованная база данных и сеть, охватывающая всю Европу, помогают нам гарантировать, что продукция постоянно находится в наличии у наших партнеров и может быть доставлена в кратчайшие сроки. Комбинация высококачественной продукции и высокого образовательного уровня – вот что позволит нашей мечте стать реальностью. А потому мы будем рады приветствовать в нашем новом Центре обучения GC Europe Campus не только зубных техников, стоматологов, гигиенистов и студентов, но также и всех наших партнёров, которые изъявят желание пройти одну или несколько из наших многочисленных обучающих программ. ДЖИ СИ Европа с гордостью сообщает Вам о том, что мы удостоились награды EFQM «За Отличную Работу». Это – еще один шаг в нашем постоянном стремлении к улучшению нашей работы и сферы обслуживания. Ведь традиционность и новаторство – это свойства не только нашей продукции, но и предоставляемых нами услуг!

Генри Ленн
Президент
ДЖИ СИ Европа



Генри Ленн
Президент



НОВИНКИ

2009-2010


ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ MI

Помимо разработки новых материалов, ДЖИ СИ, будучи истинно новаторской стоматологической компанией, первой выступила с инициативой поддержать развитие новейшей концепции лечения и профилактики кариеса: Минимальной Интервенции. За последние годы было прочитано множество лекций на эту тему, и появился целый ряд публикаций, посвящённых концепции Минимальной Интервенции (MI), но один вопрос так и остался нерешённым – а именно, вопрос, который часто задают терапевты: *«Как мне включить концепцию MI в ежедневную работу?»*

«Комиссия экспертов по MI» компании ДЖИ СИ Европа – это панъевропейская группа академиков, исследователей и практикующих врачей-стоматологов. Работая вместе, они создали План лечения, который служит для внедрения концепции MI в ежедневную стоматологическую практику. Эта информация будет распространяться в различных публикациях и на симпозиумах, чтобы каждый стоматолог мог получить ясное представление о том, каким образом лучше реализовать концепцию MI в своей повседневной работе.
Более подробно: см. страницу 10.

GC DRY MOUTH GEL

В полости рта слюна выполняет множество важных функций: она увлажняет ткани полости рта, способствует пищеварению, помогает распознавать вкусовые оттенки, поддерживает здоровое состояние слизистых оболочек полости рта и участвует в процессе реминерализации зубов. Очень часто сухость полости рта не диагностируется, пациенты могут не осознавать того, что уровень слюноотделения понижен, до тех пор, пока он не упадёт вдвое по сравнению с нормой. Дегидратация и сухость во рту могут развиться и у здоровых людей как результат некоторых широко распространённых факторов повседневной жизни, а также вследствие целого ряда медицинских нарушений. ДЖИ СИ с гордостью представляет Вам Dry Mouth Gel – уникальный препарат, разработанный для устранения симптомов сухости полости рта и обеспечивающий долговременный успокаивающий эффект и комфорт пациентам с подобными проблемами.

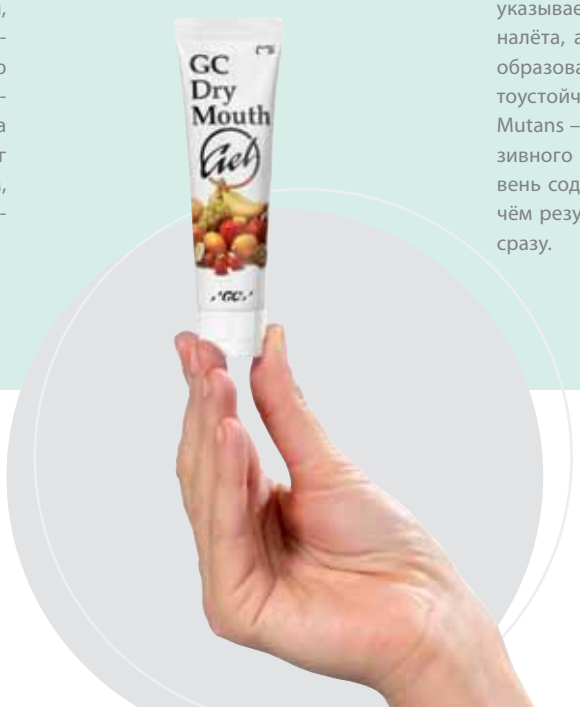

GC SALIVA CHECK MUTANS

Кариозные поражения не возникают сами по себе; они обусловлены инфицированием кариесогенными бактериями при наличии среды, благоприятной для их размножения. Из этого следует, что необходимо следить за состоянием пациента в течение всей жизни, не только наблюдая за самим заболеванием и его последствиями, но и оценивая факторы, вызвавшие его. Важную роль в инициировании кариозных поражений играют бактерии вида *Streptococcus mutans*. Высокий уровень концентрации *S. mutans* в слюне указывает на изменения в составе зубного налёта, а именно на увеличение уровня образования кислот и количества кислотоустойчивых организмов. Saliva-Check Mutans – это набор для быстрого неинвазивного теста, который определяет уровень содержания *S. mutans* в слюне, причём результат Вы получаете практически сразу.





GC EQUIA

После того, как 2 года назад компания ДЖИ СИ предложила революционную концепцию пломбирования "EQUIA", стоматологи больше не стоят перед трудным выбором, поскольку теперь они наконец-то могут получить идеальный баланс эстетичности и стоимости! Название EQUIA является аббревиатурой "Easy (Простой) – Quick (Быстрый) – Unique (Уникальный) – Intelligent (Разумный) – Aesthetic (Эстетичный)": никогда еще реставрации из стеклоиономерных материалов не были такими эстетичными, светопроницаемыми, долговечными и экономичными! Первый компонент системы EQUIA является подлинным новшеством во всех отношениях: благодаря специально разработанным стеклоиономерным наполнителям с высокой реакционной способностью, Fuji IX GP EXTRA обеспечивает не только долговременную полупрозрачность и эстетику, но и уровень фторовыделения в шесть раз более высокий, чем у других пломбировочных материалов своего класса. Второй компонент – это первый нанонаполненный защитный лак G-Coat PLUS, обеспечивающий не только повышенную стойкость к абразии, но и непревзойденный блеск поверхности, тем самым ещё более увеличивая эстетические преимущества Fuji IX GP Extra. Концепт EQUIA – это высокоэффективная и экономически выгодная альтернатива для тех показаний, где требуется быстрая работа и высокий уровень эстетики.

GC GRADIA DIRECT


От устранения мелких дефектов и до сложных многослойных высокопрофессиональных реставраций – в любом случае реставрационные материалы группы Gradia Direct обеспечат Вам отличный результат.

Простые в использовании, не липкие композиты линейки Gradia Direct позволяют получить цвет и характеристики реставрации, максимально близкие к естественным. Благодаря большому количеству мелких частиц в своём составе Gradia Direct обладает практически таким же коэффициентом отражения, что и натуральные зубы, за счёт чего и достигается естественный вид реставраций. Они «сливаются» с прилежащими твёрдыми тканями зубов, а потому 90% реставраций можно производить, используя однослойную технику нанесения. Gradia Direct обладает также великолепными рабочими свойствами, что означает, что материал легко моделируется, обеспечивает высокую прочность реставраций, а также имеет достаточное рабочее время – даже при сильном освещении.

GC GRADIA DIRECT FLO & LOFLO

Линейка низкомодульных материалов GC обладает целым списком великолепных характеристик. Gradia Direct LoFlo – один из первых низкомодульных композитов, который можно считать настоящим реставрационным материалом. Уровень усадки Gradia Direct LoFlo до 55% меньше, чем у ведущих низкомодульных композитов стоматологического рынка. Уникальный наполнитель обеспечивает повышенную полируемость и рентгеноконтрастность, сохраняя при этом высокую устойчивость к истиранию.

Gradia Direct Flo – это текучий композит, созданный специально для использования в комбинации с Gradia Direct. Благодаря специфическим физическим свойствам, оптимальной текучести и возможности прямого нанесения с помощью шприца этот материал подходит для изготовления прокладок под композитные реставрации, использования в качестве силанта, для заполнения полостей при тоннельном препарировании, а также для заполнения поднутрений и коррекции мелких дефектов композитных реставраций.

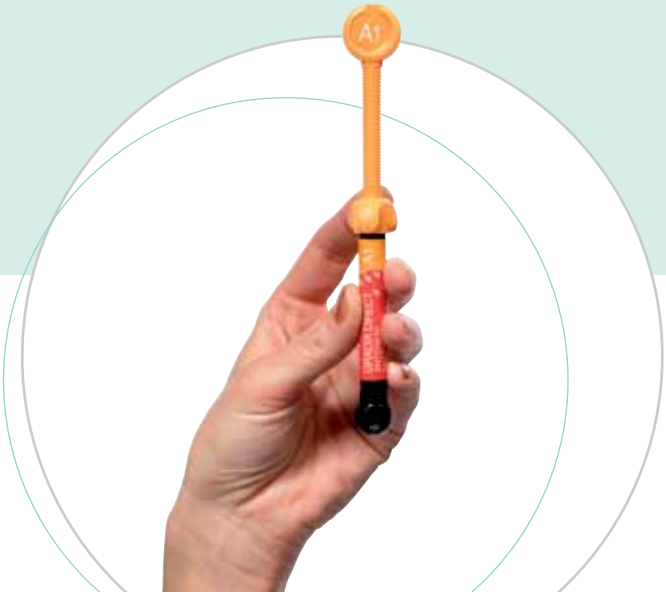





НОВИНКИ

2009-2010

GC EXA'LENCE

ДЖИ СИ с радостью предлагает Вам инновационный метод снятия слепков. Во многих случаях стоматологам приходится выбирать между несколькими слепочными материалами, и, хотя каждый из них обладает своими преимуществами, у них, к сожалению, есть и свои недостатки. EXA'lence намного облегчает этот выбор – его новый химический состав позволяет снимать точные слепки в любых условиях благодаря внутренней гидрофильности этого нового типа слепочного материала. Разумеется, наибольшее значение имеет воспроизведение всех деталей, но для переноса этих деталей на модель важна также и высокая прочность материала на разрыв. Теперь каждый стоматолог может при любых условиях в полости рта получить идеальные слепки для изготовления идеально припасованных конструкций.

GC UNIFAST III

Благодаря новаторским разработкам наших исследователей появился Unifast нового поколения. Unifast III представляет Технологию SURF – новый метод обработки полимерного наполнителя. Новые технологии позволили ДЖИ СИ сосредоточиться на разработке идеально сбалансированного состава, который обладает непревзойдённой способностью к адаптации, устойчивостью к истиранию, твердостью и прочностью на изгиб, и всё это без необходимости в дополнительном наполнителе. Создав новый метод обработки полимера SURF, ДЖИ СИ смогла не просто преодолеть эстетические ограничения для данного материала, а получить полимер с высокой цветовой стабильностью. Это качество Unifast III, а также его превосходные физические свойства, делают его идеальным материалом для изготовления долгосрочных временных конструкций.

GC TISSUE CONDITIONER

Представляем первый универсальный материал для мягкой перебазировки – идеальное решение для Вашей клиники от компании ДЖИ СИ. Tissue Conditioner – это акриловый материал для мягкой перебазировки, который справедливо можно назвать материалом нового поколения, и он запатентован компанией ДЖИ СИ. Вы можете использовать Tissue Conditioner для кондиционирования тканей, для мягкой перебазировки, или для снятия функциональных слепков. Оптимальная консистенция и текучесть позволяют наносить материал легко и быстро – и всего 5 минут для отверждения в полости рта. Уникальная запатентованная формула материала, а также специальное покрытие защищают его от разрушения со временем – так что больше никаких неприятно пахнущих протезов! Tissue Conditioner очень долго сохраняет упругость, что позволяет перебазированной поверхности со временем адаптировать свою форму, обеспечивая лучшее заживление тканей и повышенный комфорт для пациента.







КОНЦЕПЦИЯ GC INITIAL IQ – ONE BODY – ПОСЛОЙНОЕ НАНЕСЕНИЕ

Компания GC давно искала способ предоставить зубным техникам возможность всегда получать равные по качеству и точности эстетические результаты. Благодаря разработке Концепции Initial IQ- One Body- Послойного нанесения, компания GC теперь может предложить компактную систему керамики, которая позволяет быстро и просто воспроизводить стандартные оттенки по шкале Vita. Эта новая система даёт зубным техникам возможность неоднократно воспроизводить равные по эстетике работы, используя при этом меньше материалов. Данный новый подход был разработан специально для того, чтобы удовлетворить требования современного стоматологического рынка.

GC FUJIROCK EP OPTIXSCAN

Поскольку технологии CAD/CAM и имплантология становятся всё важнее с каждым днём, компания GC разработала специальный гипс 4 типа для подобных работ. Благодаря специфическому составу порошка Fujirock EP OptiXscan совместим со всеми существующими сканирующими установками. Быстроту работы обеспечивают такие его качества, как варьируемое рабочее время и сокращенное время отверждения. Кроме того, Fujirock EP OptiXscan позволяет варьировать соотношение компонентов замешиваемого материала (между 20 мл и 21 мл на 100 г порошка), при этом физические свойства полученного материала не изменяются.

GC FUJIROCK EP OPTIFLOW

Стоматологический текучий гипс 4 типа для изготовления баз под дуги, выполненные из Fujirock EP. Имеющиеся 4 цвета – Красная терракота, Динамичный сиреневый, Зелёная мята и Синий сапфир – позволяют выполнить требование об индивидуализации и эстетичности рабочих моделей. Наиболее оптимальная цветовая гамма достигается при использовании материала в комбинации с четырьмя оттенками Fujirock EP.

2009-2010





СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ДЛЯ ВРАЧА

2009-2010

Минимальная интервенция (MI)	MI Профилактика	Dry Mouth Gel	12
		Tooth Mousse	13
		MI Paste Plus	13
		Fuji TRIAGE	14
	MI Определение	Plaque Indicator Kit	15
		Saliva-Check Buffer	15
		Saliva-Check Mutans	15
Реставрационные материалы	Композитные материалы	Gradia Direct	20
		Gradia Direct Flo	22
		Gradia Direct LoFlo	22
	Стеклоиономерные материалы	EQUIA	16
		Fuji IX GP (FAST)	18
		Fuji II LC	19
		Fuji VIII GP	19
Фиксирующие материалы	Композитные материалы	G-CEM (Automix)	24
	Стеклоиономерные материалы	FujiCEM (Automix)	25
		Fuji PLUS	26
		Fuji I	26
		Fuji ORTHO BAND Paste Pak	27
		Fuji ORTHO LC	27
		Fuji ORTHO	27
Прокладочные материалы	Стеклоиономерные материалы	Fuji Lining LC	28
		Fuji Lining LC Paste Pak	28
Бондинг	Материалы на композитной основе	G-Bond	23
	Стеклоиономерные материалы	Fuji BOND LC	28
Защита / Кондиционирование	Для композитных материалов	G-Coat PLUS	29
	Для стеклоиономерных материалов	G-Coat PLUS	29
		Fuji COAT LC	30
		Cavity Conditioner	30
		Dentin Conditioner	30
Финирование	Для композитных и стеклоиономерных материалов	New Metal Strips	31
		Epitex	31
Слепки	Слепочные материалы	EXA'lence	34
		Examix / Exaflex	36
		Exafast	36
		Exajet	36
		Dentulous Impression Trays	37
		Edentulous Impression Trays	37
		Closed Bite Impression Trays	37
		Aroma Fine Dust Free III	39
		Treclean	39
	Материалы для контроля точности припасовки	Fit Checker I	38
		Fit Checker II	38
	Материалы для регистрации прикуса	Exabite II NDS	38
		ISO Functional Sticks	39
		Bite Compound	39
Материалы для временных конструкций	Материалы для изготовления временных коронок и мостовидных протезов	Unifast III	40
		Unifast TRAD	41
		Unifast LC	41
		Revotek LC	41
	Материалы для временной фиксации и временного пломбирования	Freegenol	42
		Caviton	42
	Аксессуары	Pliers	42
Материалы для перебазировки	Материалы на основе полимера	Tissue Conditioner	43
		Reline	45
	Материалы на основе силикона	Reline Soft	44
		Reline Extra Soft	44
		Coe-Pak (Automix)	45

2009-2010

ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ МИНИМАЛЬНОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ (MI)


В результате развития области стоматологии, именуемой кариесологией, у врачей постепенно складывается всё более чёткая картина процессов развития кариозных поражений; компания GC взяла на себя смелость внедрить эти теоретические знания в Вашу повседневную практику. Наш подход к решению этой задачи основан на концепции Минимальной Интервенции (MI), а точнее – на стремлении сбалансировать естественные биологические процессы деминерализации и реминерализации структур зубов.

Разработав План лечения в соответствии с концепцией MI, компания GC стремилась помочь стоматологам-терапевтам внедрить принципы MI в повседневную практику. Систематический подход к увеличению роли кариесологии в ежедневной клинической практике здесь соединяется с самыми свежими *«справочными и научными материалами, основанными на экспериментальных данных»*. Таким образом, компания GC стремится сделать процедуры диагностики, предотвращения и лечения, то есть контроля в целом, неотъемлемой частью стоматологического лечения, и повысить качество жизни пациентов.

С помощью Плана лечения в соответствии с концепцией MI, компания GC предоставляет врачу-терапевту простую и ясную схему лечения в соответствии с принципами MI, проиллюстрированную множеством клинических случаев:

- Диагностика,
- План проведения лечения и повторных осмотров,
- Рекомендации по изменению пищевого рациона и образа жизни, обучение пациента гигиене полости рта,
- Профилактика и неинвазивные методы лечения,
- Атравматические и минимально инвазивные методы лечения
- Предварительные модули для финансового и практического применения

План лечения – Последовательность этапов

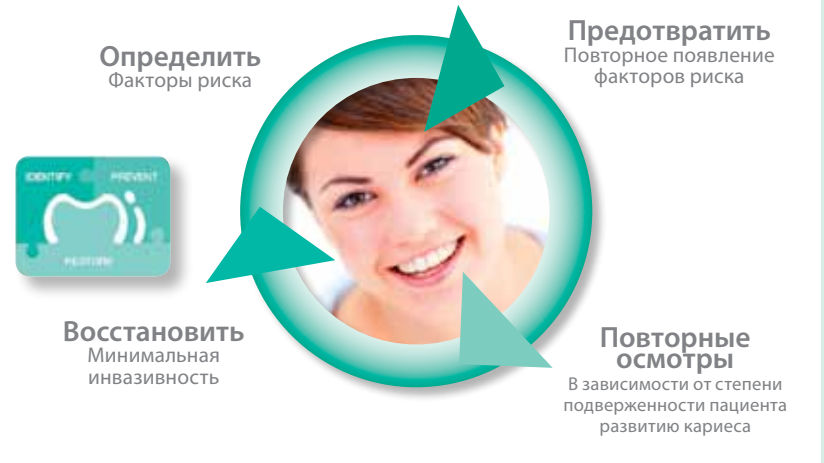



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

При осмотре пациента следует не только оценивать состояние его зубов, но и принимать во внимание факторы риска развития кариозных поражений, такие, как пищевой рацион, гигиенические навыки, количество и буферная способность слюны, количество кариесогенных бактерий в слюне (например, Mutans Streptococci) и уровень кариесогенности зубного налёта. Для успешной диагностики и контроля развития кариеса диагностическим порогом следует считать первые клинические признаки кариозного поражения на эмали. Данные ранние признаки определяются клинически в области фиссур, на ровных поверхностях зубов, а также на рентгеновских снимках в интерпроксимальных областях. Использование диагностических наборов, таких как Набор тестов Saliva Check Mutans, Набор тестов Plaque Indicator, Набор тестов Saliva Check Buffer, позволит Вам не только получить важную информацию о подверженности пациента кариозным заболеваниям, но и поможет правильно мотивировать пациента.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

Дальнейшее развитие кариозных поражений можно предотвратить в том случае, если пациент готов менять свои привычки. Для эффективной борьбы с кариесом следует, прежде всего, обратить внимание на пищевой рацион и гигиенические навыки. В целом, все профилактические меры направлены на то, чтобы минимизировать факторы риска развития кариеса, а также способствовать процессу реминерализации. С этой точки зрения, весьма эффективна комбинация профессиональной механической очистки зубов, сбалансированной диеты и применения таких препаратов, как Tooth Mousse и MI Paste Plus, которые способствуют реминерализации тканей зубов и помогают нормализовать флору полости рта.

РЕГУЛЯРНЫЕ ОСМОТРЫ

В кариесологии долгое время использовались стандартные схемы регулярных осмотров (визит к стоматологу дважды в год). Такой интервал слишком длинен для пациентов с высокой предрасположенностью к кариесу, а для пациентов с низкой предрасположенностью, пожалуй, наоборот, слишком короток. Но теперь, пользуясь Планом лечения в соответствии с концепцией MI, Вы можете подобрать индивидуальный интервал между осмотрами для каждого из своих пациентов, основываясь на данных о факторах риска для конкретного человека.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

По сравнению с традиционными реставрационными материалами, например, амальгамой, или золотом, современные реставрационные материалы - EQUIA, долговечные стеклоиономерные цементы и Gradia Direct LoFlo, текучий композит, – требуют удаления гораздо меньшего объёма твердых тканей зуба. Они прочно связываются с тканями зубов, а также удовлетворяют высоким эстетическим требованиям пациентов. Атравматичные и минимально инвазивные современные методы реставрационного лечения сохраняют структуры зубов и обеспечивают долговечность реставраций. Другие материалы, которые могут использоваться в рамках концепции MI – это Fuji II LC (СИЦ, модифицированный полимером), Fuji IX (СИЦ пакуемой вязкости) и композитный материал для пломбирования Gradia Direct (высокопрочный и эстетичный композит).

Хотите узнать больше? Свяжитесь с представителем компании GC в Вашем регионе, или посетите веб-сайт GC, посвящённый концепции MI (http://mi.gceurope.com/), чтобы получить более подробную информацию…

GC Dry Mouth Gel

ДЖИ СИ Гель для устранения сухости в полости рта

Длительный комфорт для пациентов, страдающих от сухости в полости рта

Гель с нейтральным уровнем pH, разработанный для уменьшения симптомов сухости полости рта и обеспечивающий долговременный успокаивающий эффект и комфорт пациентам с подобными проблемами.

Свойства & преимущества

- Уменьшает симптомы сухости полости рта и обеспечивает долговременный комфорт
- Нейтральный уровень pH, не меняет уровень pH в полости рта и не вызывает деминерализации
- Длительность действия – до 4 часов
- Удобный тюбик позволяет использовать препарат в любой момент
- Выпускается в 4 вкусовых оттенках
- Рекомендуется также для пациентов, у которых сухость во рту вызвана ношением ортопедических конструкций

Упаковки

GC Dry Mouth Gel	
003222	Упаковка Ассорти 10 шт, 4 Мята, 2 Малина, 2 Апельсин, 2 Лимон



Применение

Выдавите нужное количество геля из тюбика на чистый палец

Нанесите гель на щёчные и язычные поверхности зубов и слизистые оболочки полости рта

Концепция День & Ночь

24 часа комфорта и защиты для пациентов

Пациенты с пониженным слюноотделением более предрасположены к развитию гиперчувствительности дентина, эрозии зубов и кариозных поражений.

- Dry Mouth Gel днём – обеспечивает комфорт, уменьшает симптомы сухости в полости рта.
- Tooth Mousse или MI Paste Plus ночью – для защиты тканей зубов, а также для повышения уровня биодоступных ионов кальция, фосфата и фторида, которые требуются для реминерализации тканей зубов и предотвращения вышеперечисленных проблем.



МИНИМАЛЬНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

Био-доступный кальций и фосфат

GC Tooth Mousse

ДЖИ СИ Мусс для зубов

Реминерализирующий профессиональный стоматологический крем без сахара, содержащий RECALDENT™ CPP-ACP

Свойства & преимущества

- Содержит RECALDENT™ Казеин Фосфопептид – Аморфный Кальций Фосфат
- Препятствует деминерализации и способствует реминерализации эмали
- Снижает гиперчувствительность, закупоривая открытые дентинные канальцы
- Предотвращает развитие первичных кариозных поражений благодаря своим анти-кариесогенным свойствам
- Устраняет видимую опаковость белых пятен



Показания

- Дополнительная защита зубов, в том числе от кислотных атак различного происхождения
- Для применения у пациентов с уровнем риска развития кариеса от низкого до среднего
- Во время и/или после ортодонтического лечения
- Для снижения гиперчувствительности до и после отбеливания зубов, а также после таких процедур, как профессиональная очистка поверхностей зубов или кюретаж
- Для беременных женщин и детей в возрасте до 6 лет

Упаковки

GC Tooth Mousse (40 г, 35 мл в тюбике)	
003299	Упаковка Ассорти 10 шт, по 2 каждого вкуса (Дыня, Клубника, Фруктовый, Мята & Ваниль)
003301	Клубника, Упаковка 10 шт
003300	Ваниль, Упаковка 10 шт
003304	Фруктовый, Упаковка 10 шт
003303	Мята, Упаковка 10 шт
003302	Дыня, Упаковка 10 шт

Применение

Сначала почистите зубы. Затем нанесите небольшое количество препарата на поверхности зубов чистым пальцем или ватным аппликатором и оставьте на 3-5 минут.

CPP-ACP разработан в School of Dental Science при University of Melbourne Victoria/Australia. RECALDENT™ является торговой маркой, используемой по лицензии. RECALDENT™ (CPP-ACP) вырабатывается из казеина молока. Не применять препарат у пациентов с аллергией на протеины молока и/или гидроксибензоаты.

Био-доступный кальций, фосфат и фторид

GC MI Paste Plus

ДЖИ СИ ЭМ АЙ Пэйст Плюс

Реминерализирующий профессиональный стоматологический крем без сахара, содержащий RECALDENT™ CPP-ACP и фторид.

Свойства & преимущества

- Все преимущества Tooth Mousse с добавлением 900 ppm уникальной запатентованной формы фторида
- Затормаживает изменения уровня pH зубного налёта
- Препятствует прилипанию и размножению Streptococcus mutans и sobrinus
- Реминерализует поражения эмали на ранних стадиях и увеличивает общую сопротивляемость эмали
- Оптимизирует перенос фторида к эмали и уровень его поглощения



Показания

- Во время и/или после ортодонтического лечения, особенно в местах образования белых пятен
- Для применения у пациентов с уровнем риска развития кариеса от среднего до высокого, а также у пациентов с недостаточным контролем за образованием зубного налёта
- Для пациентов с повышенной кислотностью среды полости рта, эрозией и гастро-экзофагальным рефлюксом
- Для беременных женщин

Упаковки

GC MI Paste Plus (40 г, 35 мл в тюбике)	
003310	Упаковка Ассорти 10 шт, по 2 каждого вкуса (Дыня, Клубника, Фруктовый, Мята и Ваниль)
003312	Клубника, Упаковка 10 шт
003313	Дыня, Упаковка 10 шт
003314	Ваниль, Упаковка 10 шт
003315	Фруктовый, Упаковка 10 шт
003311	Мята, Упаковка 10 шт

Применение

На приёме: наносите после стоматологических процедур с помощью кисти, тампона, или пальцем в перчатке.

Дома: наносите после чистки зубов чистым пальцем, либо используйте индивидуализированные каппы.

GC Fuji TRIAGE

ДЖИ СИ Фуджи ТРИАЖ

Защитный рентгеноконтрастный стеклоиономерный материал



Fuji TRIAGE – это стеклоиономерный материал с высоким уровнем фторовыделения для защиты фиссур и обнаженных поверхностей корня зуба, профилактики гиперчувствительности и применения в процессе лечения, например для временного запечатывания полостей при эндодонтическом лечении.

Свойства & преимущества

- Применяется в условиях повышенной влажности и при невозможности контроля над саливацией, позволяя лечить недавно прорезавшиеся моляры, в том числе частично прикрытые слизистой оболочкой
- Выпускается в двух цветах – белом и розовом
- Химическая адгезия к твердым тканям зуба, не требуется протравливание и бондинг
- Легко наносится благодаря низкой вязкости
- Традиционный стеклоиономерный материал химического отверждения без наличия композитных добавок
- Время отверждения Розового варианта материала может быть «принудительно» ускорено облучением стандартной галогеновой стоматологической лампой для защиты поверхности материала от преждевременной дегидратации
- Прозрачный розовый оттенок облегчает визуальный контроль при повторных осмотрах
- Очень высокий уровень фторовыделения

Показания

- Защита фиссур
- Лечение и профилактика гиперчувствительности
- Защита обнаженных поверхностей корня зуба
- Временное пломбирование полости при эндодонтическом лечении

Упаковки

GC Fuji TRIAGE P/L / Порошок/Жидкость	
003295	Розовый, Упаковка 1-1 (15 г порошка, 10 г жидкости, 6 г Dentin Conditioner и аксессуары)
003296	Белый, Упаковка 1-1 (15 г порошка, 10 г жидкости, 6 г Dentin Conditioner и аксессуары)
GC Fuji TRIAGE CAPS / Капсулы (объем смеси в капсуле 0.13 мл)	
003297	Розовый, упаковка 50 капсул
003298	Белый, упаковка 50 капсул

Применение

Нанесите тонкий слой стеклоиономера на поверхность зубов в тех местах, где они подвергаются наибольшему риску. Кислотоустойчивый ионообменный слой будет выполнять функцию дополнительной защиты тканей зуба.



МИНИМАЛЬНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ

Определение уровня кислотности и возраста зубного налета за 5 минут

GC Plaque Indicator Kit

ДЖИ СИ Плак Индикейтор Кит



Набор GC Plaque Indicator Kit состоит из реагентов и инструментов для замеров двух параметров состояния среды полости рта. Первый параметр – уровень кислотности (pH) зубного налета после того, как он подвергся воздействию сахарозы. Второй параметр позволяет выявить поверхности с новообразованным зубным налетом и поверхности, на которых зубной налет сохраняется уже, по меньшей мере, 48 часов.

Свойства & преимущества

- За 5 минут определяется степень риска развития кариеса у данного пациента
- pH зубного налета наглядно демонстрируется зеленым, оранжевым или красным цветом
- Создается полная картина состояния поверхностей, подверженных накапливанию зубного налета
- Наглядная дифференциация между застарелым зубным налетом, окрашенным в синий цвет, и новообразовавшимся налетом, окрашенным в красный цвет

Упаковки

GC Plaque Indicator Kit	
002444	Упаковка 20 тестов

Применение

Эти два простых в применении теста весьма полезны в качестве средства мотивации при объяснении пациенту степени риска развития кариеса, связанной с индивидуальным уровнем образования зубного налета.

Тесты для определения количества и качества слюны

GC Saliva-Check Buffer

ДЖИ СИ Салива-Чек Баффер



Тесты включают в себя исследования слюны и в состоянии покоя, и при стимуляции. Функции и характеристики этих двух состояний слюны различны. Исследуя их оба, появляется возможность получить результаты, полезные и при диагностике, и при общении с пациентом.

Свойства & преимущества

- Определяют выделяемый объем, вязкость и консистенцию слюны в состоянии покоя, что дает информацию о том, как образ жизни пациента может влиять на здоровье полости рта
- Определяют уровень кислотности (pH) слюны в состоянии покоя. Это дает возможность установить, когда уровень кислотности повышается до опасного предела и может вызвать эрозию или кариозное поражение
- Определяют, какое количество слюны может выделяться у пациента при стимуляции, что помогает обнаружить любое серьезное заболевание слюнных желез
- Определяют буферную способность (качество) слюны, выделяемой при стимуляции. Таким образом, устанавливается уровень эффективности слюны в процессе нейтрализации кислот в полости рта

Упаковки

GC Saliva-Check Buffer	
720000	Упаковка 20 тестов

Применение

Тестирование можно проводить как один из этапов регулярного обследования, а результаты разъяснить пациенту в рамках дискуссии по проблеме лечения и предотвращения кариеса.

Диагностический набор для быстрого определения уровня концентрации Streptococcus mutans в клинических условиях

GC Saliva-Check Mutans

ДЖИ СИ Салива-Чек Мутанс



Механизм действия Saliva-Check Mutans использует высоко специфический иммунохроматографический процесс, не требующий использования инкубаторов или иного оборудования. Благодаря этому Вы получаете точные результаты всего через 15 минут.

Свойства & преимущества

- Диагностический инструмент для использования во время клинического приема, не требует специального оборудования, только таймер
- Точные результаты всего через 15 минут
- Содержит 2 типа моноклональных антител, которые выборочно реагируют только на бактерии S.mutans и ни на какие иные виды бактерий
- Способствует мотивации пациента и повышает его информированность

Упаковки

GC Saliva-Check Mutans	
720002	Упаковка 10 тестов

Целевые группы тестирования

Пациенты со сниженным уровнем слюноотделения, с высоким уровнем потребления кислотосодержащих продуктов, с низким уровнем pH полости рта, а также часто употребляющие карбогидраты.

EQUIA

ЭКВИЯ

Easy – Quick – Unique – Intelligent – Aesthetic



Название EQUIA является аббревиатурой "Easy (Простой) – Quick (Быстрый) – Unique (Уникальный) – Intelligent (Разумный) – Aesthetic (Эстетичный)". Эта система – совершенно новый подход к реставрационной терапии: никогда еще реставрации из стеклоиономерных материалов не были такими эстетичными, светопроницаемыми, долговечными и экономичными! Все эти свойства были достигнуты благодаря тому, что GC Fuji IX GP EXTRA и G-Coat PLUS сочетают в себе быстроту и простоту применения, великолепные физические качества и непревзойденную эстетику – а это значит двойная практичность, двойная прочность и естественные оптические характеристики.

Свойства & преимущества

Easy (Простой)
- Низкая чувствительность к влаге
- Не требует бондинга – химическая адгезия Fuji IX GP EXTRA к структурам зубов, а также G-Coat PLUS к Fuji IX GP EXTRA

Quick (Быстрый)
- От начала до конца работы – всего 3'30"
- Одномоментное внесение СИЦ в полость – никакого послойного нанесения
- Не требуется этап полировки, великолепный блеск всего за 30"

Unique (Уникальный)
- Содержит уникальный нанонаполнитель с максимально равномерным распределением частиц
- Нанонаполнитель обеспечивает устойчивость к истиранию и растрескиванию

Intelligent (Разумный)
- Незначительная усадка
- Нанесение G-Coat PLUS: оптимальная защита областей краевого прилегания увеличивает долговечность реставраций
- Через несколько месяцев покрытие постепенно стирается, позволяя реставрации окончательно затвердеть за счёт контакта со слюной

Aesthetic (Эстетичный)
- Реставрационный материал с натуральной светопроницаемостью отлично копирует цвет естественных зубов
- Естественный блеск и гладкость после нанесения G-Coat PLUS

Упаковки

GC EQUIA	
Упаковка Интро	Упаковка 50 капсул (объем смеси в капсуле 0.14 мл), 4 мл флакон G-Coat PLUS и аксессуары Имеющиеся оттенки: Ассорти, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
Упаковка Промо	2 упаковки по 50 в каждой (объем смеси в капсуле 0.14 мл), 4 мл флакон G-Coat PLUS и аксессуары Имеющиеся комбинации оттенков: A3 - Ассорти, A1 - A3, A2 - A2, A2 - A3, A3 - A3, A3.5 - A3, B1 - A3, B2 - A3, B3 - A3, C4 - A3
Дополнительно	Упаковка 50 капсул (объем смеси в капсуле 0.14 мл) Имеющиеся оттенки: Ассорти, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4
G-Coat PLUS	
003272	Стартовый набор (флакон 4 мл, 20 одноразовых блоков для замешивания, 50 микроаппликаторов и 1 держатель для аппликаторов)



«СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ПОДХОД В СТОМАТОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ИДЕАЛЬНЫЙ БАЛАНС»

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

EQUIA Concept

ПОКАЗАНИЯ



Dr. G. Milicich

Пломбирование минимально инвазивных полостей



Dr. S. Voulliotis

Пломбирование в случае повторного кариеса



Dr G. Knight

Туннельная реставрация



Dr M. Basso

Реставрация в области корня зуба



Dr Lassocinscki

Реставрация окклюзионной поверхности постоянного зуба



Dr J. Lucas

Пломбирование молочных зубов в проксимальной области

ШАГ ЗА ШАГОМ



1. Подготовка полости



2. Нанесение Cavity Conditioner



3. Внесение GC Fuji IX GP EXTRA




4. Предварительное оконтуривание



5. Оконтуривание через 2'30"



6. Нанесение G-Coat PLUS

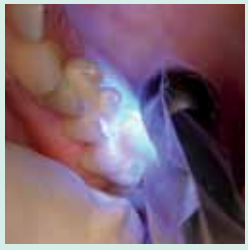

7. Полимеризация 20"



8. Окончательный результат

Клинический случай Dr. P. Tietze

GC Fuji IX GP (FAST)

ДЖИ СИ Фуджи IX ДЖИ ПИ (ФАСТ)



Стеклоиономерный реставрационный цемент пакуемой вязкости с Традиционным и Укороченным временем отверждения

Не прилипающий к инструментам Fuji IX GP (FAST), обладающий пакуемой вязкостью, стал идеальным материалом для изготовления реставраций по V, I и II классу, а также для восстановления культи зуба и замещения объема дентина при «сэндвич-технике». Выдающиеся характеристики классического стеклоиономерного цемента в сочетании с простотой применения позволяют Fuji IX GP (FAST) удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к современным реставрационным материалам.

Свойства & преимущества

- Простой в применении стеклоиономерный цемент пакуемой вязкости с высокой устойчивостью к истираемости для реставраций жевательной группы зубов
- Не требуется применение раббер - дама
- Выраженная адгезия к эмали и дентину, не требуется протравливание и бондинг
- Не требуется создание ретенционных пунктов, что позволяет применять щадящую технику препарирования тканей зуба
- Применение металлических матриц при работе с материалом позволяет легко оформлять контуры реставрации
- Одномоментное внесение замешанного материала в полость
- Хорошая рентгеноконтрастность облегчает послеоперационную диагностику
- Отличная биосовместимость

Дополнительные преимущества Fuji IX GP FAST:

- Сокращенное время отверждения, финишная обработка возможна уже через 3 минуты от начала замешивания
- Более густая консистенция, легко пакуется
- Прочнее благодаря повышенной износостойкости

Упаковки

GC Fuji IX GP P/L / Порошок/Жидкость	
003264	Упаковка Интро 1-1, A3 (15 г порошка и 6.4 мл жидкости)
900444	Упаковка 3-2 (3 x 15 г порошка: A2, A3, B3, и 2 x 6.4 мл жидкости)
003265	A2, 15 г порошка
003266	A3, 15 г порошка
003267	A3.5, 15 г порошка
003268	B2, 15 г порошка
003269	B3, 15 г порошка
003270	C4, 15 г порошка
003271	6.4 мл жидкости
GC Fuji IX GP CAPS / Капсулы (объем смеси в капсуле 0.14 мл)	
003273	A2, упаковка 50 капсул
003274	A3, упаковка 50 капсул
003275	A3.5, упаковка 50 капсул
003276	B2, упаковка 50 капсул
003277	B3, упаковка 50 капсул
003278	C4, упаковка 50 капсул
GC Fuji IX GP FAST CAPS / Капсулы (объем смеси в капсуле 0.14 мл)	
003288	A1, упаковка 50 капсул
003289	A2, упаковка 50 капсул
003290	A3, упаковка 50 капсул
003291	A3.5, упаковка 50 капсул
003292	B2, упаковка 50 капсул
003293	B3, упаковка 50 капсул
003294	C4, упаковка 50 капсул



Применение

Помимо основных показаний в качестве реставрационного материала для реставраций в области жевательной группы зубов, Fuji IX GP часто используется, когда решение об окончательном типе реставрационной конструкции не принято. Возможны различные дальнейшие варианты: «сэндвич - техника» - замещение поверхностного слоя цемента композитным материалом, изготовление вкладки или просто сохранение стеклоиономерной реставрации в полном объеме.

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Светоотверждаемый стеклоиономерный реставрационный цемент

GC Fuji II LC Improved

ДЖИ СИ Фуджи II Л Си Новая Формула

Fuji II LC Improved является мировым лидером среди светоотверждаемых стеклоиономерных цементов. Изначально созданный для изготовления реставраций по III и V классу и для пломбирования молочных зубов, Fuji II LC Improved является многофункциональным материалом и применяется также как прокладочный материал, база для сэндвич-техники и для восстановления культи зуба.

Свойства & преимущества

- Меньшие размеры частиц обеспечивают прекрасную эстетику и полируемость
- Большее количество наполнителя значительно повышает устойчивость к абразии
- Хорошая рентгеноконтрастность упрощает послеоперационную диагностику
- Самоадгезия к структурам зуба и гидрофильность
- Выпускается в 11 оттенках по шкале Vita®



Упаковки

GC Fuji II LC Improved P/L / Порошок/Жидкость	
900469	Упаковка Интро 3-2 (3 x 15 г порошка: A2, A3, B3, и 2 x 6.8 мл жидкости)
003252	A1, 15 г порошка
003253	A2, 15 г порошка
003254	A3, 15 г порошка
003255	A3.5, 15 г порошка
003256	A4, 15 г порошка
003257	B2, 15 г порошка
003258	B3, 15 г порошка
003259	B4, 15 г порошка
003260	C2, 15 г порошка
003261	C4, 15 г порошка
003262	D2, 15 г порошка
003263	6.8 мл жидкости

GC Fuji II LC CAPS / Капсулы (объем смеси в капсуле 0.10 мл) 003244 Ассорти, упаковка 50 капсул (A4, B2, B3, B4, C2, D2)	
003244	Ассорти, упаковка 50 капсул (A4, B2, B3, B4, C2, D2)
003233	A1, упаковка 50 капсул
003234	A2, упаковка 50 капсул
003235	A3, упаковка 50 капсул
003236	A3.5, упаковка 50 капсул
003237	A4, упаковка 50 капсул
003238	B2, упаковка 50 капсул
003239	B3, упаковка 50 капсул
003240	B4, упаковка 50 капсул
003241	C2, упаковка 50 капсул
003242	C4, упаковка 50 капсул
003243	D2, упаковка 50 капсул

Самоотверждаемый усиленный стеклоиономерный реставрационный цемент

GC Fuji VIII GP

ДЖИ СИ Фуджи VIII ДЖИ ПИ

Стеклоиономерный реставрационный цемент с улучшенными физическими и эстетическими качествами, которые выдвигают его на первое место при выборе материала для реставраций по III и V классу и реставрации поверхности корня зуба. Fuji VIII GP – это весьма экономичный продукт.

Свойства & преимущества

- Надежный и долговечный бондинг благодаря сильной химической адгезии
- Отличная светопроницаемость без светоотверждения
- Уникальная формула со специфическими смолами делает материал отличным выбором для реставраций в области передней группы зубов
- Хорошая диаметральная прочность на разрыв (30 МПа) и высокая прочность на излом (52 МПа)
- Достигает 90% уровня своих физических свойств всего за 10 минут
- Плюс все преимущества стандартного СИЦ

Применение

Рабочее время: 1 мин 30

Общее время отверждения: 2 мин 10



Упаковки

GC Fuji VIII GP P/L / Порошок/Жидкость (15 г порошка, 6.8 мл жидкости)	
003245	A2, Упаковка 1-1
003246	A3, Упаковка 1-1
003247	A3.5, Упаковка 1-1
003248	B2, Упаковка 1-1
003249	B3, Упаковка 1-1
003250	C4, Упаковка 1-1
003251	8 г жидкости
GC Fuji VIII GP CAPS / Капсулы (объем смеси в капсуле 0.10 мл)	
001869	Ассорти, упаковка 50 капсул
001863	A2, упаковка 50 капсул
001864	A3, упаковка 50 капсул
001865	A3.5, упаковка 50 капсул
001866	B2, упаковка 50 капсул
001867	B3, упаковка 50 капсул
001868	C4, упаковка 50 капсул

GC Gradia Direct

ДЖИ СИ Градия Директ

Светоотверждаемый реставрационный композит



GC Gradia Direct позволит удовлетворить Ваши самые изысканные эстетические запросы. Он гарантирует создание естественно безупречных и надёжных реставраций как с помощью многослойной, так и однослойной техники нанесения. Благодаря уникальной цветовой адаптации к оттенкам твёрдых тканей реставрируемых зубов Вы можете добиться непревзойдённой естественности реставраций с помощью всего одного оттенка. Комбинация различных оттенков – максимально трёх для передней группы зубов и двух для жевательной, обеспечивает превосходные эстетические результаты.

Свойства & преимущества

- Микрофильный гибридный композит
- Одна полная реставрационная система для всех показаний
- Уникальная система состоит из Стандартных, Внешних Специальных и Внутренних Специальных оттенков для создания «невидимых» реставраций
- Увеличенное время работы благодаря низкой чувствительности к внешнему источнику освещения
- Сбалансированная вязкость обеспечивает великолепные рабочие свойства

GC Gradia Direct для реставраций в области передней группы зубов (версия Anterior)

- Гладкая и блестящая поверхность, легко и быстро полируется
- Безупречное цветовое соответствие и адаптация к естественному оттенку тканей зуба
- Полный спектр оттенков, включая Отбеленные оттенки

GC Gradia Direct для реставраций в области жевательной группы зубов (версия Posterior)

- Исключительные механические характеристики
- Великолепная эстетика
- Высокая прочность на сжатие предотвращает сколы и растрескивание материала при повышенной окклюзионной нагрузке

GC Gradia Direct X

- Новый высоконаполненный предварительно полимеризованный нанонаполнитель, содержащий лантаноидный фторид
- Рентгеноконтрастность в сочетании с великолепной эстетикой
- овышенная износоустойчивость и оптимизированная жесткость по отношению к интактным зубам – антагонистам



Упаковки

GC Gradia Direct Syringes / Шприцы (версия Anterior – 2.7 мл/4 г, версия Posterior – 2.7 мл/4.7 г, версия X – 2.7 мл/5 г)	
003332	Ознакомительный Набор (7 шприцов), 6 Оттенков Anterior (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT), 1 Оттенок Posterior (P-A2) & 1 Оттеночная шкала
900468	Полный Набор (26 шприцов), включает все Стандартные (кроме B1 и XBW), Внутренние Специальные и Внешние Специальные Оттенки & 1 Оттеночную Шкалу
Отдельно	1 шприц любого оттенка
GC Gradia Direct Unitips /Унидозы (версия Anterior – 0.16 мл/0.24 г, версия Posterior – 0.16 мл/0.28 г, версия X – 0.16 мл/0.30 г)	
003331	Ознакомительный Набор (35 Унидоз), 6 Оттенков Anterior (A2, A3, A3.5, AO3, CV, CT), 1 Оттенок Posterior (P-A2) & 1 Оттеночная шкала
800177	Полный Набор (106 Унидоз), включает все Стандартные (кроме B1 и XBW), Внутренние Специальные и Внешние Специальные Оттенки & 1 Оттеночную шкалу
Отдельно	Упаковка 20 Унидоз следующих оттенков: A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV, DT, NT, P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT, X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-WT
Отдельно	Упаковка 10 Унидоз следующих оттенков: A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO4, CVD, BW, XBW, CT, WT, GT, CVT, X-AO2
GC Gradia Direct Аксессуары	
003389	Оттеночная шкала, 1 шт

2007 REALITY Four Star Award

THE DENTAL ADVISOR

Применение

Стандартные Оттенки: Исключительный «эффект хамелеона» при изготовлении реставраций в области передней и жевательной групп зубов.
Внешние Специальные: Светопроницаемые оттенки для характеризации реставраций в области передней и жевательной групп зубов.
Внутренние Специальные: Опаковые оттенки для характеризации реставраций только в области передней группы зубов.

Более подробную информацию о составе наборов и отдельных компонентах вы найдете в брошюрах и на сайте компании: www.gceurope.com/goto/itemlist.

МНОГОЦВЕТНАЯ СХЕМА ПОСЛОЙНОГО НАНЕСЕНИЯ

I Класс





СТАНДАРТНЫЙ





II Класс





ВНЕШНИЙ




III Класс






ВНУТРЕННИЙ

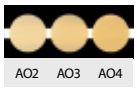

СТАНДАРТНЫЙ





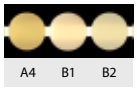



IV Класс





ВНЕШНИЙ



ВНЕШНИЙ



V Класс






ВНЕШНИЙ



СТАНДАРТНЫЙ

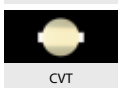

Dr. N. Farès

GC Gradia Direct LoFlo

ДЖИ СИ Градия Директ ЛоФло

Низкомодульный светоотверждаемый гибридный композит повышенной вязкости

GC Gradia Direct LoFlo, первый низкомодульный композит, который можно считать настоящим реставрационным материалом, подходит не только для реставраций класса V или изготовления прокладок, но и для реставраций класса I, II и III. ДЖИ СИ представляет новый низкомодульный реставрационный материал, обладающий непревзойденными физическими свойствами и изготовленный с применением новой технологии HDR – высокой рентгеноконтрастности.

Свойства & преимущества

- Способность растекаться по поверхности без усадки обеспечивает идеальную адаптационную способность
- Высокая износоустойчивость и стойкость к сколам, сравнимые с параметрами современных композитов для жевательной группы зубов
- Уровень усадки на 55% меньше, чем у ведущих низкомодульных композитов на стоматологическом рынке
- 7 выпускаемых оттенков великолепно сливаются с окружающими тканями зубов
- HDR пре-полимеризованный наполнитель, изготовленный с применением технологии Нано-кварцевого наполнения, значительно увеличивает долговечность, легкость полировки и рентгеноконтрастность материала
- Добавление фторалюмосиликатного стекла обеспечивает вам дополнительную защиту от вторичных кариозных поражений



Показания

- Реставрации полостей по I, II, III, IV, V классу
- Реставрации молочных зубов
- Пломбирование полостей при тунельной технике препарирования и при применении принципов Минимальной Интервенции
- Запечатывание участков поверхности зуба с гиперчувствительностью
- Прокладка/база под реставрационные композиты, например GC Gradia Direct
- Иммобилизация подвижных зубов
- Коррекция небольших дефектов композитных реставраций

Упаковки

GC Gradia Direct LoFlo (объём материала в шприце 1.3 г/0.8 мл)	
003448	A1, 2 шприца
003449	A2, 2 шприца
003450	A3, 2 шприца
003451	A3.5, 2 шприца
003452	AO3, 2 шприца
003453	CV, 2 шприца
003454	BW, 2 шприца
001926	Металлические насадки для шприцов, 20 шт
001927	Пластмассовые насадки для шприцов, 20 шт

GC Gradia Direct Flo

ДЖИ СИ Градия Директ Фло

Светоотверждаемый Текучий Гибридный Композит

GC Gradia Direct Flo – это светоотверждаемый микрогибридный рентгеноконтрастный композит, созданный специально для использования в комбинации с GC Gradia Direct. Благодаря специфическим физическим свойствам, оптимальной текучести и возможности прямого нанесения с помощью шприца этот материал идеален для изготовления прокладок под композитные реставрации.

Свойства & преимущества

- Не стекающий и не липкий состав GC Gradia Direct Flo хорошо адаптируется к стенкам полости и упрощает применение материала
- Светоотверждаемый и рентгеноконтрастный, что упрощает диагностику
- Специальная конфигурация шприца обеспечивает простоту обращения и точность нанесения



Показания

- Прокладки / базы под реставрационные композиты, например GC Gradia Direct
- Пломбирование полостей при тоннельном препарировании
- Пломбирование очень маленьких полостей при Минимальной Интервенции
- Иммобилизация подвижных зубов
- Коррекция небольших дефектов композитных реставраций

Упаковки

GC Gradia Direct Flo (объём материала в шприце 1.5 г/0.8 мл)	
003441	A1, 2 шприца
003442	A2, 2 шприца
003443	A3, 2 шприца
003444	A3.5, 2 шприца
003445	AO3, 2 шприца
003446	CV, 2 шприца
003447	BW, 2 шприца
001926	Металлические насадки для шприцов, 20 шт
001927	Пластмассовые насадки для шприцов, 20 шт

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Однокомпонентная самопротравливающая светоотверждаемая адгезивная система

G-Bond

ДЖИ-Бонд



G-Bond – это новейшая однокомпонентная самопротравливающая светоотверждаемая адгезивная система, простая в применении и использующая и микромеханическую, и химическую адгезию. Два функциональных мономера, 4-MET и Эфир Фосфорной Кислоты, соединяются с наночастицами и формируют уникальный и стабильный ионообменный слой с дентином, Зону Ионообмена (NIZ), обеспечивая, в то же время, и надежную адгезию к эмали.

Свойства & преимущества

- Мягкое протравливание эмали и дентина оставляет закрытыми дентинные канальцы и обеспечивает максимально низкий риск появления послеоперационной чувствительности
- Наличие двух различных функциональных мономеров создает химическую адгезию к дентину и эмали зуба
- Одновременная деминерализация и инфильтрация мономера позволяет более эффективно запечатать гибридный слой, понижая риск утечки ионов
- Однокомпонентная система с упрощенным применением экономит время – процедура занимает 30 секунд
- Прост в применении, прочность и надежность адгезии мало зависит от степени влажности дентина
- Не содержит HEMA – нет риска возникновения аллергических реакций
- Стабильный состав, хранение при комнатной температуре
- Выпускается во флаконах и Унидозах для более гигиеничного нанесения

Упаковки

G-Bond	
003416	Стартовый Набор, Флакон (5 мл флакон, 50 одноразовых аппликаторов и 1 блок для замешивания)
003417	Стартовый Набор, Унидозы (50 x 0.1 мл Унидоз и 50 одноразовых аппликаторов)



2007 REALITY Four Star Award

THE DENTAL ADVISOR 2007 Preferred Product


Применение

Быстрая процедура из трех шагов, занимающая всего 30 секунд! Нанесите GC G-Bond на поверхность эмали и дентина, оставьте на 5-10 секунд. Тщательно подсушите МАКСИМАЛЬНО сильной струей воздуха в течение 5 секунд с использованием вакуумного отсоса. Фотополимеризуйте в течение 10 секунд.

G-CEM & G-CEM Automix

ДЖИ-ЦЕМ и ДЖИ-ЦЕМ Аутомикс

Самоадгезивный цемент для постоянной фиксации в капсулах или картриджах для автоматического замешивания

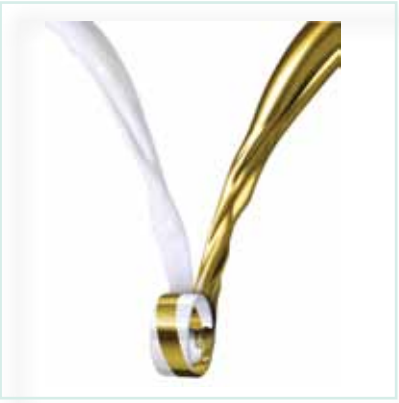

G-CEM – это самоадгезивный универсальный композитный цемент двойного отверждения, выпускаемый в капсулах или двойных картриджах для автоматического замешивания, который был создан для адгезивной фиксации цельнокерамических, металлических и непрямых композитных реставраций. Принимая во внимание, что технология CAD-CAM и безметалловые реставрации становятся все более популярны, был разработан G-CEM с целью соединить в себе улучшенные рабочие качества и способность к химической адгезии традиционных цементов и великолепные физические свойства, адгезию и эстетику композитных цементов. G-CEM обеспечивает простоту в работе, не жертвуя при этом прочностью бондинга к дентину, эмали и цирконию.

Показания

G-CEM & G-CEM Automix
- Цельнокерамические и цельнокомпозитные коронки, мостовидные протезы, вкладки и накладки (2 абатмента)
- Металлические и металлокерамические коронки, мостовидные протезы, вкладки и накладки (2 абатмента)

G-CEM Automix
- Мостовидные протезы большой протяжённости
- Металлические, стекловолоконные и керамические штифты заводского изготовления

Свойства & преимущества

- Великолепная прочность бондинга к реставрационным материалам, а также к цирконию
- Высокая степень адгезии к эмали и в режиме самоотверждения, и в режиме светоотверждения
- Не требует предварительного кондиционирования поверхности зубов
- Прямое внесение материала в корневой канал с помощью специальной удлиняющей насадки, прилагаемой к версии Automix
- Не происходит выцветания после отверждения благодаря высокой стабильности цвета
- Очень низкий коэффициент линейного расширения
- Более высокий уровень фторовыделения, чем у других конкурирующих материалов
- Двойной картридж для автоматического замешивания или экономичные капсулы большого объёма

Упаковки

G-CEM CAPS / Капсулы (объем смеси в капсуле 0.17 мл)	
003221	Ассорти, упаковка 50 капсул
003217	A2, упаковка 50 капсул
003228	AO3, упаковка 50 капсул
003229	Прозрачный, упаковка 50 капсул
003230	BO1, упаковка 50 капсул
G-CEM Automix (объём материала в шприце 4.8 г – 2.7 мл)	
002898	A2, 2 шприца, 20 наконечников Automix тип Regular
002899	Прозрачный, 2 шприца, 20 наконечников Automix тип Regular
002900	AO3, 2 шприца, 20 наконечников Automix тип Regular
002901	BO1, 2 шприца, 20 наконечников Automix тип Regular
G-CEM Automix Аксессуары	
002902	Наконечники Automix тип Regular, 20 шт
002903	Наконечники Automix для эндодонтии, 10 наконечников Automix для эндодонтии, 10 Удлиняющих насадок



Стеклоиономерный цемент, модифицированный композитом, для постоянного цементирования

GC FujiCEM (Automix)

ФуджиЦЕМ (Аутомикс)



FujiCEM – первый в мире модифицированный композитом стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации, выпускаемый в форме ПАСТЫ. В комплекте со специальным диспенсером FujiCEM образует завершённую «систему» для фиксации, которая не только упрощает процесс цементирования, но и экономит Ваше время, а также гарантирует идеальный результат. FujiCEM подтвердил свою репутацию великолепными клиническими результатами, полученными за семь лет его пребывания на рынке. Теперь выпускается также в новых картриджах улучшенного типа для автоматического замешивания.

Свойства & преимущества

- Упаковка в виде картриджа сокращает время подготовки
- Контролируемое дозирование обеспечивает нужное количество материала для любых показаний
- Пасты замешиваются в течение всего 10 секунд, в замешанном материале отсутствуют пузырьки воздуха
- Оптимальное рабочее время
- Материал приобретает текучесть под давлением, за счет чего образуется пленка толщиной всего в 3 µм, дающая идеальную припасовку
- Неразрушимый в клинических условиях бондинг на ионном уровне обеспечивает гарантированную надежную адгезию и оптимальный клинический результат
- Нет послеоперационной чувствительности
- Оптимальный уровень фторовыделения

Показания

- Учитывая простоту применения и выгоду во времени, FujiCEM идеально подходит для постоянного цементирования большинства конструкций, включая любые металлические сплавы и керамические вкладки/накладки.

Упаковки

GC FujiCEM (Automix) (13.3 г/7.2 мл в каждом картридже)	
003208	Отдельно 2 Пэйст Пак картриджа
003207	2 Пэйст Пак картриджа и 44 смешивающих наконечника
001573	Пэйст Пак Диспенсер
900446	Отдельно 20 смешивающих наконечников

Примечание

Замешивание вручную позволяет изменять дозировку.
Версия Automix позволяет легко вносить материал непосредственно в реставрацию.



GC Fuji PLUS (EWT)

ДЖИ СИ Фуджи ПЛЮС (EBT)

Стеклоиономерный цемент, модифицированный композитом, для постоянной фиксации

Fuji PLUS, благодаря комбинации композита и СИЦ, а также наличию нескольких оттенков, имеет широкий спектр показаний к применению. Fuji PLUS EWT обладает пролонгированным рабочим временем и идеально подходит для постоянного цементирования мостовидных протезов большой протяженности, комбинированной работы и одномоментной фиксации нескольких одиночных конструкций.

Свойства & преимущества

- Легко замешивается и удобен в работе, как обычный цемент, при этом механические свойства аналогичны таковым у композитных цементов
- Химическая адгезия к твердым тканям зуба позволяет работать в условиях повышенной влажности, не требуется применение бондинговых систем
- Минимальная толщина пленки, легкая и точная припасовка конструкции
- Отсутствие послеоперационной чувствительности
- Исключительно низкая растворимость в ротовой жидкости гарантирует надежное краевое прилегание
- Рентгеноконтрастность облегчает диагностику

Показания

Fuji PLUS является многоцелевым материалом и применяется для цементирования: металлических, металлокерамических и металлокомпозитных коронок и мостовидных протезов на основе любых сплавов; вкладок / накладок из керамики; усиленных керамических коронок и мостовидных протезов; цельнокомпозитных коронок, мостовидных протезов, вкладок/накладок из любых композитов.



Упаковки

GC Fuji PLUS P/L Порошок/Жидкость	
003211	Упаковка Интро, полный набор A3 (15 г порошка, 7 мл жидкости, 6.5 мл кондиционера, аксессуары)
003212	Жёлтый, 15 г порошка
003214	Прозрачный, 15 г порошка
003213	A3, 15 г порошка
003231	EWT, A3, 15 г порошка (совместимый с Жидкостью GC Fuji Plus)
003215	7 мл жидкости
003232	Кондиционер, 6.5 мл
GC Fuji PLUS CAPS / Капсулы (объем смеси в капсуле 0.19 мл)	
003209	Жёлтый, упаковка 50 капсул
003210	A3, упаковка 50 капсул

GC Fuji I

ДЖИ СИ Фуджи I

Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации

25 - летний документированный опыт применения Fuji I наглядно доказывает надежность и эффективность использования этого материала для постоянной фиксации большинства ортопедических конструкций в повседневной практике.

Свойства & преимущества

- Совместим с пульпой и мягкими тканями, риск послеоперационной гиперчувствительности минимален
- Прекрасная адгезия, надежное краевое прилегание
- Пролонгированное рабочее время, оптимальная консистенция замешанного материала, простота в работе
- Маленький размер частиц
- Удобная припасовка конструкции
- Быстрое отверждение
- Выраженная рентгеноконтрастность
- Пролонгированное фторовыделение

Показания

Fuji I идеален для постоянного цементирования металлических каркасов ортопедических конструкций.



Упаковки

GC Fuji I P/L Порошок/Жидкость	
003201	Упаковка Интро 1-1 Светло-Жёлтый (35 г порошка, 20 мл жидкости, аксессуары)
003203	Светло-Жёлтый, 35 г порошка
003205	20 мл жидкости
GC Fuji I CAPS / Капсулы (объем смеси в капсуле 0.19 мл)	
003106	Светло-Жёлтый, упаковка 50 капсул

ФИКСИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклоиономерный цемент, модифицированный композитом, для фиксации ортодонтических конструкций, в форме «паста-паста»

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak

ДЖИ СИ Фуджи ОРТО БАНД Пэйст Пак



Первый в мире ортодонтический цемент, объединивший в себе преимущества фиксирующего ортодонтического цемента и упаковки «паста-паста».

Свойства & преимущества

- Фиксация колец и шин
- Упаковка в виде картриджа Paste Pak
- Пленка толщиной всего в 3 µм
- Оптимальные рабочие характеристики
- Высокое фторовыделение
- Синий цвет
- Легкое удаление остатков материала и изъятие конструкции

Упаковки

GC Fuji ORTHO BAND Paste Pak	
001888	Упаковка 2 Пэйст Пак Картриджа, 2 x 13.3 г / 7.2 мл, блок для замешивания
001820	Кондиционер, 23.8 мл жидкости
001573	Пэйст Пак Диспенсер

Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент для фиксации ортодонтических приспособлений

GC Fuji ORTHO LC

ДЖИ СИ Фуджи ОРТО Л Си



Предназначен для фиксации брекетов, колец и шин. Световое отверждение материала обеспечивает удлиненное комфортное рабочее время.

Свойства & преимущества

- Фотополимеризация в течение 40 секунд
- Отличная адгезия даже во влажной среде
- Удобный и простой в применении
- Легкое удаление брекетов и шин без повреждения эмали
- Пролонгированное фторовыделение
- Не вызывает изменения окраски

Упаковки

GC Fuji ORTHO LC P/L Порошок/Жидкость	
000027	Упаковка Интро (15 г порошка, 6.8 мл жидкости и аксессуары)
000029	40 г порошка
000030	6.8 мл жидкости
GC Fuji ORTHO LC CAPS / КАПСУЛЫ (объем смеси в капсуле 0.10 мл)	
000034	Упаковка 50 капсул
001820	Кондиционер, 23.8 мл жидкости

Стеклоиономерный цемент химического отверждения для фиксации ортодонтических приспособлений

GC Fuji ORTHO

ДЖИ СИ Фуджи ОРТО



Идеальное сочетание свойств композитных и стеклоиономерных материалов при фиксации ортодонтических приспособлений.

Свойства & преимущества

- Отличная адгезия даже во влажной среде
- Удобный и простой в применении
- Легкое удаление брекетов и шин без повреждения эмали
- Химическое отверждение
- Пролонгированное фторовыделение
- Не вызывает изменения окраски

Упаковки

GC Fuji ORTHO P/L Порошок/Жидкость	
000208	Упаковка Интро 1-2 (1 x 40 г порошка, 2 x 6.8 мл жидкости и аксессуары)
000209	40 г порошка
000210	6.8 мл жидкости
001820	Кондиционер, 23.8 мл жидкости

GC Fuji LINING LC Paste Pak

ДЖИ СИ Фуджи ЛАЙНИНГ Л Си Пэйст Пак



Светоотверждаемый прокладочный стеклоиономерный материал, модифицированный композитом, в форме паста-паста, для быстрого изготовления долговечных прокладок. Сочетает в себе возможность точной дозировки и великолепные рабочие характеристики.

Светоотверждаемый стеклоиономерный прокладочный материал в форме паста-паста

Свойства & преимущества

- Простое и аккуратное дозирование
- Удобное смешивание, отсутствие пузырьков воздуха в замешанном материале
- Хорошая адаптация к стенкам полости без стекания
- Тонкая пленка
- Отличная адгезия к тканям зуба без кондиционирования
- Надежное сцепление с композитами

Упаковки

GC Fuji LINING LC Paste Pak	
001887	Пэйст Пак Картридж, 7 г/ 4.7 мл, и блок для замешивания
001573	Пэйст Пак Диспенсер

GC Fuji LINING LC

ДЖИ СИ Фуджи Лайнинг Л Си



Светоотверждаемый стеклоиономер типа Порошок-Жидкость для быстрого изготовления прокладок под композиты, амальгаму и керамические вкладки.

Светоотверждаемый стеклоиономерный прокладочный материал

Свойства & преимущества

- Светоотверждение, сокращенное время отверждения (фотоактивация в течение 30 секунд)
- Низкая растворимость, не чувствителен к избыточной влажности
- Отличная адгезия к структурам зуба обеспечивает надежное краевое прилегание
- Рентгеноконтрастность упрощает послеоперационную диагностику

Упаковки

GC Fuji LINING LC	
000021	Упаковка Интро 1-1 (10 г порошка, 6.8 мл жидкости и аксессуары)
000022	10 г порошка
000128	6.8 мл жидкости

GC Fuji BOND LC

ДЖИ СИ Фуджи БОНД Л Си



Первая адгезивная система от GC, основанная на СИЦ, для работы с любыми композитами.

Светоотверждаемая стеклоиономерная бондинговая система

Свойства & преимущества

- Высокая эластичность
- Гидрофильность
- Контролируемое время отверждения, фотополимеризация в течение 20 секунд
- Прочная адгезия к эмали и дентину, надежное краевое прилегание без предварительного протравливания
- Совместима со всеми светоотверждаемыми композитами
- Идеальный выбор для реставраций в области жевательной группы зубов

Упаковки

GC Fuji BOND LC	
000207	Стандартный Набор (5 г порошка, 7 мл жидкости и 5.7 мл GC Cavity Conditioner)
000179	5 г порошка
000180	7 мл жидкости

Примечание

Эластичность системы компенсирует полимеризационную усадку и жевательную нагрузку, не оказывая отрицательного воздействия на прочность адгезии между твердыми тканями зуба и композитом.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Светоотверждаемое самоадгезивное нанонаполненное защитное покрытие

G-Coat PLUS

ДЖИ-Коут ПЛЮС



G-Coat PLUS – это первое защитное покрытие, содержащее равномерно распределяющийся нано-наполнитель, для работы со стеклоиономерными, композитными и временными реставрациями. Покрытие придаёт влажный блеск, что повышает эстетичность реставрации, а также обеспечивает повышенную прочность реставрации, устойчивость к излому, защиту от внешних воздействий, не говоря уже об экономии Вашего рабочего времени. Больше нет необходимости производить полировку реставрации, поскольку G-Coat PLUS позволяет Вам получить блестящую и гладкую поверхность за счёт очень простой трёхэтапной процедуры нанесения покрытия.

Свойства & преимущества

- Обеспечивает чистую гладкую поверхность, что снижает риск окрашивания реставрационных материалов
- Предотвращает первоначальную чувствительность СИЦ к влаге
- Защищает область границы тканей зуба с реставрационным материалом
- Повышает износостойкость, особенно у стеклоиономерных материалов
- Активируется различными типами фотополимеризационных устройств (галоген, LED, плазма)

Показания к применению

- Стеклоиономерные реставрации
- Композитные реставрации
- Временные коронки
- Имеющиеся реставрации
- Защита области границы тканей зуба с реставрационным материалом

Упаковки

G-Coat PLUS	
003272	Стартовый Набор, Флакон (флакон 4 мл, 20 блоков для замешивания, 50 микроаппликаторов и 1 держатель для аппликаторов)

Применение

Выдавите 1 каплю материала
Нанесите на поверхность реставрации
Фотополимеризуйте в течение 20 секунд
(Не обдувать струёй воздуха)



GC Cavity Conditioner

ДЖИ СИ Кавити Кондиционер



Слабый 20% раствор полиакриловой кислоты для устранения загрязняющего слоя и улучшения состояния поверхности твердых тканей зуба.

Раствор для устранения загрязняющего слоя

Свойства & преимущества

- Эффективно очищает поверхность твердых тканей зуба, помогая достичь оптимальной химической адгезии
- Способствует формированию дополнительных микромеханических связей
- Снижает риск послеоперационной чувствительности
- Обеспечивает надежное краевое прилегание
- Синий цвет обеспечивает контроль над нанесением раствора

Упаковки

GC Cavity Conditioner	
000110	5.7 мл жидкости

Применение
Нанести с помощью аппликатора на 10 секунд, смыть водой, слегка просушить (не пересушивать!) и внести замешанный стеклоиономер.

GC Dentin Conditioner

ДЖИ СИ Дентин Кондиционер



10% раствор полиакриловой кислоты для устранения загрязняющего слоя позволяет значительно усилить химическую адгезию стеклоиономерного цемента к твердым тканям зуба.

Раствор для устранения загрязняющего слоя

Свойства & преимущества

- Улучшает краевое прилегание, увеличивая долговечность реставрации
- Оставляет дентинные канальцы закрытыми, снижает риск послеоперационной чувствительности
- Синий цвет обеспечивает контроль над нанесением раствора

Упаковки

GC Dentin Conditioner	
000120	23.8 мл жидкости

Применение
Нанести с помощью аппликатора на 20 секунд, смыть водой, слегка просушить (не пересушивать!) и внести замешанный стеклоиономер.

GC Fuji COAT LC

ДЖИ СИ Фуджи КОУТ Л Си



Быстрая обработка поверхности, защита от переувлажнения и дегидратации для всех типов стеклоиономерных цементов.

Светоотверждаемый защитный лак

Свойства & преимущества

- Высокая текучесть упрощает нанесение
- Светоотверждение в течение всего 10 секунд
- Идеально гладкая и блестящая поверхность препятствует скоплению налета

Упаковки

GC Fuji COAT LC	
000176	5.2 мл жидкости

Применение
Нанести Fuji COAT LC ватным тампоном или кистью на поверхность стеклоиономера. Светоотверждение в течение 10 секунд с помощью любого фотополимеризационного устройства.

ФИНИРОВАНИЕ

Штрипсы для финирования

GC New Metal Strips

ДЖИ СИ Новые Металлические Штрипсы

Маркированные цветом металлические штрипсы различной степени абразивности, гальванически покрытые порошком оксида алюминия. Для апроксимального оконтуривания, финирования и полировки любых реставраций.



Свойства & преимущества

- Очень гибкие и прочные
- Исключительно тонкие, что позволяет легко обрабатывать апроксимальные поверхности
- Автоклавируются и легко очищаются
- Различная ширина и степень абразивности

Упаковки

GC New Metal Strips	
000267	Ассортимент (2.6 мм, 3.3 мм, 4.0 мм), 12 шт (по 1 шт каждой степени зернистости и ширины)
Отдельные Наборы	
000251	Красный (начальная обработка), N.200, набор, 12 шт (4 шт каждой ширины)
000255	Голубой (конечная обработка), N.300, набор, 12 шт (4 шт каждой ширины)
000259	Зеленый (финирование), N.600, набор, 12 шт (4 шт каждой ширины)
000263	Жёлтый (полирование), N.1000, набор, 12 шт (4 шт каждой ширины)
Наборы 6 мм	
000268	Красный (начальная обработка), N.200, 6 мм, 12 шт
000269	Голубой (конечная обработка), N.300, 6 мм, 12 шт
000270	Зеленый (финирование), N.600, 6 мм, 12 шт
000271	Жёлтый (полирование), N.1000, 6 мм, 12 шт

Полимерные штрипсы для финирования и полирования

GC Epitex

ДЖИ СИ Эпитекс

Удобное оформление контуров реставраций из стеклоиономерных и композитных материалов, финирование и полирование апроксимальных поверхностей.

Свойства & преимущества

- Исключительно тонкие и гибкие, прекрасная адаптация при обработке плотных интерпроксимальных контактов
- Очень высокая прочность на разрыв
- Частицы абразива надежно инкорпорированы в полимерную матрицу полосок
- 4 степени абразивности
- Удобный настольный диспенсер
- Также имеется прозрачная матрица



Показания

- Крупная = начальная обработка
- Средняя = конечная обработка
- Мелкозернистая = финирование
- Сверхмелкозернистая = полирование

Упаковки

GC Epitex	
000404	Стартовый набор, Настольная подставка с диспенсерами по 10 м штрипсов каждой степени абразивности
000409	Прозрачная матрица, 10 м
000405	Крупная (голубая), 10 м
000407	Средняя (зеленая), 10 м
000406	Мелкозернистая (серая), 10 м
000408	Сверхмелкозернистая (розовая), 10 м

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ И ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



2009-2010

	Fuji IX GP	Fuji IX GP CAPS	Fuji IX GP FAST	Fuji IX GP EXTRA	Fuji II LC Improved	Fuji II LC CAPS	Fuji VIII GP	Fuji VIII GP CAPS	Fuji II	Fuji II CAPS	Miracle Mix	Miracle Mix CAPS	Fuji TRIAGE	FUJI TRIAGE CAPS	Fuji LINING LC	Fuji LINING LC Paste Pak
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ																
Реставрации по III классу					■	■	■	■	■	■						
Реставрации по V классу, поражения поверхности корня зуба, пришеечная эрозия	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■		
Реставрации молочных зубов по I/II классу	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Полупостоянные реставрации постоянных зубов по I/II классу	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Прокладка под амальгаму или композитные реставрации					■	■									■	■
База под амальгаму, композитные или керамические вкладки и накладки	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
Восстановление культи зуба	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Защита фиссур и поверхности корня зуба													■	■		
Промежуточное эндодонтическое запечатывание полостей и реставрация	■	■	■	■									■	■		
Стабилизация кариозных процессов													■	■		

	Fuji IX GP	Fuji IX GP CAPS	Fuji IX GP FAST	Fuji IX GP EXTRA	Fuji II LC Improved	Fuji II LC CAPS	Fuji VIII GP	Fuji VIII GP CAPS	Fuji II	Fuji II CAPS	Miracle Mix	Miracle Mix CAPS	Fuji TRIAGE	FUJI TRIAGE CAPS	Fuji LINING LC	Fuji LINING LC Paste Pak
РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕШИВАНИЮ																
Время замешивания, мин/сек	25″-30″	10″	10″	10″	20″-25″	10″	25″-30″	10″	30″	10″	35″	10″	20″-25″	10″	20″-25″	10″
Рабочее время, мин/сек	2′	2′	1′15″	1′15″	3′45″	3′15″	1′30″	1′30″	1′45″	2′	1′30″	1′	1′40″	1′40″	3′	2′15″
Время отверждения	2′20″	2′20″	2′	2′	20′*	20′*	2′10″	2′10″	5′30″	2′20″	5′	5′	2′30″	2′30″	30″	20″
Время начала окончательной обработки, мин/сек	6′	6′	3′	2′30″	20″*	20″*	6′	6′	15′	15′	5′30″	5′	6′**	6′**	30″*	20″*

* = фотополимеризация

Рабочее время замерялось при 23°C и относительной влажности 50%.

** = Время отверждения Розового оттенка уменьшается при фотополимеризации, окончательную обработку в этом случае можно начинать через 4′00′′

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕШИВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ

ФИКСИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ И БОНДИНГИ



	G-CEM Automix	G-CEM	Fuji I	Fuji I CAPS	Fuji PLUS	Fuji PLUS EWT	Fuji PLUS CAPS	Fuji CEM Automix	Fuji ORTHO	Fuji ORTHO LC	Fuji ORTHO LC CAPS	Fuji ORTHO BAND Paste Pak	Fuji BOND LC	G-Bond
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ														
Фиксация металлических и металлокерамических коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок	■	**	■	■	■	■	■	■						
Фиксация коронок, мостовидных протезов, вкладок и накладок из низко- и среднепрочной керамики (<600 МПа)	■	■												
Фиксация коронок и мостовидных протезов из высокопрочной керамики (>600 МПа)	■	■	■	■	■	■	■	■						
Фиксация непрямых композитных реставраций	■	■			■	■	■	■						
Фиксация металлических штифтов	■		■	■	■	■	■	■						
Фиксация стекловолоконных элементов	■	■			■		■	■						
Бондинг ортодонтических шин и/или брекетов									■	■	■	■		
Бондинг прямых композитных реставраций													■	■

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕШИВАНИЮ

Время замешивания, мин/сек	10″-15″	10″	20″	10″	20″	20″	10″	10″-15″	20″-25″	20″-25″	10″	15″-20″	10″	0″
Рабочее время, мин/сек	2′15	2′15″	2′	2′15″	2′30″	3′30″	2′	2′15″	3′	3′	3′	3′30″	4′	-
Время начала окончательной обработки, мин/сек	4′30″	4′	4′30″	4′30″	4′30″	5′45″	4′15″	4′30″	5′30″	10′ на поверхность*	10′ на поверхность*	6′30″	20″*	10″

2009-2010

* = фотополимеризация

** = мостовидные протезы на 2 абатментах

EXA'lence

Винил полиэфир силиконовый слепочный материал

ЭКЗА'ленс

Появление EXA'lence стало возможно благодаря тому, что компании GC удалось успешно совместить 2 популярные химические состава в одном инновационном слепочном материале. EXA'lence – это идеальное решение всех Ваших проблем при работе со слепками, он полностью устраняет дилеммы, с которыми Вы сталкиваетесь при выборе слепочного материала. Комбинация гидрофильности и высокой прочности на разрыв гарантирует, что отныне Вы сможете снимать великолепные слепки при любых условиях. При разработке линейки EXA'lence компания GC стремилась удовлетворить все требования стоматологов и зубных техников, и потому была создана полная система материалов разной вязкости и с различным временем отверждения. Теперь каждый профессионал в области стоматологии может добиться идеальных слепков при любых обстоятельствах.

Свойства & преимущества

- Воспользуйтесь комбинацией преимуществ полиэфира и ВПС
- Новый, гидрофильный химический состав обеспечивает смачиваемость материала перед отверждением и высокую точность воспроизведения деталей на слепке даже в условиях влажности
- Остаётся гидрофильным и после отверждения, повышая тем самым точность отливаемой модели
- Высокая прочность на разрыв сводит к минимуму риск повреждений слепка при его извлечении из полости рта и при извлечении готовой модели из слепка
- Длительное рабочее время и короткое время отверждения
- Приятный слабый мятный привкус
- Материалы разной вязкости легко отличаемы благодаря своим разным контрастным цветам



Упаковки

EXA'lence	
Отдельно	Быстрое или Обычное отверждение: 2 x 48 мл картриджа, Быстрое отверждение, 6 наконечников для смешивания: Extra Light Body, Light Body, Medium Body, Heavy Body, Heavy Body Rigid
EXA'lence Putty	
137810	Стандартная Упаковка 1-1: 500 г (278 мл) базы, 500 г (278 мл) катализатора & аксессуары
137866	Упаковка для клиники 5-5: 5 x 500 г (278 мл) базы, 5 x 500 г (278 мл) катализатора, аксессуары
EXA'lence 370	
Стандартный набор	Быстрое или Обычное отверждение: 370 мл картридж, 10 наконечников для смешивания & 1 блокирующее кольцо: Heavy Body или Монофаза
Отдельно	Быстрое или Обычное отверждение: 2 x 370 мл картриджа, Heavy Body или Монофаза
Упаковка для клиники	Быстрое или Обычное отверждение: 6 x 370 мл картриджей, Heavy Body или Монофаза
Аксессуары	
150004	50 x наконечники для смешивания (жёлтые) для картриджей объёмом 370 мл
150005	1 x блокирующее кольцо для картриджей объёмом 370 мл
138900	7 мл флакон универсального ВПС адгезива

СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

EXA'LENCE



ПОКАЗАНИЯ	ТЕХНИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЛЕПКА	ТИП СЛЕПОЧНОЙ ЛОЖКИ	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЯЗКОСТЬ					
			Putty	Heavy Body Rigid	Heavy Body	Medium Body	Light Body	Extra Light Body
Слепок для изготовления облицовки, вкладки, накладки, коронки или мостовидного протеза	Одно замешивание, один слепок	Стандартная или припасованная слепочная ложка				X		
	Двойное замешивание, один слепок	Стандартная или припасованная слепочная ложка			X	X	X	X
	Двойное замешивание, двойной слепок (базовый + корригирующий слепок)	Стандартная или припасованная слепочная ложка	X	X	X	X	X	X
	Техника снятия слепка с помощью ложки тройного действия	Слепочная ложка тройного действия		X	X		X	X
Слепок для изготовления частичного съёмного протеза	Одно замешивание, один слепок	Припасованная слепочная ложка				X		
Слепок для изготовления полного съёмного протеза	Одно замешивание, один слепок	Припасованная слепочная ложка				X	X	

Монофаза	
Корригирующий слой	
Базовый слой	

2009-2010

GC Examix NDS &
GC Exaflex Putty

ДЖИ СИ Экзамикс НДС & ДЖИ СИ Экзафлекс Патти

А-Силиконовые слепочные материалы нормального отверждения



Тиксотропные гидрофильные слепочные материалы, пригодные для любых методик снятия слепков. Высокая текучесть, расширенное рабочее время и быстрое отверждение в полости рта делают эти А-силиконовые материалы исключительно удобными в работе.

Свойства & преимущества

- Гидрофильные и тиксотропические свойства позволяют точно воспроизвести мельчайшие детали
- Высокая эластичность и прочность на разрыв облегчают извлечение слепка из полости рта
- Высокая пространственная устойчивость и равномерная текучесть облегчают процесс снятия слепка
- Поглощающая водород формула позволяет сразу же отливать гипсовую модель

Упаковки

GC Examix NDS	
137106	Жидкотекучая консистенция (медная), Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и 6 насадок для смешивания II, размер S (розовые)
137016	Нормальная консистенция (голубая), Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и 6 насадок для смешивания II, размер L (голубые)
137406	Монофаза (пурпурная), Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и 6 насадок для смешивания II, размер LL (пурпурные)
GC Exaflex Putty	
138801	Упаковка 1-1 (500 г светло-голубой основы и 500 г желтого катализатора)
138885	Упаковка 5-5 (5 x 500 г светло-голубой основы и 5 x 500 г желтого катализатора)

GC Exafast NDS &
GC Exafast Putty

ДЖИ СИ Экзафаст НДС & ДЖИ СИ Экзафаст Патти

А-Силиконовые слепочные материалы быстрого отверждения



Линейка А-силиконовых слепочных материалов, специально созданных для получения высокоточных слепков всего за 2 минуты.

Свойства & преимущества

- Минимальное время отверждения в полости рта
- Гидрофильные и тиксотропические свойства, высокая пространственная устойчивость и равномерная текучесть
- Высокая эластичность и прочность на разрыв облегчают извлечение слепка из полости рта
- Поглощающая водород формула позволяет сразу же отливать гипсовую модель

Упаковки

GC Exafast NDS	
137107	Жидкотекучая консистенция (медная), Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и 6 насадок для смешивания II, размер S (розовые)
137007	Нормальная консистенция (голубая), Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и 6 насадок для смешивания II, размер L (голубые)
137407	Монофаза (пурпурная), Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и 6 насадок для смешивания II, размер LL (пурпурные)
GC Exafast Putty	
137307	Упаковка 1-1 (500 г светло-голубой основы и 500 г желтого катализатора)
137305	Упаковка 5-5 (5 x 500 г светло-голубой основы и 5 x 500 г желтого катализатора)

GC Exajet

ДЖИ СИ Экзаджет

А-силиконовый слепочный материал в контейнерах из фольги



А-силиконовый слепочный материал, специально разработанный как часть единой системы, для применения в сочетании со слепочными ложками и силиконовыми слепочными материалами, производимыми компанией GC.

Свойства & преимущества

- Оптимальная вязкость обеспечивает аккуратное внесение материала в слепочную ложку
- Высокая эластичность облегчает извлечение слепка из полости рта и удаление гипсовой модели
- Версии материала с Нормальным и Сокращенным временем отверждения
- Непосредственная активация без нарушения целостности упаковки
- Картриджи совместимы со всеми современными устройствами для замешивания

Упаковки

GC Exajet Normal Set / Нормальное отверждение	
800085	Упаковка Интро, 300 мл основы, 62 мл катализатора, 1 картридж, 10 Наконечников для смешивания
800086	Упаковка Отдельно, 2 x 300 мл основы, 2 x 62 мл катализатора
800087	Упаковка для клиники, 6 x 300 мл основы, 6 x 62 мл катализатора
GC Exajet Fast Set / Ускоренное отверждение	
800082	Упаковка Интро, 300 мл основы, 62 мл катализатора, 1 картридж, 10 Наконечников для смешивания
800083	Упаковка Отдельно, 2 x 300 мл основы, 2 x 62 мл катализатора
800084	Упаковка для клиники, 6 x 300 мл основы, 6 x 62 мл катализатора
Аксессуары	
800088	1 картридж
800089	50 наконечников для смешивания

СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Металлические ложки с никелевым покрытием, из нержавеющей стали и из пластмассы

GC Dentulous Trays

ДЖИ СИ Слепочные ложки при частичной адентии



Стандартные слепочные ложки, разработанные для снятия слепков у пациентов с полным зубным рядом либо частичной адентией. Широкий ассортимент представлен слепочными ложками разного размера, формы и типа.

Свойства & преимущества

- Металлические ложки с никелевым покрытием
  - Жесткие, но в то же время достаточно пластичные, возможна индивидуальная припасовка
  - Выдерживают стерилизацию
  - Края ложек надежно оформлены сварным швом и выдерживают чрезмерное давление при снятии слепков
- Ложки из нержавеющей стали
  - Выдерживают стерилизацию
  - Края ложек надежно оформлены сварным швом и выдерживают чрезмерное давление при снятии слепков
- Пластмассовые ложки
  - Уникальный зигзагообразный выступ для устранения бугоркового контакта
  - Утолщенные края позволяют создать достаточное давление при снятии слепка
  - Одноразовые

Металлические ложки с никелевым покрытием

GC Edentulous Trays

ДЖИ СИ Слепочные ложки при полной адентии



Металлические ложки с никелевым покрытием, специально разработаны для снятия слепков у пациентов с полной адентией и соответствуют их анатомическим особенностям.

Свойства & преимущества

- Жесткость ложек позволяет добиться повышенной точности
- Пластичность дает возможность индивидуальной припасовки
- Перфорации и надежный сварной утолщенный шов (с наружной поверхности ложки) для оптимальной ретенции слепочной массы
- Специальная конфигурация позволяет равномерно распределять альгинатные массы по всему объёму ложки и обеспечивает достоверное воспроизведение рельефа твердых и мягких тканей
- Выдерживают стерилизацию

Примечание
Для ежедневной клинической работы выбирайте ДЖИ СИ Стандартные слепочные ложки.
Для соответствия индивидуальным анатомическим особенностям пациента: ДЖИ СИ STO-K ложки, выпускающиеся квадратной, конической и овальной формы.
Для изготовления иммедиат-протезов используйте GC ложки МакГоуэна.

Прикусные слепочные ложки тройного действия, пластмассовые ложки без окантовки и двойные арочные металлические ложки с никелевым покрытием

GC Closed-Bite Trays

ДЖИ СИ Прикусные слепочные ложки



В зависимости от поставленных Вами целей GC предлагает на выбор экономичные, одноразовые и прочные приспособления любого нужного вам размера.

Свойства & преимущества

- Ультра тонкие пластичные мембраны не оказывают дополнительного давления в ретромолярной области и не нарушают естественные соотношения при смыкании зубов
- Прочная цельнолитая ручка и корпус обеспечивают удобное введение и извлечение ложки из полости рта
- Выпускаются в версиях для слепков в передних и боковых отделах для получения полноценного слепка всей зубной дуги
- Позволяют сократить финансовые затраты

Примечание
ДЖИ СИ Прикусные пластмассовые слепочные ложки тройного действия: Предназначены для снятия рабочих слепков, слепков с антагонистов и регистрации прикусных соотношений в один этап.
ДЖИ СИ Пластмассовые ложки без окантовки: Возможны комбинации для 4 типов конфигураций зубных дуг.
ДЖИ СИ Двойные арочные металлические ложки с никелевым покрытием: Позволяют отлить сразу 2 раздельные конгруэнтные модели и установить их в окклюдатор.

GC Fit Checker II

ДЖИ СИ Фит Чекер II



Белый А-силиконовый материал для определения точек избыточного давления и качества припасовки коронок, мостовидных протезов, штифтов заводского производства, вкладок и съёмных протезов.

А-силиконовый материал для контроля качества припасовки

Свойства & преимущества

- Тиксотропическая консистенция позволяет контролировать нанесение
- Хорошая текучесть
- Минимальная толщина пленки
- Высокая прочность на разрыв
- Точное воспроизведение мельчайших деталей
- Оптимизированный цвет и прозрачность материала

Упаковки

GC Fit Checker II	
000441	Белый, Упаковка 1-1 (50 г базы, 65 г катализатора и аксессуары)

Применение

Комфортное рабочее время 2 мин.
Быстрое отверждение всего за 1 мин.

GC Fit Checker

ДЖИ СИ Фит Чекер



Легко текучий белый и черный материал из конденсированного силикона для определения точек избыточного давления съёмных протезов и проверки точности изготовления коронок, мостовидных протезов, вкладок и штифтов.

С-силиконовый материал для контроля качества припасовки

Свойства & преимущества

- Контрастный цвет материала
- Белый вариант для работы с коронками и протезами
- Черный вариант для работы с цельнокерамическими реставрациями
- Минимальная толщина пленки
- Высокая прочность на разрыв
- С-силикон; работа в латексных перчатках не влияет на сроки отверждения материала

Упаковки

GC Fit Checker	
003462	Белый 100 г, Упаковка 1-1 (80 г базы, 20 г катализатора и аксессуары)
003463	Чёрный 100 г, Упаковка 1-1 (80 г базы, 20 г катализатора и аксессуары)

Применение

Рабочее время: 1 мин.
Время отверждения в полости рта: 1 мин 30.

GC Exabite II NDS

ДЖИ СИ Экзабайт II НДС



А-силиконовый слепочный материал со свойствами, оптимальными для регистрации прикусных соотношений.

Материал для регистрации прикусных соотношений

Свойства & преимущества

- Замешивание и применение непосредственно из картриджа
- Тиксотропные свойства с идеальным балансом между стабильностью и текучестью
- Высокая пространственная устойчивость гарантирует правильную постановку моделей в артикулятор
- Легко режется и обрабатывается

Упаковки

GC Exabite II NDS	
890014	Упаковка из 2 картриджей, 48 мл каждый и 6 насадок для смешивания размера L
132488	Упаковка из 8 картриджей, 48 мл каждый и 24 насадок для смешивания размера L

Применение

«Мгновенное» отверждение: рабочее время – до 45 секунд, время отверждения в полости рта – 45 секунд.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛЕПКОВ И РЕГИСТРАЦИИ ПРИКУСНЫХ СООТНОШЕНИЙ

Альгинатный слепочный материал



Улучшенная формула, состоящая из ультрамелких альгинатных частиц и не содержащая соединений свинца и пыли.

Свойства & преимущества

- Очень высокое сродство к воде, материал замешивается проще и быстрее
- Гладкая поверхность обеспечивает непревзойденную точность слепков
- Идеальные тиксотропические свойства, материал становится текучим при легком давлени
- Быстрое отверждение дает достаточно рабочего времени, при этом сокращает время нахождения слепка в полости рта

GC Aroma Fine Dust Free III

ДЖИ СИ Арома Файн Даст Фри III

- Время отверждения
  Нормальное (розовый) 120 сек
  Ускоренное (зеленый) 90 сек

Упаковки

GC Aroma Fine Dust Free III	
002259	Набор материала с нормальным временем отверждения, 10 x 1 кг
002260	Набор материала с ускоренным временем отверждения, 10 x 1 кг

Очиститель для слепочных ложек



Чистящий порошок для удаления остатков альгинатных масс со слепочных ложек.

Свойства & преимущества

- Просто смешивается с водой
- Остатки альгинатных масс могут быть легко удалены под струей воды

GC Treclean

ДЖИ СИ Триклин

Упаковки

GC Treclean	
001144	1.2 кг порошка в банке

Термопластичные палочки для функциональных и перебазировочных слепков



Свойства & преимущества

- Легко разогреваются при 62°C
- Быстро затвердевают в холодной воде
- Широкий спектр показаний к применению

GC ISO Functional Sticks

ДЖИ СИ ИЗО Функциональные палочки

Упаковки

GC ISO Functional Sticks	
000043	Упаковка 120 г (15 палочек, 8 г каждая)

Применение

Слепок следует снимать тогда, когда материал становится пластичным и не рвется при растяжении.

Слепочная масса для регистрации прикуса



Свойства & преимущества

- Низкая температура размягчения – 53°C
- Нелипкая консистенция
- Пролонгированное рабочее время
- Проверка окклюзионного соотношения

GC Bite Compound

ДЖИ СИ Байт Кампаунд

Упаковки

GC Bite Compound	
001407	Упаковка 120 г (15 палочек, 8 г каждая)

GC Unifast III

ДЖИ СИ Унифаст III

Самоотверждающийся материал на основе метилметакрилата для изготовления временных конструкций



Unifast III представляет технологию SURF, новую, революционную технологию обработки полимера. Рабочие качества, физические свойства и эстетика материала достигли уровня, ранее недоступного полимерам в форме порошок-жидкость. Идеально сбалансированный состав гарантирует получение равномерно окрашенной смеси без пузырьков. Unifast III – лучший выбор при подборе материала для изготовления долгосрочных временных ортопедических конструкций.

Свойства & преимущества

- Изготовление как одноцветных временных конструкций, так и сложных эстетичных долгосрочных конструкций с послойным нанесением нескольких оттенков
- Отличные рабочие качества и при традиционной технике замешивания, и при нанесении кистью
- Оптимальные тиксотропические свойства и контролируемая текучесть
- Широкий спектр оттенков – дентинные, эмалевые и резцовые
- Светопроницаемость, близкая к светопроницаемости естественных зубов
- Эстетичная гладкая поверхность легко получается путём нанесения G-Coat PLUS

Показания к применению

- Временные коронки
- Временные мостовидные протезы
- Временные вкладки
- Воспроизведение тканей десны
- Мостовидные протезы небольшой протяженности
- Закрытие отверстий в коронке над имплантатом
- Ремонт (съемных) протезов
- Изготовление протезов с аттачментами

Упаковки

GC Unifast III	
003464	Упаковка Интро 2-1, A2-A3 (35 г порошка A2-A3, 42 мл жидкости & аксессуары)
Отдельно	Порошок 35 г: A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Резцовый, Прозрачный, No.3 (Розовый), No.8 (Розовый Живой)
Отдельно	Порошок 100 г: A1, A2, A3, A3.5, B2, E3, Резцовый, Прозрачный, No.3 (Розовый), No.8 (Розовый Живой)
Отдельно	Порошок 300 г: A2, A3, Резцовый, No.8 (Розовый Живой)
003489	Жидкость 40 г (42 мл)
003490	Жидкость 100 г (104 мл)
003491	Жидкость 250 г (260 мл)
002654	Пластиковый контейнер
002687	Кисть No. 10
002688	Одноразовые блоки для замешивания (50) No. 2



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ КОРОНОК И МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

Самоотверждающийся материал на основе метилметакрилата для изготовления временных ортопедических конструкций

GC Unifast TRAD

ДЖИ СИ Унифаст ТРЭД



Универсальный полимер для изготовления временных вкладок и накладок, коронок и мостовидных протезов, а также ремонта (съёмных) протезов.

Свойства & преимущества

- Может применяться для техники прессования и нанесения кистью
- Быстро затвердевает
- Высокая пространственная стабильность
- Пригоден для изготовления долгосрочных временных ортопедических конструкций

Упаковки

GC Unifast TRAD P/L Порошок/Жидкость	
339104	Слоновая кость, 100 г порошка
339103	Розовый X, 100 г порошка
339105	Розовый живой, N° 8, 100 г порошка
339114	Слоновая кость, 250 г порошка
339113	Розовый X, 250 г порошка
339115	Розовый живой, N° 8, 250 г порошка
339124	Слоновая кость, 1 кг порошка
339123	Розовый X, 1 кг порошка
339125	Розовый живой, N° 8, 1 кг порошка
339291	104 мл жидкости
339292	260 мл жидкости

Светоотверждаемый материал на основе метилметакрилата для изготовления временных ортопедических конструкций

GC Unifast LC

ДЖИ СИ Унифаст Л Си



Светоотверждаемый полимер для изготовления временных вкладок, накладок, виниров, коронок и мостовидных протезов небольшой протяженности.

Свойства & преимущества

- Просто наносится
- Подходит для изготовления сложных конструкций
- При начальном самоотверждении приобретает резиноподобную консистенцию, что обеспечивает легкое извлечение из полости рта
- Окончательная полимеризация при засвечивании с контролируемым временем отверждения
- Исключительная прочность и высокая пространственная стабильность

Упаковки

GC Unifast LC P/L / Порошок/Жидкость	
338006	Упаковка Интро 6-2 (6 x 30 г порошка; 2 x 14.7 мл жидкости)
000363	A2, 50 г порошка
000364	A3, 50 г порошка
000365	B2, 50 г порошка
000366	B3, 50 г порошка
000367	C2, 50 г порошка
000362	Прозрачный, 50 г порошка
000368	2 x 14.7 мл жидкости

Однокомпонентный светоотверждаемый композит для изготовления временных реставраций

GC Revotek LC

ДЖИ СИ Ревотек Л Си



Однокомпонентный светоотверждаемый композит для изготовления временных конструкций, представленный в форме пластичного пастообразного цилиндра.

Свойства & преимущества

- Не нужно предварительно замешивать или делать слепки
- Среднее количество реставраций – 60 вкладок / накладок или 30 коронок
- Светоотверждаемый композитный материал, отсутствуют тепловыделение при отверждении материала, неприятный резкий запах, характерный для метакрилатов, и химическое раздражение
- Прочный и надежный, с высокой износоустойчивостью
- Низкий коэффициент усадки обеспечивает точную припасовку

Упаковки

GC Revotek LC	
001842	Упаковка Интро, оттенок B2 (1 цилиндр пластичной консистенции, 1 светонепроницаемый пластмассовый контейнер для хранения материала, 1 ДЖИ СИ Шпатель N° 2)

Применение

Отрежьте необходимое количество пасты. Придайте нужную анатомическую форму. Полимеризуйте в полости рта в течение 10 секунд, затем извлеките и полимеризуйте каждую поверхность по 20 секунд.

GC Freegenol

ДЖИ СИ Фригенол



Безэвгенольный цемент для временной фиксации временных коронок, мостов и ортопедических конструкций.

Материал для временного цементирования

Свойства & преимущества

- Не содержит эвгенола и компонентов, ингибирующих полимеризацию композитов
- Короткое время отверждения
- Консистенцию материала можно регулировать
- Легко удаляется с поверхностей коронок и протезов
- Специальный очиститель прилагается

Упаковки

GC Freegenol	
003440	Упаковка 1-1 (55 г базы, 20 г катализатора, 2.5 мл очистителя & аксессуары)

Применение

Время отверждения можно регулировать: больше базы – короче время отверждения; меньше базы – дольше время отверждения.

GC Caviton

ДЖИ СИ Кавитон



Материал на основе окиси цинка для временного пломбирования стандартных полостей и после эндодонтического лечения.

Материал для временного пломбирования

Свойства & преимущества

- Отверждение инициируется водой и слюной
- Отлично адаптируется к стенкам полости
- Легко удаляется

Упаковки

GC Caviton	
000286	Белый, 30 г контейнер

GC Pliers

ДЖИ СИ Плайерс



Щипцы для извлечения временных коронок, мостовидных протезов, а также постоянных ортопедических конструкций на этапе припасовки.

Щипцы для извлечения ортопедических конструкций

Свойства & преимущества

- Эргономичный оптимальный дизайн дает лучший контроль над усилием
- Надежный захват
- Небольшие сменные резиновые накладки защищают конструкцию (постоянную или временную) от повреждения
- Специальный адгезивный порошок гарантирует надежный захват конструкции даже в условиях повышенной влажности

Упаковки

GC Pliers	
800111	ДЖИ СИ Щипцы с набором аксессуаров (50 резиновых накладок, 4 г адгезивного порошка)
000237	Набор Аксессуаров (50 резиновых накладок, 4 г адгезивного порошка)

Мягкий акриловый материал для кондиционирования тканей и перебазировки

GC Tissue Conditioner

ДЖИ СИ Кондиционер для Тканей



Tissue Conditioner – это эксклюзивный акриловый материал нового поколения, запатентованный компанией GC и предназначенный для мягкой перебазировки. Tissue Conditioner отлично подходит для тех случаев, когда Вам нужен материал, долгое время остающийся мягким и чистым. Используйте Tissue Conditioner для кондиционирования тканей, мягкой перебазировки и изготовления функциональных слепков.

Свойства & преимущества

- Улучшенный состав и оптимальная текучесть позволяют наносить материал легко, удобно и быстро
- Время отверждения в полости рта всего 5 минут
- Уникальная запатентованная формула материала и специальное защитное покрытие защищают поверхность от разрушения и препятствуют появлению неприятного запаха
- Идеально гладкая поверхность способствует процессам заживления и повышает гигиеничность конструкции
- Долго сохраняет мягкость, способен адаптировать свою форму в соответствии с изменением формы подлежащих тканей
- Можно легко добавлять новые слои материала
- Для каждого клинического случая можно сделать выбор из имеющихся двух оттенков

Показания

- Кондиционирование тканей
- Мягкая перебазировка
- Изготовление функциональных слепков
- Изготовление иммедиат-протезов
- При нагрузке имплантатов сразу после их установки

Упаковки

GC Tissue Conditioner	
003455	Упаковка Интро 1-1, Живой розовый
003456	Упаковка Интро 1-1, Белый
003457	Живой розовый, 90 г порошка
003458	Белый, 90 г порошка
003459	Отдельно, Жидкость 101 мл
003460	Защитное покрытие, 15 мл

Применение

Перебазировка на короткий срок:
Не требуется использования защитного покрытия в качестве адгезива.
Tissue Conditioner можно легко удалить, потянув его рукой.

Перебазировка на длительный период:
Перед нанесением Tissue Conditioner на поверхность конструкции в качестве адгезива наносится защитное покрытие.
Чтобы удалить материал, используйте твердосплавный бор или силиконовую головку.
В обоих случаях защитное покрытие наносится на поверхность законченной конструкции для сохранения мягкости материала.



GC Reline Soft

ДЖИ СИ Релайн Софт

Силиконовый материал для мягкой перебазировки

А-силиконовый материал для мягкой долгосрочной перебазировки частичных и полных съёмных протезов, особенно при недостаточном объёме тканей воспринимающего ложа.

Свойства & преимущества

- Наносится на внутреннюю поверхность протеза непосредственно из картриджа, обеспечивая прямую и простую перебазировку
- Сохраняет эластичность, не твердея с течением времени, и прекрасно смягчает жевательную нагрузку
- Силикон не оказывает термического раздражения при отверждении, без запаха
- Хорошая текучесть под давлением



Упаковки

GC Reline Soft	
000598	Упаковка Интро, 62 г (48 мл) картридж, 6 Насадок для смешивания II размер L (голубые), Праймер R 12 г (13 мл), Силиконовый полир, Полировочный диск, Модификаторы A&B 10 г (9 мл) каждого и аксессуары
000599	Картридж 62 г (48 мл)
000602	Праймер R, 12 г (13 мл) жидкости
000603	Модификатор, Упаковка 1-1, A&B по 10 г (9 мл) каждого, блок для замешивания и губка
001525	Полировочный диск
001526	Силиконовый полир

Примечание

Пользуется большой популярностью у имплантологов.

GC Reline Extra Soft

ДЖИ СИ Релайн Экстра Софт

Экстра мягкий силиконовый подкладочный материал для съемных протезов в картриджах

А-силиконовый материал для исключительно мягкой перебазировки частичных и полных съёмных протезов, для устранения точек избыточного давления и купирования явлений воспаления в подлежащих мягких тканях, а также решения проблем, связанных с усилением резорбции костной ткани.

Свойства & преимущества

- Длительно сохраняет эластичность, пространственную стабильность
- Хорошая текучесть под давлением
- Наносится на внутреннюю поверхность протеза непосредственно из картриджа, обеспечивая прямую и простую перебазировку
- Не оказывает термического раздражения при отверждении, без запаха



Упаковки

GC Reline Extra Soft	
000600	Упаковка Интро, 56 г (48 мл) картридж, 6 Насадок для смешивания II размер L (голубые), Праймер R 12 г (13 мл), Силиконовый полир, Полировочный диск, Модификаторы A&B 10 г (9 мл) каждого, аксессуары
000601	Картридж 56 г (48 мл)
000602	Праймер R, 12 г (13 мл) жидкости
000603	Модификатор, Упаковка 1-1, A+B по 10 г (9 мл) каждого, блок для замешивания и губка
001525	Полировочный диск
001526	Силиконовый полир

Примечание

При использовании непрямой техники перебазировки окончательное отверждение материала может проводиться под давлением в горячей воде.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕРЕБАЗИРОВКИ

Материал для жесткой перебазировки съёмных протезов в клинических условиях

GC Reline

ДЖИ СИ Релайн

Материал для долговременной прямой жесткой перебазировки полных и частичных съёмных протезов, не содержащий метилметакрилата.

Свойства & преимущества

- Работа в присутствии пациента, прямая и простая перебазировка
- Не содержит метилметакрилата, не вызывает раздражения слизистых полости рта
- Минимальное тепловыделение при отверждении, приятный запах и вкус
- Окончательная обработка всего через 5 мин 30 сек от начала замешивания



Упаковки

GC Reline	
346000	Упаковка Интро, стандартная упаковка порошок/жидкость (80 г порошка, 50 мл жидкости, 15 мл адгезива и аксессуары)
346002	80 г порошка
346191	50 мл жидкости
346099	Адгезив, 15 мл

Примечание

При наличии поднутрений извлечь протез на резиноподобной стадии, обрезать излишки и снова ввести в полость рта до полного отверждения материала.

Материал для пародонтальных повязок

GC Coe-Pak (Automix)

ДЖИ СИ Кое-Пак (Аутомикс)

Двухкомпонентный материал для закрытия раневых поверхностей и изоляции линии швов в полости рта после хирургических вмешательств и удаления зубов, а также для фиксации подвижных зубов.

Свойства & преимущества

- Выпускается в картриджах, либо в тубах для замешивания вручную
- Легко моделируется
- Эластичная консистенция
- Биосовместимость
- Содействует процессу заживления тканей
- Не содержит эвгенола, поэтому совместим с полимерами
- Не прилипает к перчаткам

Упаковки

GC Coe-Pak Automix NDS	
135003	2 картриджа, 50 мл каждый и 12 насадок для смешивания
GC Coe-Pak	
135801	Нормальный (90 г Базы и 90 г катализатора)
135301	Твердый + Ускоренное время отверждения (90 г Базы и 90 г катализатора)





Применение

Нормальный: готов к применению через 3 минуты после замешивания, время полного отверждения – 30 минут.
Твердый + Ускоренное время отверждения: готов к применению через 1 минуту после замешивания, время полного отверждения – 10 минут.
Automix: готов к применению через 30 секунд после замешивания, время полного отверждения – 10 минут.



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА ДЛЯ ТЕХНИКА

2009-2010

Керамика	Initial Ceramic System	48-49
	Initial IQ Press Concept	50
	Initial IQ Layering Concept	50
	Initial IQ Lustre Pastes	51
	Initial MC – Initial Ti – Initial LF	52
	Initial PC – Initial LF	55
	Initial Zr-FS – Initial AL	54
	Initial Ti Bonder	53
	Initial INmetalbond	53
	Initial Connector Paste	53
Композиты	Gradia	56
	Gradia gum shades	57
Установки для световой полимеризации	Steplight SL-I	57
	Labolight LV-III	57
Бондинговые системы	Ремонт с помощью праймеров	58
	Metal Primer II	59
	Composite Primer	59
	Ceramic Primer	59
Защитные покрытия	Optiglaze	60
Пластмассы	Pattern Resin LS	61
	Ostron	61
Гипсы	Fujirock EP	62
	Fujirock OptiXscan	63
	Fujirock OptiFlow	63
Паковочные массы	System Platinum / Premium	64
	Fujivest Platinum	65
	Fujivest Premium	65
	Fujivest Super	66
	Fujivest II	66
	Stellavest	67
	MultiPressVest	67
	Vest-G	68
	New Casting LINER	68
	Cosmotech VEST	69
	G-Cera Orbit VEST	69
	Soldervest QUICK	69

GC Initial Ceramic System

Система Керамики ДЖИ СИ Инициал

Полная керамическая система для любых современных показаний



Initial – это завершенная и самодостаточная система, которая оптимально и надежно удовлетворяет всем современным требованиям. Вне зависимости от предпочитаемых Вами технологий: нанесение керамической массы на металлический или титановый каркас, работа с низкотемпературным материалом, применение цельнокерамических, циркониевых и алюминиевых каркасов или прессуемой керамики – Initial станет правильным выбором.

Новейшие технологии и безупречное совершенство

- Один производитель, одна система
- Точное соответствие коэффициента термического расширения по отношению к сплавам для каркасов
- Компоненты для любых керамических конструкций
- Все компоненты тщательно систематизированы

Одна общая концепция, одна система оттенков, одна технология нанесения

- Идентичная и модулируемая керамика с тщательно продуманной и достаточно простой для понимания системой
- Четкие и понятные этапы работы
- Логическая взаимосвязь, система проста и доступна даже для начинающих
- Стабильность материалов, исключительная устойчивость к режиму обжига
- Оптимизация процесса, система очень выгодна с экономической точки зрения
- Единая система оттенков для всех компонентов системы
- Естественная опалесценция, флюоресценция и светопроницаемость

Современное решение для любых показаний

- Металлокерамика, керамика для нанесения на каркасы из титана, оксида алюминия и циркония
- Низкотемпературная керамика, прессуемая керамика по технологии обжига
- Прессуемая и низкотемпературная керамика в комбинации как полная керамическая система
- Удовлетворение любых эстетических требований: стандартных, современных и высокотехнологичных



СИСТЕМА КЕРАМИКИ INITIAL

Полная керамическая система для любых современных показаний

GC Initial Ceramic System

Система Керамики ДЖИ СИ Инициал



"Не существует белой эстетики без красной эстетики". Дополнительные наборы Оттенков Десны Initial MC и Initial Zr, соответствующих всем требованиям к материалам для изготовления совершенных имитаций тканей десны, позволяют сделать реставрации, выполненные с помощью системы Initial, ещё более эстетичными и естественными. Чтобы расширить уникальную гармоничную систему оттенков Initial и в целях соответствия тенденции использования очень светлых оттенков зубов, были созданы Отбеленные оттенки Initial, уникальный набор оттенков, который позволяет добиться соответствия даже самым светлым оттенкам зубов при использовании любой керамической реставрационной системы.

GC Initial Gum Shades
ДЖИ СИ Инициал Оттенки Десны

- Пять оттенков, соответствующих натуральным цветам тканей десны: светлый базовый, тёмный базовый, насыщенный фиолетовый, насыщенный кремовый и насыщенный красный.
- Специально разработаны для работы с супраструктурами конструкций на имплантатах, для изготовления коронок и мостовидных протезов.
- Для керамических имитаций мягких тканей, которые требуют индивидуализации для создания естественного перехода от края реставрации к подлежащим тканям десны.
- Отдельные этапы легко разделяются этапами обжига – в зависимости от показаний и индивидуальных методов работы.
- Соответствуют проверенной концепции системы Initial: "Единая система оттенков – единая технология моделирования"

Увеличение количества ортопедических конструкций с опорой на имплантаты является основной причиной того, почему Оттенки Десны Initial должны стать неотъемлемой частью Вашей керамической системы.

GC Initial Bleach Shades
ДЖИ СИ Инициал Отбеленные Оттенки

- Дополняют эстетически разнообразный спектр пяти керамических систем Initial
- Великолепная эстетика благодаря естественной динамике света
- Специальные оттенки сверх стандартной цветовой палитры – и для любых показаний
- При работе можно совмещать различные компоненты, тем самым ещё больше повышая эстетичность реставрации
- Соответствуют проверенной концепции системы Initial: "Единая система оттенков – единая технология моделирования"

Естественная эмаль по-разному реагирует на процедуры отбеливания, поэтому окончательную оценку светопроницаемости следует производить через шесть недель после последнего сеанса отбеливания.



GC Initial IQ
One Body - Press Concept

Система для облицовки каркасов из металла или оксида циркония методом прессования

ДЖИ СИ Инициал Ай Кью, Концепция One Body - Press

Initial IQ – это новые системы материалов для облицовки каркасов из металла или оксида циркония методом прессования, основанные на керамике из полевого шпата, которые демонстрируют непревзойденную эстетику, близкую к естественной. Абсолютно новая технология, включающая в себя осветленные заготовки для облицовки методом прессования и Initial IQ Lustre Pastes (Пасты для Глянца), создает уникальную внутреннюю светодинамику, которая позволяет воссоздать естественность блеска живого зуба. Эта абсолютно новая система, компактная и легкая в работе, подходит для работы всем зубным техникам.

Свойства & преимущества

- Система Press-over-Metal совместима со стандартными сплавами для керамики (КТР от 13.8 до 14.9).
- Press-over-Zircon совместим с любыми технологиями изготовления каркасов, например, инфильтрационной техникой изготовления каркаса или технологией CAD/CAM.
- Позволяют изготовлять облицовки каркасов для фронтальной и жевательной группы зубов без применения техники послойного нанесения
- Эстетика обеспечивается техникой «раскрашивания по номерам» с помощью Lustre Pastes
- Быстрое воспроизведение стандартных оттенков по шкале Vita
- Использование стандартных опаков системы Initial MC
- Всего 7 дентиновых и 3 отбеленных материала для облицовки методом прессования, перекрывающие все 16 оттенков по шкале оттенков Vitapan Classic
- 1 Нейтральная, 4 Дентиновых (Body) и 7 Эмалевых Паст для удовлетворения любых индивидуальных требований



Упаковки

Система GC Initial IQ, Концепция One Body - Press	
877074	**Набор GC Initial IQ, One Body, Press-over-Metal** Содержание: Флуоресцентные кристаллы, 10 x окрашенных заготовок для облицовки методом прессования и 10 x Порошков для коррекции (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Отбеленных), Моделировочная жидкость, Муфельные кольца для паковки Medium, 10 x Поршней для прессования 2 г таблеток
877075	**Набор GC Initial IQ, One Body, Press-over-Zircon** Содержание: 4 x Модификатор каркаса (PFM) (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x окрашенных заготовок для облицовки методом прессования и 10 x Порошков для коррекции (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x Отбеленных), Моделировочная жидкость, Муфельные кольца для паковки Medium, 10 x Поршней для прессования 2 г таблеток

GC Initial IQ
One Body - Layering Concept

Концепция One Body, моделирование одним порошком

ДЖИ СИ Инициал Ай Кью, Концепция One Body - Layering

Компания GC давно искала возможность предоставить зубным техникам средство для постоянного достижения высококачественного и эстетичного результата. Разработав концепцию Initial IQ- One Body- Layering, компания GC теперь может предложить компактный набор керамики для быстрого и простого воспроизведения стандартных оттенков по шкале Vita. Эта новая система позволяет раз за разом получать одинаково высокие по эстетике результаты с помощью меньшего количества материалов.

Свойства & преимущества

- Моделирование коронки с использованием всего одного порошка позволяет уделить максимум внимания оконтуриванию реставрации и её функциональности
- Быстрое воспроизведение стандартного оттенка по шкале Vita®, затем «раскрашивание по номерам» с помощью Lustre Pastes
- Полная совместимость с имеющейся линейкой материалов MC Initial и со многими сплавами
- Не требует дополнительных вложений
- Может использоваться как стартовый ознакомительный модуль для линии керамики Initial



СИСТЕМА INITIAL IQ

Трёхмерные керамические красители

GC Initial IQ - Lustre Pastes

ДЖИ СИ Инициал Ай Кью – Пасты для Глянца

Initial IQ Lustre Pastes – это трёхмерные керамические красители, разработанные для создания глубины цвета и естественной светопроницаемости реставраций, изготовленных из материалов систем Initial IQ Press и Layering. Теперь Вы можете действительно добиться естественности коронок и мостовидных протезов из материалов Initial IQ, используя один из двух Наборов Lustre Paste, которые подходят для работы с керамикой как с «высоким», так и с «низким» КТР. Lustre Pastes выпускаются в шприцах готовыми к применению; их основу составляют мельчайшие частицы керамики, и их можно наносить более толстым слоем, что обеспечит изготовленным Вами реставрациям непревзойдённую естественность и натуральный блеск.



Свойства & преимущества

- Специальные отдельные наборы для керамики с «низким» и с «высоким» КТР
- Initial IQ/POM Lustre Pastes
  - Предназначены для работы с системой Initial IQ Press-over-Metal, а также совместимы с системами керамики для виниров Initial MC, LF и PC.
- Initial IQ/POZr Lustre Pastes
  - Предназначены для работы с системой Initial IQ Press-over-Zircon, а также совместимы с системами керамики для виниров Initial Zr-FS, Ti и AL.
- Основа состоит из мельчайших частиц керамики, что позволяет наносить красители более толстым слоем по сравнению с традиционными красителями
- Уникальный пастообразный материал с улучшенными тиксотропическими свойствами, наносится просто и быстро
- Выпускаются в шприцах готовыми к применению (1 x Нейтральный (Neutral) Оттенок, 4 x Дентинных (Body) Оттенка, 7 x Оттенков Эмалевых Эффектов)

Упаковки

GC Initial IQ - Lustre Pastes	
877073	**Набор Lustre Pastes для системы GC Initial IQ-POM** Содержание: 1 x Нейтральный, 4 x Дентинных (Body) оттенка, 7 x Оттенков эмалевых эффектов, Разбавитель, палитра для смешивания, 2 кисти, иллюстрированная инструкция & DVD
877076	**Набор Lustre Pastes для системы GC Initial IQ-POZr** Содержание: 1 x Нейтральный, 4 x Дентинных (Body) оттенка, 7 x Оттенков эмалевых эффектов, Разбавитель, палитра для смешивания, 2 кисти, иллюстрированная инструкция & DVD




Применение

Помимо применения с системами Initial IQ, красители Lustre Pastes являются современной альтернативой традиционному окрашиванию и глазурованию, а также могут использоваться для коррекции цвета и поверхностных дефектов при работе с любыми коронками и мостовидными протезами, изготовленными из керамики линейки Initial.

GC Initial MC
GC Initial Ti
GC Initial LF

ДЖИ СИ Инициал М Си
ДЖИ СИ Инициал Титан
ДЖИ СИ Инициал ЛФ

Основная система металлокерамики

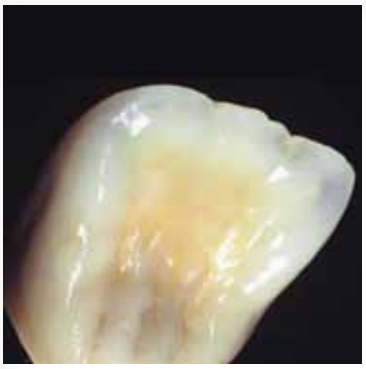

Система керамики Initial открывает новые перспективы для металлокерамики. Используете ли Вы Initial MC – высокотемпературную металлокерамику при стандартных температурах обжига, Initial LF – низкотемпературную металлокерамику или Initial Ti –керамику для работы с каркасами из титана – Вы всегда получите отличные результаты! Преимущества Системы Initial состоят в удобстве принципов построения работы, систематизации и последовательности применения компонентов, использовании современных новейших технологий. Все это позволяет системе удовлетворить любые эстетические требования и быть выгодной в экономическом отношении.

Свойства & преимущества

- Точное соответствие коэффициента термического расширения по отношению к сплавам для каркасов и прекрасная полируемость
- Идеально адаптирована ко всем традиционным сплавам
- Initial MC обжигается при температурах ниже 900°C, а Initial LF – ниже 770°C
- Системы MC, LF и Ti предлагают оптимальные решения для всех показаний к применению металлокерамики
- Эффектные дополнительные компоненты для любых технологий нанесения и подкрашивания
- Идеальная компоновка элементов, включая Отбеленные оттенки и Оттенки Десны
- Логическая взаимосвязь всех компонентов системы и цветового соответствия
- Система проста в работе и позволяет быстро освоиться
- Нетрудоемкая, высоко эстетичная и выгодная в экономическом отношении

Упаковки

GC Initial MC	
877001	Basic Set (Основной Набор) с пастообразными опаками
877045	Basic Set (Основной Набор) с порошковыми опаками
877002	Basic Plus Set (Дополнения к Основному Набору) с пастообразными опаками
877046	Basic Plus Set (Дополнения к Основному Набору) с порошковыми опаками
877003	Advanced Set (Расширенный Набор) с пастообразными опаками
877062	Standard Set (Стандартный Набор) с пастообразными опаками
877047	Standard Set (Стандартный Набор) с порошковыми опаками
877004	Paste Opaque (Набор Пастообразных Опаков)
877065	Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)
877071	Gum Shades Set (Набор Оттенков Десны) с пастообразными опаками
877070	Gum Shades Set (Набор Оттенков Десны) с порошковыми опаками
GC Initial LF	
877005	Basic Set (Основной Набор)
877006	Basic Set (Основной Набор)
877007	Advanced Set (Расширенный Набор)
877066	Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)
GC Initial Ti	
877013	Basic Set (Основной Набор)
877014	Basic Plus Set (Дополнения к Основному Набору)
877015	Advanced Set (Расширенный Набор)
877069	Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)
GC Initial Stain Set	
877016	Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC (Наборы красителей INvivo/INsitu для систем MC, LF, PC)
877017	Stain Set INvivo/INsitu AL, Zr, Ti (Наборы красителей INvivo/Insitu для систем AL, Zr, Ti)



Примечание

Состав наборов и перечень отдельных компонентов подробно описаны в буклетах и списках продукции на нашем веб-сайте: www.initial.gceurope.com

КЕРАМИКА

GC Initial Ti Bonder

ДЖИ СИ Инициал Титан Бондер

Бондер для соединения керамики с поверхностью титанового каркаса



Ti Bonder обеспечивает надежное сцепление между структурами титанового каркаса и керамикой Initial Ti.

Свойства & преимущества

- Быстро и легко наносится, простые этапы работы
- Легко замешивается (порошок и жидкость)
- Подходит для любых титановых каркасов независимо от того, изготовлены ли они из чистого титана или титанового сплава, отлиты или отфрезерованы
- Идеальное взаимодействие между Initial Ti Bonder и керамикой Initial Ti

Упаковки

GC Initial Ti Bonder	
874027	Набор Интро (4 г порошка, 25 мл жидкости)
874025	4 г порошка
874026	25 мл жидкости

GC Initial INmetalbond

ДЖИ СИ Инициал ИНметалбонд

Буфер между металлокерамикой Initial и стоматологическими сплавами



Этот бондер применяется как промежуточный слой между поверхностями сплава и керамики. Он блокирует высвобождающиеся оксиды металлов и устраняет различия в коэффициентах расширения.

Свойства & преимущества

- Легко наносится
- Паста сразу готова к нанесению
- Нейтрализует различия коэффициентов расширения металлокерамики Initial и стоматологических сплавов
- Обеспечивает надежную химическую связь с различными типами сплавов
- Расширяет возможности работы при широком диапазоне различий КТР

Упаковки

GC Initial INmetalbond	
877050	8 г пасты (2 x 4 г пасты)

GC Initial Connector Paste

ДЖИ СИ Инициал Коннектор Пэйст

Мелкозернистая керамическая паста для запечатывания поверхности из огнеупорного материала для техники послойного нанесения керамики



Initial MC/LF Connector Paste применяется в качестве промежуточного слоя между поверхностью штампика из огнеупорного материала GC, чтобы обеспечить идеальное прилегание и оптимальные результаты обжига керамики.

Свойства & преимущества

- Готовая к применению паста
- Красный цвет для оптимального нанесения на поверхность огнеупорной модели перед обжигом
- Идеальное соответствие с керамикой Initial MC и Initial LF

Упаковки

GC Initial MC/LF Connector Paste	
877030	6 г пасты

GC Initial Zr-FS
GC Initial AL

ДЖИ СИ Инициал Цирконий-ФС
ДЖИ СИ Инициал Алюминий

Система безметалловой керамики для широкого спектра показаний



Система керамики Initial открывает новые горизонты и безграничные перспективы применения керамики. Работаете ли Вы с классической системой на основе оксида алюминия или используете новейшие циркониевые материалы, Система Initial всегда предложит Вам оптимальные, надежные и выгодные в экономическом отношении решения. Система Initial устанавливает новые стандарты для керамики нового тысячелетия!

Свойства & преимущества

- Все компоненты имеют точно сопоставленные коэффициенты термического расширения
- Высокая смачиваемость структур каркаса обеспечивает надежное сцепление
- Оптимизированные показатели усадки, высокая стабильность при обжиге
- Эффектные компоненты для любых технологий нанесения и подкрашивания
- Высоко флуоресцентные первичные дентины для создания естественных и дополнительных цветовых эффектов
- Выгодная в экономическом отношении
- Логическая взаимосвязь всех компонентов системы и цветового соответствия
- Система проста в работе и позволяет быстро освоиться
- Нетрудоемкая и высоко эстетичная

Упаковки

GC Initial AL	
877008	Basic Set (Основной Набор)
877009	Advanced Set (Расширенный Набор)
877067	Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)
Gc Initial Zr-FS	
877010	Basic Set (Основной Набор)
877011	Advanced Set (Расширенный Набор)
877068	Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)
877072	Gum Shades Set (Набор Оттенков Десны) с пастообразными опаками
GC Initial Stain Set	
877017	Stain Set INvivo/INsitu AL, Zr, Ti (Наборы красителей INvivo/Insitu для систем AL, Zr, Ti



Примечание
Состав наборов и перечень отдельных компонентов подробно описаны в буклетах и списках продукции на нашем веб-сайте: www.initial.gceurope.com

КЕРАМИКА

Система прессуемой керамики для широкого спектра показаний

GC Initial PC
GC Initial LF

ДЖИ СИ Инициал Пресс Керамика
ДЖИ СИ Инициал ЛФ

Даже при использовании техники прессования Система керамики Initial объединяет воедино высочайшую эстетику и экономическую целесообразность. Точно подобранные компоненты для широкого спектра показаний позволяют работать эффективно и быстро. Initial LF – Низкотемпературная металлокерамика – это не отдельный продукт, а часть системы и может применяться для окончательного моделирования поверхностей или в сочетании с Initial PC – Прессуемой керамикой. Система Initial – самодостаточная, завершенная, высоко эстетичная, простая в работе, выгодная в экономическом отношении и надежная система.



Свойства & преимущества

- Все компоненты имеют точно сопоставленные коэффициенты термического расширения
- Высокая смачиваемость структур каркаса обеспечивает надежное сцепление
- Оптимизированные показатели усадки, высокая стабильность при обжиге
- Initial PC и Initial LF – это полноценные завершенные керамические системы
- Эффектные компоненты для любых технологий нанесения и подкрашивания
- Логическая взаимосвязь всех компонентов системы и цветового соответствия
- Четкая и идентичная методология работы с отдельными компонентами системы
- Система проста в работе и позволяет быстро освоиться
- Выгодная в экономическом отношении

Упаковки

GC Initial PC	
877018	Starter Package (Стартовый Набор)
GC Initial LF	
877005	Basic Set (Основной Набор)
877006	Basic Plus Set (Дополнения к Основному Набору)
877007	Advanced Set (Расширенный Набор)
877066	Bleach Set (Набор Отбеленных Оттенков)
GC Initial Stain Set	
877016	Stain Set INvivo/INsitu MC, LF, PC (Наборы красителей INvivo/INsitu для систем MC, LF, PC)



Примечание

Состав наборов и перечень отдельных компонентов подробно описаны в буклетах и списках продукции на нашем веб-сайте: www.initial.gceurope.com. Подробная информация о MultiPressVest представлена на стр. 67.

GC Gradia

ДЖИ СИ Градия

Абсолютная эстетическая гармония



Gradia – светоотверждаемый микрокерамический гибридный композитный материал, обладающий исключительной износоустойчивостью, прекрасной светопроницаемостью и позволяющий идеально имитировать эстетику естественных зубов. Отбеленные Оттенки Gradia позволяют удовлетворить любые требования при изготовлении косметических реставраций.

Свойства & преимущества

- Гибридный микрофильный наполнитель
- Высокая механическая прочность
- Великолепные физические свойства, например гладкость поверхности и износоустойчивость
- Идеально совместим с естественными зубами-антагонистами
- Светопроницаемость и цвет как у естественных зубов
- Удобное послойное моделирование, сходное с техникой наложения керамических масс
- Прекрасная полируемость
- Возможность починки непосредственно в полости рта

Показания

- Коронки и мостовидные протезы на металлическом каркасе для фронтальных и жевательных групп зубов
- Цельнокомпозитные коронки для фронтальных и жевательных групп зубов
- Облицовки
- Вкладки / накладки
- Ортопедические конструкции с опорой на имплантатах
- Индивидуализация гарнитурных зубов съемных протезов

Упаковки

GC Gradia	
001419	Master Set (Мастер Набор), содержит все пасты, необходимые для воспроизведения 10 оттенков по шкале Vita: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, B4, C2, C3, D3 (всего 57 шприцев) и аксессуары
001517	Standard Set (Стандартный Набор), содержит все пасты, необходимые для воспроизведения 6 оттенков по шкале Vita: A2, A3, A3.5, B2, B3, C2 (всего 26 шприцев) и аксессуары
Отдельно	Любой из 57 оттенков доступен по отдельности
GC Gradia Bleach Shades (Отбеленные Оттенки)	
Отдельно	Полный набор шприцев, необходимых для воспроизведения отбеленных оттенков AO, BO, все доступны по отдельности
GC Gradia Intensive Colours	
001529	Intensive Colour Set, Набор Интенсивных Красителей (11 цветов)
Отдельно	Любой из 11 цветов доступен по отдельности
GC Retention Beads II / ДЖИ СИ Ретенционные шарики тип II	
000512	Набор (Ретенционные Шарики тип II, 15 г + Адгезив для Ретенционных Шариков, 10 мл)



Применение

Система Gradia представлена пастами, обладающими оптимальной структурой и не прилипающими к поверхности инструментов. Это позволяет легко и точно контролировать распределение материала по всем поверхностям каркаса и в области резцового края.
Винтовой поршень шприцов Gradia является многоразовым и легко переставляется. Удобная крышка шприца облегчает извлечение из него пасты.

Примечание

Состав наборов и перечень отдельных компонентов подробно описаны в буклетах и списках продукции на нашем веб-сайте:
www.gceurope.gradia.com

КОМПОЗИТЫ

GC Gradia gum shades

ДЖИ СИ Градия Оттенки десны

Светоотверждаемая микрокерамическая композитная система для имитации тканей десны



Система Gradia Оттенки Десны создана специально для имитации характерных цветовых и индивидуальных особенностей десны. С помощью этого светоотверждаемого композита можно моделировать ткани десны по упрощенной методике и методом многослойного нанесения.

Свойства & преимущества

- Оттенки системы соответствуют естественной окраске тканей десны
  - Идеальная имитация мягких тканей
  - Неограниченные возможности воспроизведения анатомических особенностей и широкого спектра цветовых вариаций
  - Легко полируется и очищается
- Микрокерамический композитный светоотверждаемый материал с уникальными физическими свойствами и рабочими характеристиками
- Также возможно применение в комбинации с керамикой

Показания

- Моделирование тканей десны при изготовлении:
  - Конструкций с опорой на имплантатах
  - Коронок и мостовидных протезов
  - Индивидуализация частичных и полных съемных протезов

Упаковки

GC Gradia gum shades / ДЖИ СИ Градия Оттенки десны	
001889	Стартовый Набор: 7 оттенков (2 Десневых Опака, 4 Десневых Массы, 1 Десна Светопроницаемая)

GC Steplight SL-I

ДЖИ СИ Стэплайт СЛ-I

Настольная установка для предварительной светополимеризации наносимых слоев композитного материала (за исключением слоев опака!)



Свойства & преимущества

- Специально разработана для предварительной полимеризации компонентов системы Gradia
- Эргономичный дизайн и удобство в работе
- Автоматический таймер на 10 секунд
- Встроенный вентилятор для охлаждения
- Спецификация: напряжение 220/230В, частота тока 50 Гц

Упаковки

GC Steplight SL-I	
001537	Установка GC Steplight SL-I
001557	Сменная галогеновая лампа, 1 шт

GC Labolight LV-III

ДЖИ СИ Лаболайт ЛВ-III

Устройство для окончательной фотополимеризации



Свойства & преимущества

- Прекрасный и надежный фотополимеризующий эффект, включая слои опака на этапах моделирования
- Встроенный вентилятор обеспечивает оптимальный контроль над температурой во время полимеризации
- Великолепные рабочие характеристики
- Просторная фотополимеризационная камера для конструкций любых размеров
- Компактный дизайн
- Спецификация: напряжение 220/230В, частота тока 50/60 Гц

Упаковки

GC Labolight LV-III	
001553	Установка GC Labolight LV-III, включая аксессуары (2 вращающихся столика, 2 опорные стойки, 8 опорных штифтов, 3 флуоресцентных лампы)
001193	Сменная флуоресцентная лампа для GC Labolight LV-II/LV-III, 1 шт

РЕМОНТ С ПОМОЩЬЮ ПРАЙМЕРОВ



РЕМОНТ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКОЛОВШЕГОСЯ ФРАГМЕНТА

Предварительная подготовка поверхности в области скола	Обработка металлической поверхности	Обработка керамической поверхности *	Реконструкция с использованием композита
Обработайте поверхность в области скола, сформируйте скос	Нанесите Metal Primer II	Выдавите Ceramic Primer A и B на блок для замешивания и замешайте	Нанесите Composite Primer
Очистите поверхность, а затем загрубите её, используя бор, путём пескоструйной обработки оксидом алюминия, либо путём протравливания	Замаскируйте металл с помощью пастообразного опака Gradia	Нанесите смесь на поверхность керамики	Фотополимеризуйте в течение 10 секунд
	Фотополимеризуйте в течение минимум 20 секунд	Просушите струёй воздуха под средним давлением	Нанесите необходимое количество слоёв Gradia Direct
			Фотополимеризуйте каждый слой по отдельности
			Произведите финишную обработку и полировку

РЕМОНТ С ФИКСАЦИЕЙ НА МЕСТО ОТКОЛОВШЕГОСЯ ФРАГМЕНТА

Предварительная подготовка поверхности в области скола	Обработка металлической поверхности	Обработка керамической поверхности *	Реконструкция
Подготовьте поверхности реставрации и отколовшегося фрагмента	Нанесите Metal Primer II	Выдавите Ceramic Primer A и B на блок для замешивания и замешайте	Нанесите Composite Primer
Очистите поверхность, а затем загрубите её, используя бор, путём пескоструйной обработки оксидом алюминия, либо путём протравливания	Замаскируйте металл с помощью пастообразного опака Gradia	Нанесите смесь на поверхность керамики	Фотополимеризуйте в течение 10 секунд
	Фотополимеризуйте в течение минимум 20 секунд	Просушите струёй воздуха под средним давлением	Нанесите Gradia Direct Flo на поверхность реставрации в области скола
			Припасуйте отколовшийся фрагмент на место
			Удалите излишки цемента
			Фотополимеризуйте
			Произведите финишную обработку и полировку

* Не требуется при ремонте композитных конструкций

БОНДИНГОВЫЕ СИСТЕМЫ

Адгезив для соединения акриловых пластмасс и композитов с металлами

GC Metal Primer II

ДЖИ СИ Метал Праймер II



Обеспечивает надежную и прочную связь между композитами и металлическими сплавами.

Свойства & преимущества

- Быстро и легко наносится с помощью кисти, удобный в работе
- Не требует наличия специального оборудования
- Устойчив во влажной среде, обеспечивает надежную адгезию
- Применяется для соединения со всеми типами стоматологических сплавов

Упаковки

GC Metal Primer II	
003461	5 мл жидкости и 1 кисть

Применение

При проведении починки непосредственно в полости рта использование раббер-дама обязательно.

Светоотверждаемый адгезив для соединения композитов

GC Composite Primer

ДЖИ СИ Композит Праймер



Восстанавливает ингибированный слой для надежного соединения композита к композиту.

Свойства & преимущества

- Легко наносится с помощью кисти
- Удобный и простой в применении
- Восстанавливает ингибированный слой
- Надежный бондинг композитов

Упаковки

GC Composite Primer	
001530	3 мл жидкости

Применение

Composite Primer также используется, когда необходимо придать индивидуальные особенности гарнитурной композитной коронке (облицовке) с помощью системы Gradia или при индивидуализации съемного протеза с помощью Gradia Gum.

Двухкомпонентная бондинговая система для соединения композитов и керамики

GC Ceramic Primer

ДЖИ СИ Керамик Праймер



Применяется для надежного соединения пластмасс, композитов и акрила с поверхностью керамики.

Свойства & преимущества

- Легко наносится с помощью кисти
- Удобный и простой в применении
- Надежный бондинг

Упаковки

GC Ceramic Primer	
001930	Упаковка 1-1: 2 мл жидкости A, 2 мл жидкости B

Применение

Ceramic Primer и Composite Primer обеспечивают надежное соединение материалов Gradia и Gradia Gum с керамическими конструкциями. Вне зависимости от размеров керамических реставраций (конструкции с опорой на имплантатах, частичные протезы) дефект мягких тканей может быть легко замещен и идеально отмоделирован с помощью этих высоко эстетичных композитных материалов. В клинике он применяется для прочного соединения керамической реставрации со структурами зуба с помощью композитного цемента.

Optiglaze

Оптиглэйз

Нанонаполненное светоотверждаемое защитное покрытие



Новое защитное покрытие, которое упрощает процесс финишной обработки и обеспечивает гладкую блестящую эстетичную поверхность искусственных зубов, съемных протезов, временных коронок и индивидуальных пластмассовых капп. Optiglaze отлично подходит для обработки поверхностей, полировка которых проблематична, например фиссур или апроксимальных поверхностей непрямых композитных реставраций.

Свойства & преимущества

- Уникальная технология гомогенного распределения нано-наполнителя
- Простое применение, экономит время
- Наносится очень тонким слоем (25-50 µм), благодаря чему не влияет на цвет реставрации
- Великолепная износоустойчивость и долговечный блеск
- Идеальная эстетичность и высокая устойчивость к пигментации
- Превосходная адгезионная способность

Упаковки

Optiglaze	
002613	флакон 15 мл



Применение

Выдавите несколько капель материала в чашку.
С помощью кисти нанесите материал на поверхность реставрации.
Фотополимеризуйте в течение 3 мин в установке Labolight LV-III.

Optiglaze можно использовать при работе с искусственными зубами, съемными протезами, временными коронками и индивидуальными пластмассовыми каппами, а также для защиты области фиссур и апроксимальных поверхностей непрямых композитных реставраций. Для применения непосредственно в полости рта компания GC рекомендует использовать защитное покрытие G-Coat PLUS (материал подробно описан на стр. 29)

ПЛАСТМАССЫ

Моделировочная пластмасса с низкой степенью усадки

GC Pattern Resin LS

ДЖИ СИ Паттерн Резин ЛС

Беззольная пластмасса для моделирования телескопических и/или конических коронок, аттачментов, шинирующих дуг, кламмеров, стабилизации элементов конструкций, вторичных элементов имплантатов и штампиков для гальванопластики.



Свойства & преимущества

- Низкая полимеризационная усадка и простота обработки, идеальная припасовка и точность отливки
- Высокая прочность и твердость
- Высокая стабильность даже очень тонких слоев пластмассы
- Не оставляет зольных остатков после выгорания, обеспечивая чистую гомогенную поверхность отливки

Упаковки

GC Pattern Resin LS	
335201	Упаковка 1-1 (100 г порошка, 105 мл жидкости, 2 чаши для замешивания, 1 кисть N°4 и 1 пипетка)
335202	100 г порошка
335204	1 кг порошка
335203	105 мл жидкости
335205	262 мл жидкости
001416	Кисти N°4, 10 шт
001212	Чаши для замешивания, 5 шт

Применение

Pattern Resin LS специально разработан для техники нанесения кистью.

Акриловая пластмасса химического отверждения

GC Ostron

ДЖИ СИ Острон

Акриловая пластмасса химического отверждения для изготовления индивидуальных слепочных ложек, базисных пластинок и регистрации прикуса.

Свойства & преимущества

- Сокращенное время загустевания
- Прекрасно адаптируется и облегает модель, но не прилипает
- Достаточное рабочее время
- Гладкая и блестящая поверхность, высокая пространственная стабильность
- Хорошо режется

Упаковки

GC Ostron P/L / Порошок/Жидкость	
000615	Прозрачный голубой, 1 кг порошка
000605	Прозрачный розовый, 1 кг порошка
000354	250 мл жидкости



GC Fujirock EP

ДЖИ СИ Фуджирок ЕП

Стоматологический гипс IV типа



Супергипс IV типа высочайшего качества, идеально подходит для всех видов ортопедических работ. Предотвращает появление сколов при изъятии моделей из слепков, шлифовке, распиливании или полировке. Обеспечивает изготовление моделей с абсолютной точностью воспроизведения деталей, что является основой для создания идеальных ортопедических конструкций

Свойства & преимущества

- Отличные физические характеристики
- Быстро замешивается (в течение 1 мин)
- Продленное рабочее время (более 8 мин)
- Короткая фаза отверждения (всего 12 мин)
- Изъятие из слепка возможно всего через 30 мин
- Исключительная текучесть материала за счет его тиксотропических свойств позволяет воспроизвести мельчайшие детали
- Низкий коэффициент расширения (менее 0.08%)
- Пространственная стабильность обеспечивает идеальное соответствие ортопедической конструкции

Упаковки

GC Fujirock EP	
890222	Золотисто-коричневый, 5 кг
890223	Жёлтая пастель, 5 кг
890224	Белый жемчуг, 5 кг
890225	Бежевый топаз, 5 кг
890226	Золотисто-коричневый, 12 кг
890227	Жёлтая пастель, 12 кг



Применение

Один из самых популярных в мире гипсов Fujirock EP выпускается в 4 цветах, которые соответствуют любым эстетическим требованиям и обладают высокими техническими характеристиками.

ГИПСЫ

Стоматологический гипс IV типа для сканирующих установок

GC Fujirock OptiXscan

ДЖИ СИ Фуджирок ОптиЭКССкан

Поскольку с каждым днём имплантология и технологии CAD/CAM приобретают всё большую популярность, компания GC разработала специальный гипс IV типа для этих областей стоматологии. Благодаря специально адаптированному составу порошка Fujirock EP OptiXscan совместим с любыми современными сканирующими системами.



Свойства & преимущества

- Совместим с любыми сканирующими системами (лазерными, светооптическими)
- Адаптируемое рабочее время и сокращённое время отверждения убыстряют работу
- Варьируемое соотношение воды и порошка при замешивании без изменения физических свойств
- Низкий коэффициент расширения гарантирует высокую точность модели
- Идеально гладкая поверхность
- Высокая устойчивость к абразии

Упаковки

GC Fujirock OptiXscan	
900482	Коричневый Инкский, 5 кг

Применение

20 мл воды – сокращённое время отверждения (модель готова всего через 20 минут).
21 мл воды – есть время для отливки большего числа моделей.
Цвет – Коричневый Инкский.

Высоко текучий гипс IV типа для изготовления баз под дугообразные модели

GC Fujirock OptiFlow

ДЖИ СИ Фуджирок ОптиФлоу

Высоко текучий гипс IV типа для изготовления баз под дугообразные модели из гипсов Fujirock EP. 4 цвета – Красная Терракота, Динамичный Сиреневый, Зелёная Мята и Синий Сапфир – позволяют удовлетворить требования по изготовлению индивидуализированных и эстетичных рабочих моделей. Наиболее оптимальный результат достигается с помощью различных комбинаций с четырьмя оттенками Fujirock EP.



Свойства & преимущества

- Текучесть, практически равная воде, позволяет материалу свободно обтекать пины без образования пор
- Стабильное и низкое расширение для идеальной работы в комбинации с гипсами Fujirock EP и Fujirock EP OptiXscan

Упаковки

GC Fujirock OptiFlow	
900478	Красная Терракота, 12 кг
900479	Динамичный Сиреневый, 12 кг
900480	Зелёная Мята, 12 кг
900481	Синий Сапфир, 12 кг

Применение

Текучесть, практически равная воде, достигается добавлением всего 20 мл воды.
Цвета – Красная Терракота, Динамичный Сиреневый, Зелёная Мята и Синий Сапфир.


GC Fujivest Platinum & Premium

System Approach

Фудживест Платинум & Премиум
Системный подход

Новые формовочные материалы для отливки коронок и мостовидных протезов

GC FUJIVEST PREMIUM

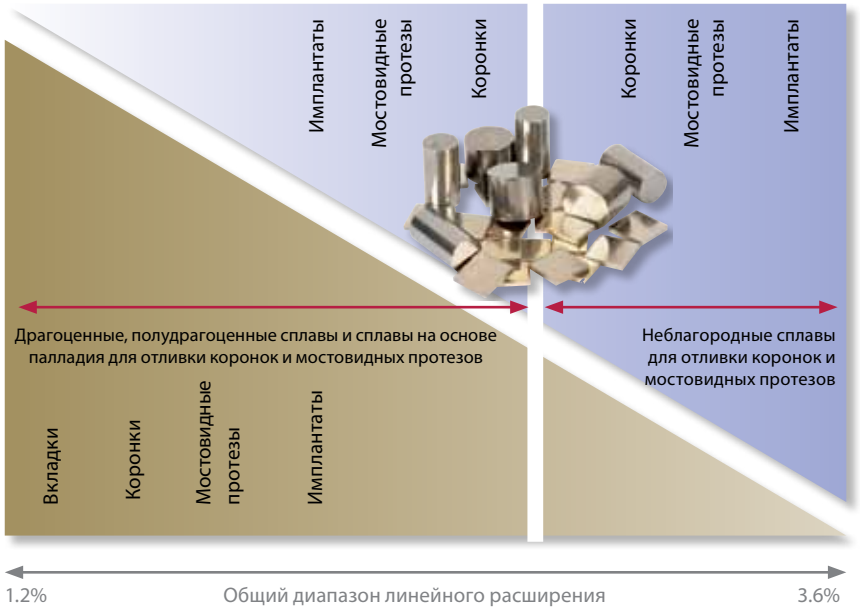

Индивидуальное и перекрестное позиционирование линии формовочных материалов Fujivest Platinum и Premium. Таблица наглядно демонстрирует позиционирование каждого из формовочных материалов в зависимости от типа стоматологического сплава и вида реставрации.

GC FUJIVEST PLATINUM

Разработав эти две новые паковочные массы, компания GC Europe еще раз подтвердила свою компетенцию в области изготовления фосфатных формовочных материалов для коронок и мостовидных протезов. Fujivest Platinum и Premium соответствуют всем требованиям современного рынка изготовления коронок и мостовидных протезов в Европе.

GC FUJIVEST PLATINUM
ДЖИ СИ ФУДЖИВЕСТ ПЛАТИНУМ

Идеальный контроль над процессом и высокая точность отливки – таковы наиболее важные требования к современному формовочному материалу для высокоточной отливки. Уже являясь разработчиком одной из наиболее широко применяемых фосфатных паковочных масс, Fujivest Super, GC Europe переходит на следующий этап развития этой области с запуском Fujivest Platinum, паковочной массы для всех драгоценных, полудрагоценных сплавов и сплавов на основе палладия для отливки коронок и мостовидных протезов. Отличительные особенности этого нового безуглеродистого формовочного материала для высокоточной отливки коронок и мостовидных протезов включают в себя комфортные рабочие качества и великолепно контролируемое расширение – как при использовании метода быстрого нагрева, так и при поэтапном нагреве.

GC FUJIVEST PREMIUM
ДЖИ СИ ФУДЖИВЕСТ ПРЕМИУМ

Контролируемое отверждение обеспечивает высочайшую точность отливок, особенно при использовании неблагородных сплавов. Независимо от метода нагрева – быстрого или традиционного, – с применением отливочных колец или без них, Fujivest Premium оправдывает все ожидания, которые обычно возлагаются на современный многоцелевой формовочный материал. Этот безуглеродистый фосфатный формовочный материал для высокоточной отливки коронок и мостовидных протезов подходит для широчайшего круга показаний, и в каждом отдельном случае неизменно обеспечивает высокую точность отливки. Таким образом, Fujivest Premium идеально подходит для всех ортопедических работ и любых сплавов, особенно для никельхромового и кобальтохромового сплавов. Благодаря тому, что порошок материала состоит из мельчайших частиц, зубные техники могут делать выбор между быстрым и программно контролируемым методом нагрева – с надежным контролем расширения материала.

ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

GC Fujivest Platinum

ДЖИ СИ Фудживест Платинум

Точное решение для наиболее высоких требований: Fujivest Platinum, формовочный материал для всех драгоценных и полудрагоценных сплавов – высокоточные отливки неизменно наилучшего качества.

Свойства & преимущества

- Используется в процессе быстрого нагрева
- Специально разработан для изготовления высокоточных отливок из драгоценных, полудрагоценных сплавов и сплавов на основе палладия
- Обеспечивает идеальное соответствие даже при отливке ортопедических конструкций большой протяженности и супраконструкций с опорой на имплантатах
- Высокая гладкость поверхности – в центре внимания даже мельчайшие детали
- Обеспечивает нужную степень расширения без утраты положительных свойств материала



Упаковки

GC Fujivest Platinum	
890176	6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)
890177	6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)
890178	6 кг порошка (67 x 90 г в пакете)
890180	900 мл жидкости

Применение

Применяется для методов быстрого и поэтапного нагрева. Для драгоценных, полудрагоценных сплавов и сплавов на основе палладия.

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

GC Fujivest Premium

ДЖИ СИ Фудживест Премиум

Точное решение для разнообразных нужд: Fujivest Premium, формовочный материал для высокоточной отливки коронок и мостовидных протезов, который подходит для всех типов стоматологических сплавов с особым акцентом на неблагородные сплавы: многоцелевой и прочный.

Свойства & преимущества

- Широкий диапазон расширения, до 3.5% – сложные супраструктуры с опорой на имплантатах с применением неблагородных сплавов теперь можно отливать просто и надежно
- Техника использования без отливочных колец возможна при применении методики как быстрого, так и поэтапного нагрева
- Высокая точность отливки обеспечивается равномерным расширением, что обусловлено легким смешиванием порошка и жидкости
- Высокая текучесть и однородная консистенция
- Очень прочный, но легко распаковывается



Упаковки

GC Fujivest Premium	
890182	6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)
890183	6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)
890184	6 кг порошка (67 x 90 г в пакете)
890186	900 мл жидкости

Применение:

Применяется для методов быстрого и поэтапного нагрева. Подходит для любых стоматологических сплавов, с особым акцентом на неблагородные сплавы.

GC Fujivest Super

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

ДЖИ СИ Фудживест Супер

Не содержащий углерода фосфатный формовочный материал для высокоточной отливки драгоценных, полудрагоценных сплавов и сплавов на основе палладия с применением методов быстрого и поэтапного нагрева. Также используется при особо сложной отливке ортопедических конструкций большой протяженности и супраконструкций с опорой на имплантатах.

Свойства & преимущества

- Используется для метода быстрого нагрева
- Общее расширение до 2.34% - имеется специальная жидкость с высоким коэффициентом расширения
- Кремообразная консистенция, высокая гидрофильность и текучесть обеспечивают точное воспроизведение мельчайших деталей
- Контролируемое отверждение и расширение при нагреве обеспечивают высокую точность отливки
- Легко распаковывается
- Высокая точность отливок, идеальное воспроизведение мельчайших деталей поверхности

Упаковки

GC Fujivest Super	
800023	6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)
800024	6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)
800026	6 кг порошка (67 x 90 г в пакете)
800025	900 мл жидкости
800029	900 мл жидкости H.E. (высокий коэффициент расширения)



Применение

Высокая точность при отливке драгоценных и полудрагоценных сплавов, даже при большой протяженности конструкций. Имеется дополнительная инструкция по применению материала при сложной отливке ортопедических супраконструкций с опорой на имплантатах.

GC Fujivest II

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

ДЖИ СИ Фудживест II

Не содержащий углерода фосфатный формовочный материал для высокоточной отливки коронок и мостовидных протезов из всех видов сплавов, включая Ni-Cr и Co-Cr сплавы.

Свойства & преимущества

- Не содержит углерода
- Техника использования без отливочных колец возможна при применении методики как быстрого, так и поэтапного нагрева
- Высокая смачиваемость и текучесть
- Гладкая поверхность отливок
- Контролируемое отверждение и расширение при нагреве
- Специальная жидкость с низким коэффициентом расширения

Упаковки

GC Fujivest II	
800016	6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)
800019	6 кг порошка (67 x 90 г в пакете)
800017	6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)
800166	10 кг порошка (4 x 2.5 кг)
800018	900 мл жидкости
800078	900 мл жидкости L.E. (низкий коэффициент расширения)



Применение

Применяется для методов быстрого и поэтапного нагрева. Идеально подходит для отливки неблагородных сплавов.

ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ

Безуглеродистый фосфатный формовочный материал

GC Stellavest

ДЖИ СИ Стеллавест

Специально разработан в соответствии с современными требованиями к формовочным массам, особое внимание уделено совместимости с неблагородными сплавами.

Свойства & преимущества

- Не содержит углерода
- Используется для метода быстрого нагрева
- Широкий диапазон расширения (до 3%), пригоден для всех стоматологических сплавов, включая Co-Cr
- Отливка возможна и с кольцами, и без колец
- Высокая точность и гладкая поверхность отливок
- Очень прочный, но легко распаковывается
- Экономически выгодный

Упаковки

GC Stellavest	
800042	6 кг порошка (3 x 2 кг в пакете)
800167	4.5 кг порошка (30 x 150 г в пакете)
800043	900 мл жидкости



Применение

Применяется для методов быстрого и поэтапного нагрева. Особый акцент на отливку без колец при методике быстрого нагрева.

Специальная безуглеродистая фосфатная паковочная масса для прессуемой керамики

GC MultiPressVest

ДЖИ СИ МультиПрессВест

Паковочная масса, разработанная специально для работы с системой прессуемой керамики Initial PC и системой Initial IQ.

Свойства & преимущества

- Мелко измельченный фосфатный паковочный материал аккуратно воспроизводит мельчайшие детали и обеспечивает гладкую поверхность
- Кремообразная консистенция обеспечивает легкую и аккуратную запаковку
- Стабильность при высоких температурах позволяет использовать материал для работы по методике как быстрого, так и поэтапного нагрева

Специально разработана для технологий работы с прессуемой керамикой, например:

- Послойное моделирование керамики с помощью Initial PC: коронки, вкладки и облицовки
- Прессование керамики на каркасы из металла: Initial IQ – Press-over-Metal
- Прессование керамики на каркасы из циркония: Initial IQ – Press-over-Zircon

Упаковки

GC MultiPressVest	
800242	Упаковка Интро (порошок 6 x 100 г в пакете, 135 мл жидкости)
800243	6 кг порошка (60 x 100 г в пакете)
800244	900 мл жидкости



Применение

Удобна в применении при использовании с Системой Силиконовых Колец от ДЖИ СИ. Силиконовые кольца являются многоразовыми и легко очищаются. Они допускают естественное расширение паковочного материала.

GC Vest-G

ДЖИ СИ Вест-Джи

Углеродсодержащий фосфатный формовочный материал

Универсальный, содержащий углерод фосфатный формовочный материал для изготовления коронок и мостовидных протезов из всех видов стоматологических сплавов, кроме сплавов на основе палладия.

Свойства & преимущества

- Содержит углерод
- Поэтапный нагрев
- Общее расширение до 3.26%
- Высокая текучесть обеспечивает получение очень гладких отливок из золотых сплавов
- Специально применяется при отливке телескопических коронок и комбинированных конструкций
- Очень легко удаляется
- Сокращает объем пайки при отливке конструкций большой протяженности

Упаковки

GC Vest-G	
800030	6 кг порошка (100 x 60 г в пакете)
800032	6 кг порошка (40 x 150 г в пакете)
800031	900 мл жидкости



GC New Casting LINER

ДЖИ СИ Нью Кастинг ЛАЙНЕР

Лайнер для отливки

Специальный волокнистый керамический материал, предназначенный для компенсации расширения при отливке.

Свойства & преимущества

- Специальный керамический волокнистый материал, не содержащий асбеста
- Не горит при высокой температуре
- Толщина 1 мм – отличный буфер
- Хорошо адаптируется к отливочным кольцам
- Обеспечивает точную отливку, предотвращает растрескивание

Упаковки

GC New Casting LINER	
890028	Рулон 20 м



Применение

Специально адаптирован для работы по методике поэтапного нагрева.

ПАКОВОЧНЫЕ МАССЫ

Огнеупорный материал для штампиков

GC Cosmotech VEST

ДЖИ СИ Космотек ВЕСТ



Фосфатный огнеупорный материал для штампиков для цельнокерамических реставраций – виниров, вкладок и накладок.

Свойства & преимущества

- Термическое расширение аналогично таковому у керамики
- Прекрасно подходит для любых керамических реставраций
- Гладкая поверхность
- Обладает исключительной прочностью и пространственной стабильностью, предотвращает растрескивание керамики
- Выдерживает многократные обжиги в печи
- Легко удаляется

Упаковки

GC Cosmotech VEST	
001147	990 г порошка (30 x 33 г в пакете)
001150	200 мл жидкости

Огнеупорный материал для штампиков

G-Cera ORBIT VEST

ДЖИ-Кера ОРБИТ ВЕСТ



Фосфатный огнеупорный материал для прямого наслаивания керамики, применяется для изготовления вкладок, накладок, коронок и виниров.

Свойства & преимущества

- Контролируемое расширение за счет наличия двух порошков.
- Хорошая смачиваемость
- Пространственная стабильность
- Гладкая поверхность и простота удаления материала
- Выдерживает многократные обжиги в печи
- Подходит для большинства типов керамических материалов

Упаковки

G-Cera ORBIT VEST	
800035	Для коронок/виниров, 990 г порошка (30 x 33 г в пакете)
800036	Для вкладок, 990 г порошка (30 x 33 г в пакете)
800037	200 мл жидкости

Формовочный материал для пайки

GC Soldervest QUICK

ДЖИ СИ Солдервест КВИК



Формовочный материал для пайки на основе гипса с коэффициентом термического расширения, специально подобранным для работы с различными сплавами с целью предотвращения деформационного перекоса.

Свойства & преимущества

- Контролируемое термическое расширение
- Предотвращает появление трещин и сколов
- Исключительная точность в местах пайки
- Удобная в работе консистенция, материал легко удаляется

Упаковки

GC Soldervest QUICK	
800039	1.2 кг порошка (30 x 40 г в пакете)

ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ



Высококачественная продукция в сопровождении первоклассного обучения

Поскольку компания GC очень высоко ценит обучение, при её поддержке был построен новый Центр Собраний и Обучения – GC Europe Campus, расположенный на территории штаб-квартиры европейского подразделения компании в Лёвене, Бельгия.

Этот новый двухэтажный центр был спроектирован специально для проведения собраний и тренингов, его полезная площадь впечатляет – 1600 м2. В здании расположено множество разнообразных комнат для встреч и для занятий, каждая из комнат оборудована по последнему слову техники.

Полностью укомплектованный стоматологический комплекс, включающий также офисные помещения и стерилизационный центр, позволяет проводить индивидуальные и групповые практические курсы с использованием новейших материалов и технологий. Модульная лаборатория для обучения зубных техников позволяет заниматься группами количеством до 12 человек; при ней имеется отдельное помещение для работы с гипсом и полировки, а также ещё одно – для произведения запаковки и отливки.

Мы рады видеть в центре GC Europe Campus стоматологов, зубных техников, гигиенистов и студентов стоматологических специальностей; они могут принять участие в различных практических курсах, презентациях и демонстрациях всех наших основных продуктов и технологий работы с ними. Эти мероприятия проводятся не только нашей собственной группой преподавателей, но и многими приглашёнными профессионалами в области стоматологии, известными по всему миру. Помимо «индивидуальных» занятий, зубные техники, стоматологи и медсёстры могут также принять участие в специальных «командных» тренингах, которые помогут узнать, как правильно подобрать набор тех или иных необходимых материалов, а затем использовать их с наибольшей эффективностью и выгодой для всех заинтересованных сторон.

Мы уверены, что все наши мероприятия должны в конечном итоге оказывать положительное воздействие на ежедневную практику специалистов, посещающих нас, и разрабатываем программы курсов та-





GC Europe Campus



ким образом, чтобы занятия помогали наиболее эффективно решать приоритетные задачи наших партнёров. В программу тренингов включаются не только обзоры материалов и методы работы с ними, но и экономические аспекты их применения; тем самым мы обеспечиваем наиболее всесторонний подход к любой проблеме. Нами были разработаны надёжные и в то же время гибкие схемы обучения, которые можно по мере необходимости подстраивать под различные ситуации и требования. Мы постоянно совершенствуем наши обучающие программы, что позволяет нам обеспечивать наилучшие услуги на стоматологическом рынке разных стран Европы.

Но Центр GC Europe Campus – это не только место, где проводится обучение стоматологов и зубных техников. В рамках укрепления взаимодействия с нашей партнёрской сетью мы, опираясь на концепцию поддержки дилеров и руководствуясь запросами отделов продаж, предоставляем всем нашим партнёрам возможность прислать своих торговых представителей и менеджеров по продажам на презентации, посвящённые как новым продуктам, так и уже зарекомендовавшим себя материалам. Такое сотрудничество с партнёрами повышает эффективность работы, а специализированные курсы обучения работе с материалами и их продаже способствуют успехам наших партнёров и самой нашей компании.

Центр GC Europe Campus будет также и местом соприкосновения «стоматологической науки» и «стоматологического мира». Уже не первый год мы оказываем поддержку Корпорации GC в её работе с многочисленными исследовательскими центрами, помогая переходить от теоретических исследований к разработке инновационных материалов. Задача нового Центра – не только продолжить эту работу, но и способствовать общению различных специалистов на всех уровнях и обмену знаниями, что, в свою очередь, поможет точнее и правильнее определять общие тенденции в стоматологии и требования к стоматологическим материалам на максимально ранних этапах.





2009-2010