Ультразвуковой скалер PT MASTER 3

Производитель:
WOODPECKER
Китай

PT MASTER 3
артикул

Идеальный ультразвуковой скалер для парадонтологоического лечения и снятия зубных отложений, совмещающий в себе современные технологии, дизайн и эргономику. Технология движения кончика насадки по эллипсоид ной траектории позволяет проводить процедуры абсолютно безболезненно для пациента, а титановый сплав насадок не наносит микроцарапин на поверхности эмали, что препятствует бактериальному росту.



Скоро в продаже!





Технология движения насадки по круговой траектории позволяет проводить лечение безболезненно и не оставляет царапин на эмали зуба



Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✗	✓	✓

Ультразвуковой скалер DTE-D7 DTE-D7 LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай

D7
артикул

D7 LED
артикул

- Съемный наконечник автоклавируемый с LED-подсветкой (опционально).
- Снятие зубного камня, пародонтальное и эндодонтическое лечение.
- Режим автоматической подачи воды подходит для клинических растворов, что заметно улучшает пародонтальные и эндодонтические функции.
- Насадка меньше нагревается во время процедуры. Повышенный комфорт для пациентов.

Подаваемый ток	110В ~50-60Гц
	220-240В ~50-60Гц
Питание основного блока	24В ~50-60Гц 1,3А
Мощность на выходе	3-20Вт
Частота	28±3кГц
Вес основного блока	1,17кг
Размеры	241мм x 193мм x 97мм





Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✓	✓	✓

Ультразвуковой скалер DTE-D6 DTE-D6 LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Специальное предложение!

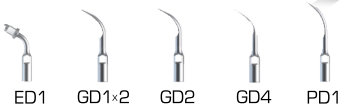
D6
артикул

D6 LED
артикул

- Съемный автоклавируемый наконечник с LEDподсветкой (опционально).
- Снятие зубного камня, пародонтальное и эндодонтическое лечение.
- Емкость для ирригационной жидкости в комплекте

Подаваемый ток	110В ~50-60Гц
	220-240В ~50-60Гц
Питание основного блока	24В ~1,3А
Мощность на выходе	3-20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1-5бар (0,01-0,5МПа)
Вес основного блока	0,73кг
Размеры	198мм x 134мм x 80мм





Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✓	✓	✓

ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510-56-24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

Ультразвуковой скалер DTE-D5 DTE-D5 LED

Производитель: **WOODPECKER** Китай

D5 артикул	D5 LED артикул

- Съемный наконечник автоклавируемый с LED подсветкой (опционально).
- Снятие зубного камня, пародонтальное и эндодонтическое лечение.
- Автоматическое отслеживание частоты.

Подаваемый ток	110В ~50–60Гц
	220–240В ~50–60Гц
Питание основного блока	24В ~1,3А
Мощность на выходе	3–20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1–5бар (0,01–0,5МПа)
Вес основного блока	0,65кг
Размеры	188мм x 159мм x 81мм

Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✓	✗	✓





ED1T GD1T×2 GD2T GD4T PD1T

Ультразвуковой скалер DTE-D2 LED

Производитель: **WOODPECKER** Китай

D2 LED артикул

- Наконечник автоклавируемый с LED-подсветкой.
- Снятие зубного камня, пародонтальное лечение.
- Автоматическое отслеживание частоты.

Подаваемый ток	110В ~50–60Гц
	220–240В ~50–60Гц
Мощность на выходе	3–20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1–5бар (0,01–0,5МПа)
Вес основного блока	1,56кг
Размеры	227мм x 158мм x 75мм

Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✗	✗	✗





GD1×3 GD2 PD1

Ультразвуковой скалер DTE-D3 DTE-D3 LED

Производитель: **WOODPECKER** Китай

D3 артикул	D3 LED артикул

- Съемный наконечник автоклавируемый с LED-подсветкой (опционально).
- Снятие зубного камня, пародонтальное лечение.
- Автоматическое отслеживание частоты.

Подаваемый ток	110В ~50–60Гц
	220–240В ~50–60Гц
Питание основного блока	24В ~1,3А
Мощность на выходе	3–20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1–5бар (0,01–0,5МПа)
Вес основного блока	0,66кг
Вес блока питания	1,2 кг
Размеры	198мм x 134мм x 80мм

Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✗	✗	✓





GD1×2 GD2 GD4 PD1

Ультразвуковой скалер UDS

Производитель: **WOODPECKER** Китай

UDS артикул

Ультразвуковой автономный пьезоскалер UDS Портативный аппарат для скалинга, пародонтологии и эндодонтии.

Блок управления	1шт.
Съемный автоклавируемый наконечник скалера	1шт.
Шланг скалера	1шт.
Ключ	2шт. (пластик. и метал.)
Электрический блок питания	1шт.
Емкость для воды	1шт.
Трубка подачи воды	1шт.
С 6 насадками (G1–2 шт., G2–1 шт., G4–1 шт., P1–1шт., эндочаком (E1) и комплектом U файлов)	
Педаль ножная	1шт.

Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✓	✓	✓



Скалеры для монтажа в стоматологические установки совместимы со стандартом NSK, SATELEC

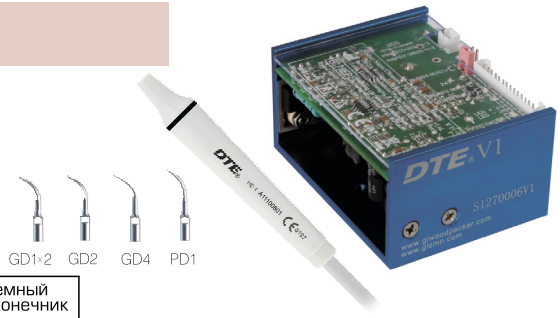
Скалер DTE-V1

Производитель:
WOODPECKER
Китай

V1
артикул

- Герметичный несъемный наконечник
- Автоматическое отслеживание частоты

Питание основного блока	24В ~1,3А
Мощность на выходе	3 20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1 5бар (0,01 0,5МПа)
Вес основного блока	0,2кг
Размеры	74мм x 56мм x 38мм



Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✗	✗	✗

Скалер DTE-V2 DTE-V2 LED

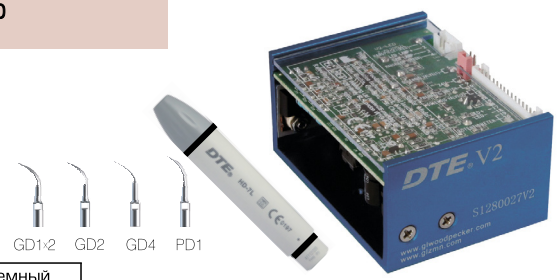
Производитель:
WOODPECKER
Китай

V2
артикул

V2 LED
артикул

- Съемный автоклавируемый наконечник
- Автоматическое отслеживание частоты

Питание основного блока	24В ~50 60Гц 1,3А
Мощность на выходе	3 20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1 5бар (0,01 0,5МПа)
Вес основного блока	0,2кг
Размеры	74мм x 56мм x 38мм



Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✗	✗	✓

Скалер DTE-V3 DTE-V3 LED

Производитель:
WOODPECKER
Китай

V3
артикул

V3 LED
артикул

- Съемный автоклавируемый наконечник
- Снятие зубного камня, эндодонтическое лечение
- Автоматическое отслеживание частоты

Питание основного блока	24В ~50 60Гц 1,3А
Мощность на выходе	3 20Вт
Частота	28±3кГц
Напор воды	0,1 5бар (0,01 0,5МПа)
Вес основного блока	0,2кг
Размеры	74мм x 56мм x 38мм



Удаление зубного камня	Пародонтология	Эндодонтия	Встроенная подача воды	Съемный наконечник
✓	✓	✓	✗	✓

ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510-56-24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

Наконечники к скалерам DTE

HD-7L

Для скалеров DTE с LED–подсветкой



Вес	63г
Размеры	111мм x 20,5мм





Вес	57г
Размеры	111мм x 20,5мм

HD-7H

Для скалеров DTE без LED–подсветки



Вес	57г
Размеры	117мм x 21мм





Вес	57г
Размеры	117мм x 21мм

HD-7L

Для скалеров DTE с LED–подсветкой



HD-7H

Для скалеров DTE без LED–подсветки



Наконечники к скалерам WOODPECKER

HW-5L

Для скалеров Woodpecker с LED–подсветкой



Вес	45г
Размеры	105 x 19мм





Вес	51г
Размеры	105 x 19мм

HW-3H

Для скалеров Woodpecker без LED–подсветкой



Вес	47г
Размеры	117 x 18мм





Вес	47г
Размеры	117 x 18мм

HW-5L

Для скалеров Woodpecker с LED–подсветкой



HW-3H

Для скалеров Woodpecker без LED–подсветкой



Апекслокатор DTE Dpex III

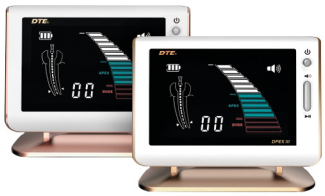
Производитель:
WOODPECKER
Китай

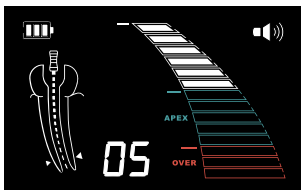
Dpex III
артикул

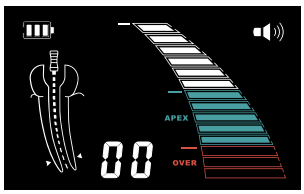


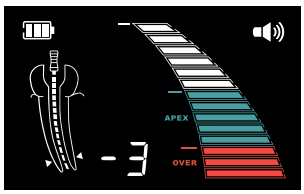
- Оснащен четким с высокой яркостью ЖК дисплеем, контрастное изображение и различные цвета четко отображают траекторию файла.
- Мультичастотная система апикального позиционирования предотвращает влияние внешних факторов на точность измерений.
- Точность измерений не зависит от вида зуба, состояния корневого канала и его влажности
- Подтвержденная точность измерений до 98%
- Перезаряжаемый литиевый аккумулятор

Питание	3,7В/750мАч
Потребляемая мощность	≤ 0,5Вт
Экран	4,5" ЖКД
Вес основного блока	385г
Размеры	138мм x 77мм x 107мм

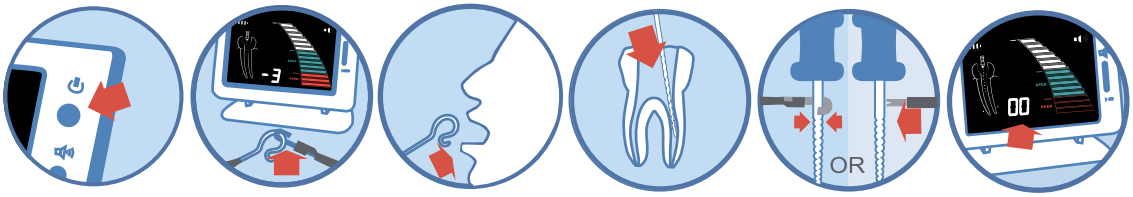








Применение



Включите прибор | Проверьте перед использованием | Установите загубник | Установите файл в корневой канал | Соедините файл с держателем или зондом | Начните работу

Апекслокатор DTE Dpex I

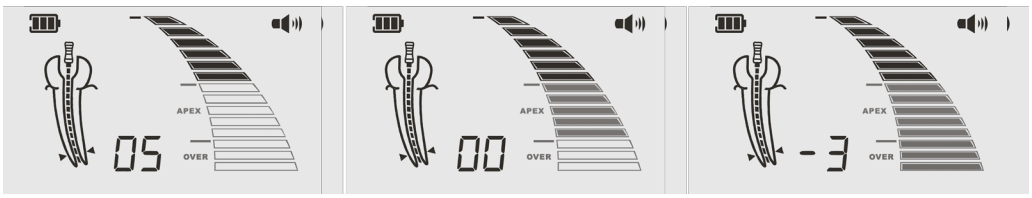
Производитель:
WOODPECKER
Китай

Dpex I
артикул



- Благодаря использованию передовой многочастотной методики измерения полного сопротивления цепи и автоматической калибровки обеспечивается точность измерений.
- Комплектующие аппарата «Dpex I» можно стерилизовать в автоклаве при высокой температуре и высоком давлении.
- Исключена вероятность перекрестной инфекции.
- В процесе измерения положения файла в корневом канале пульпы зуба сопровождается звуковым сигналом.

Питание	3 щелочные батареи AAA
Потребляемая мощность	≤ 0,3Вт
Экран	4,9" ЖКД
Вес основного блока	395г
Размеры	105мм x 142мм x 40мм



ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510-56-24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

Удаление зубного камня (насадки DTE / NSK / SATELEC)

GD1



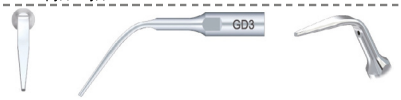
удаление наддесневого и пришеечного зубного камня, а также твердых отложений с вершины зуба

GD2



удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GD3



удаление наддесневого, поддесневого и межзубного камня

GD4



удаление всех наддесневых камней и отложений

GD5



удаление наддесневого зубного камня и пришеечных отложений

GD6



удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GD7



удаление зубной коронки

GD8



удаление зубной коронки

GD9



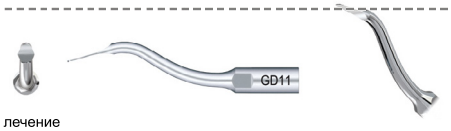
удаление всех наддесневых камней и отложений

GD10



удаление всех наддесневых камней и отложений

GD11



ортодонтическое лечение

Пародонтология (насадки DTE / NSK / SATELEC)

PD1



удаление поддесневого зубного камня

PD3



удаление поддесневого зубного камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD4



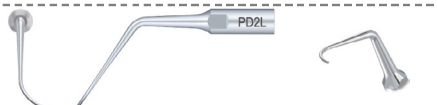
удаление поддесневого межзубного камня

PD3D



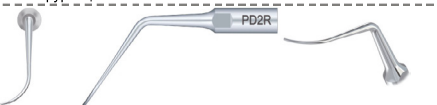
выравнивание поверхности костной ткани во время лоскутной операции

PD2L



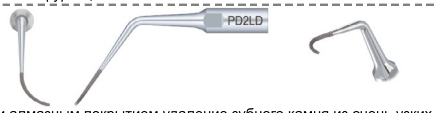
с наклоном влево удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

PD2R



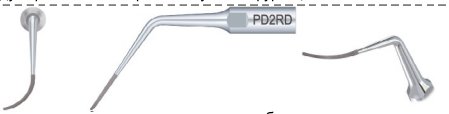
с наклоном вправо удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

PD2LD



с наклоном влево и алмазным покрытием удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

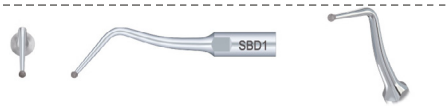
PD2RD



с наклоном вправо и алмазным покрытием удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

Препарирование кариозной полости (насадки DTE / NSK / SATELEC)

SBD1



с алмазным шариком удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

SBD2



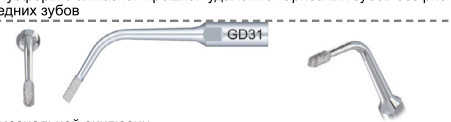
в виде верхней полусферы с алмазной крошкой удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

SBD3



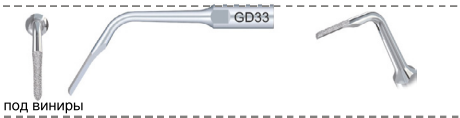
в виде нижней полусферы с алмазной крошкой удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

GD31



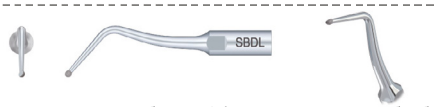
препарирование мезиальной окклюзии

GD33



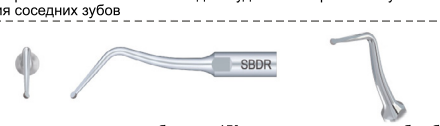
препарирование под виниры

SBDL



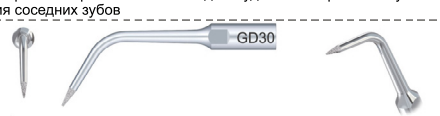
с алмазным полушариком и левым изгибом под 45° удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

SBDR



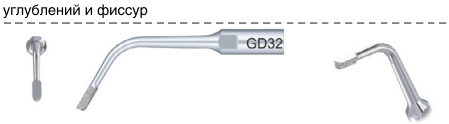
с алмазным полушариком и правым изгибом под 45° удаление кариозных зубов без риска повреждения соседних зубов

GD30



препарирование углублений и фиссур

GD32



препарирование мезиальных и дистальных полостей

Препарирование кариозной полости насадки DTE / NSK / SATELEC)

GD20



обработка дентина

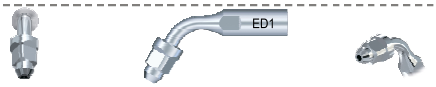
GD21



финишная обработка и полировка препарированного уступа

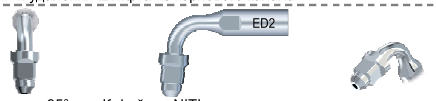
Эндодонтия (насадки DTE / NSK / SATELEC)

ED1



эндочак с углом наклона 120° для K-файлов NITI: чистка корневого канала премоляра после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ED2



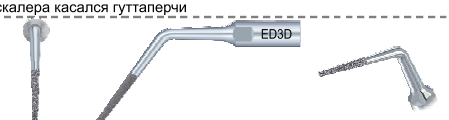
эндочак с углом наклона 95° для K-файлов NITI: чистка корневого канала дистомоляра после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ED3



после чистки корневого канала, с использованием механизма и тепловой энергии ультразвуковых колебаний, для смягчения латеральной конденсации, следить чтобы кончик насадки скалера касался гуттаперчи

ED3D



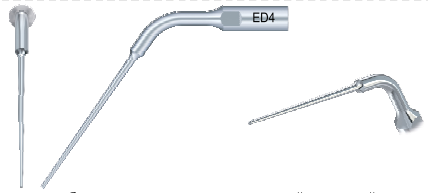
удаление минерализованных отложений и плохого пломбирующего материала пульповой полости, нависающих краев пульпарной камеры

PD4D



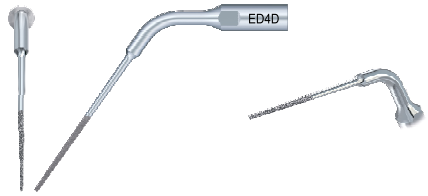
может заменять традиционный дрильбор G, обеспечение хорошего эндодонтического доступа к устьям корневых каналов

ED4



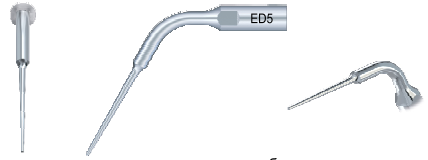
удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ED4D



с алмазным покрытием, повторная обработка очень твердых отложений

ED5



удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети

ED5D



с алмазным покрытием и улучшенными режущими и шлифующими свойствами, для латеральных каналов. Особенно подходит для снятия очень твердых отложений на стенке канала

ED8



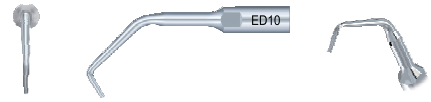
эндочак для боров, расширение канала и обработка жевательных зубов

ED9



эндочак для боров, расширение канала и обработки жевательных зубов

ED10



мягкая обработка корневых каналов

ED10D



ретроградная обработка корневого канала, эффективная полировка верхушки корня зуба(с алмазным напылением)

ED11



мягкая обработка корневых каналов

ED11D



ретроградная обработка корневого канала, эффективная полировка верхушки корня зуба (с алмазным напылением)

ED14



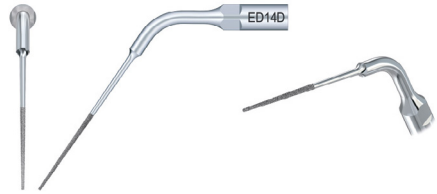
удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ED15



удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети

ED14D



удаление кальцификации из корневого канала, чистка и расширение корневого канала

ED15D



удаление кальцификации из корневого канала, чистка и расширение корневого канала

NITI K-File



Насадка с отличной прочностью для чистки корневого канала.
Размер файла: 32,5±0,5мм
Размер наконечника: Ф0,68~0,71мм
Заострение K-файла: 2%
В каждом комплекте 6 штук.

Для заказа насадок стандарта (стандарт EMS) указать артикул сократив второй символ.
Пример: DTE – GD1
WOODPECKER – G1

ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510-56-24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

Удаление зубного камня (насадки DTE / NSK / SATELEC)

GD1T


удаление наддесневого и пришеечного зубного камня, а также твердых отложений с вершины зуба

GD2T


удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GD3T


удаление наддесневого, поддесневого и межзубного камня

GD4T


удаление наддесневых камней и отложений

GD5T


удаление наддесневого зубного камня и пришеечных отложений

GD6T


удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GD7T


удаление зубной коронки и пломбирующего материала

GD8T


удаление зубной коронки

GD9T


удаление наддесневых камней и отложений

GD10T


удаление наддесневых камней и отложений

Эндодонтия (насадки DTE / NSK / SATALEC)

ED1T

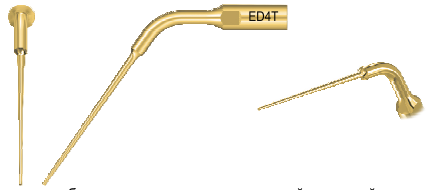

эндочак с углом наклона 120° для К-файлов NITI: чистка передних корневых каналов после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ED2T


эндочак с углом наклона 95° для К-файлов NITI: чистка передних корневых каналов после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ED3T


после чистки корневого канала, с использованием механизма и тепловой энергии ультразвуковых колебаний, для смягчения латеральной конденсации, следить чтобы кончик насадки скалера касался гуттаперчи

ED4T


удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ED5T


удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети

ED8T


эндочак для боров, расширение канала и обработка жевательных зубов

ED9T

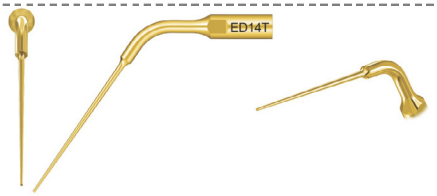

эндочак для боров, расширение канала и обработки жевательных зубов

ED10T


мягкая обработка корневых каналов

ED11T


мягкая обработка корневых каналов

ED14T


удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала, с ирригацией

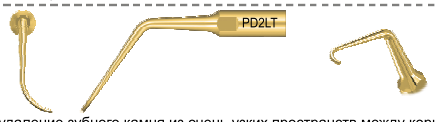
ED15T


удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети, с ирригацией

Пародонтология (насадки DTE / NSK / SATELEC)

PD1T


удаление поддесневого зубного камня

PD2LT


с наклоном влево удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

PD2RT


с наклоном вправо удаление зубного камня из очень узких пространств между корнями многокорневого зуба и с фуркаций

PD3T


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD3LT


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD3RT


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD4T


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD5T


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD10T


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD11T


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD12T


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD14LT


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD14RT


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD18T

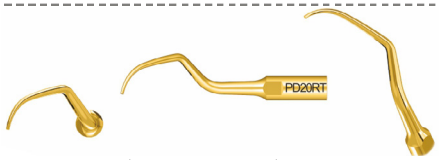

удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD20T


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD20LT


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD20RT


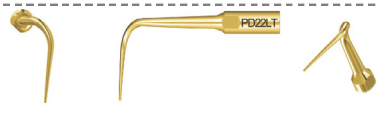
удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD21LT


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD21RT


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

PD22LT


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

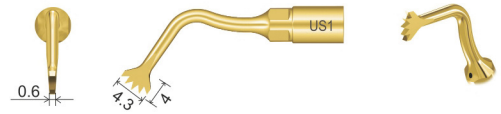
PD22RT


удаление поддесневого камня и глубоких отложений в зубодесневых карманах

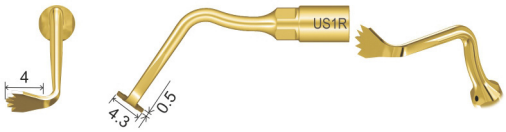
Для заказа насадок стандарта WOODPECKER (стандарт EMS) указать артикул сократив второй символ.
Пример: DTE – GD1 WOODPECKER – G1

ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510-56-24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

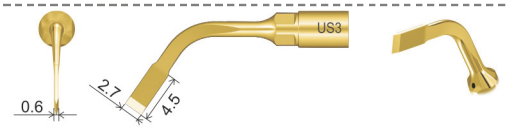
Костная пластика

US1


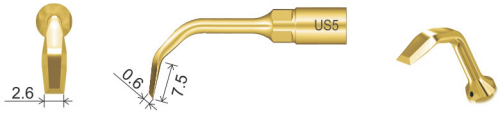
US1L

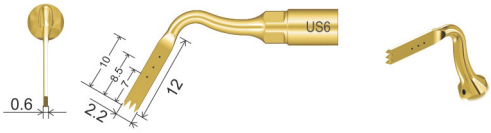

US1R


US2

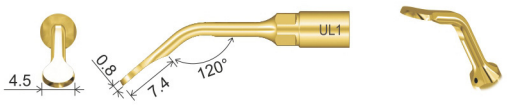

US3


US4


US5


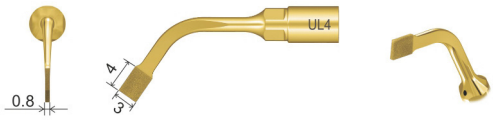
US6


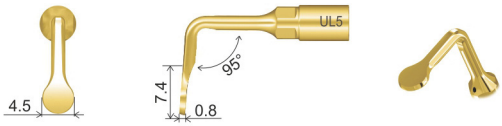
Синус-лифтинг

UL1


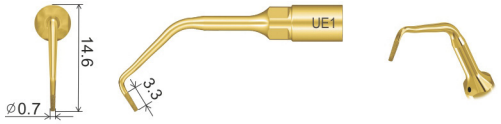
UL2


UL3


UL4


UL5


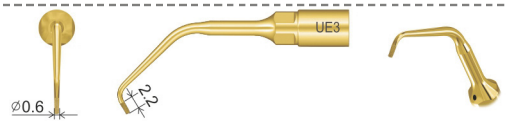
Эндодонтия

UE1


апикальная хирургия

UE2


мягкая апикальная хирургия

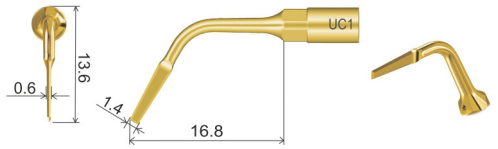
UE3


апикальная хирургия

UE4


мягкая апикальная хирургия

Эндодонтия

UC1


минимально травматичное разрезание связок

UC2

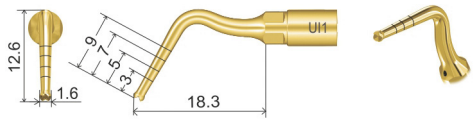

минимально травматичное разрезание связок

UC3


минимально травматичное разрезание связок

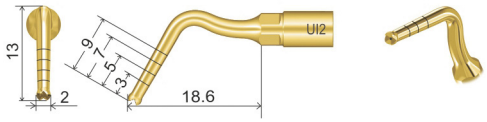
Имплантация

UI1



минимально травматичное разрезание связок

UI2



минимально травматичное разрезание связок

UI3



минимально травматичное разрезание связок

UI4



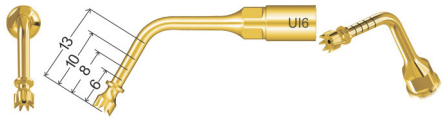
минимально травматичное разрезание связок

UI5



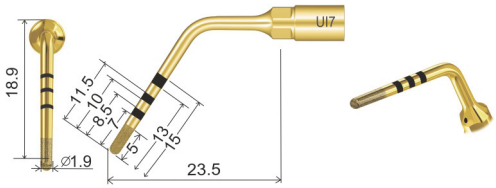
минимально травматичное разрезание связок

UI6



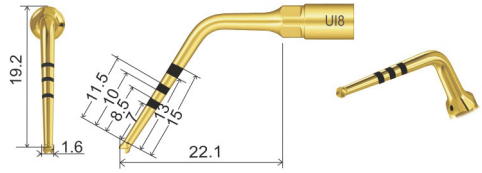
минимально травматичное разрезание связок

UI7



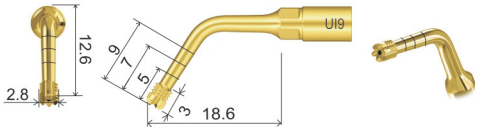
минимально травматичное разрезание связок

UI8



минимально травматичное разрезание связок

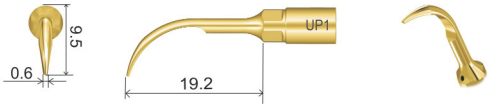
UI9



минимально травматичное разрезание связок

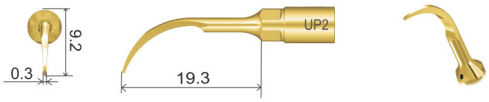
Периодонтальная хирургия

UP1



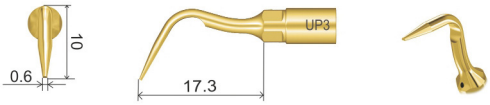
минимально травматичное разрезание связок

UP2



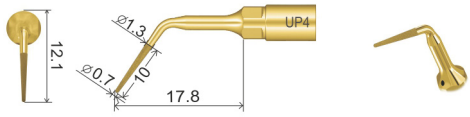
минимально травматичное разрезание связок

UP3



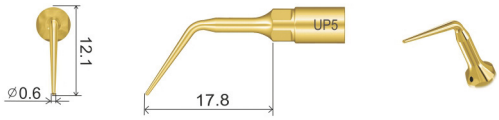
минимально травматичное разрезание связок

UP4



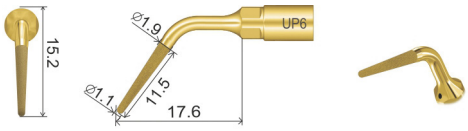
минимально травматичное разрезание связок

UP5



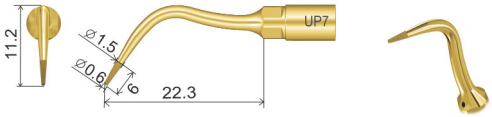
минимально травматичное разрезание связок

UP6



минимально травматичное разрезание связок

UP7



минимально травматичное разрезание связок

ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510-56-24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

Удаление зубного камня (насадки SIRONA)

GS1



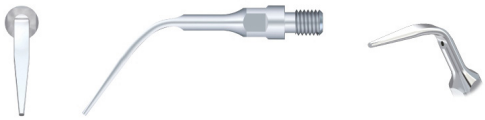
удаление наддесневого и пришеечного зубного камня, а также твердых отложений с вершины зуба

GS2



удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GS3



удаление наддесневого, поддесневого и межзубного камня

GS4



удаление наддесневых камней и отложений

GS5



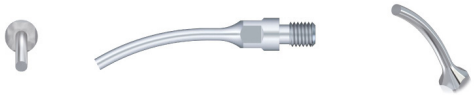
удаление наддесневого зубного камня и пришеечных отложений

GS6



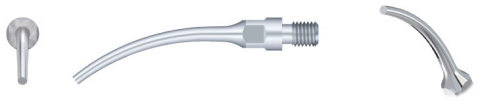
удаление наддесневых трудно удаляемых отложений

GS7



удаление зубной коронки и пломбирующего материала

GS8



удаление зубной коронки

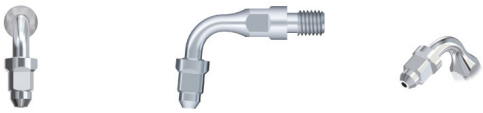
Эндодонтия (насадки SIRONA)

ES1



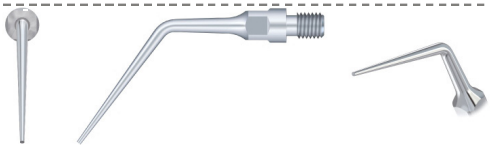
эндочак с углом наклона 120° для K-файлов NITI: чистка передних корневых каналов после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ES2



эндочак с углом наклона 95° для K-файлов NITI: чистка передних корневых каналов после стерилизации и удаления штифта из корневого канала

ES3



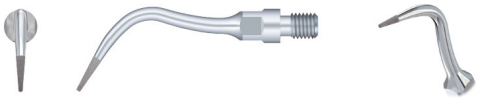
после чистки корневого канала, с использованием механизма и тепловой энергии ультразвуковых колебаний, для смягчения латеральной конденсации, следить чтобы кончик насадки скалера касался гуттаперчи

ES3D



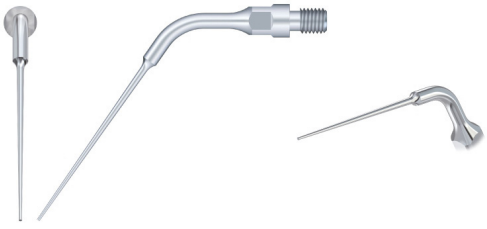
удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

PS4D



удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ES4



удаление инородных тел и обломков инструментов из средней и верхней трети большого и прямого канала

ES5



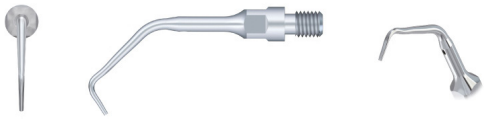
удаление зубного камня и временного цемента, а также обломков инструментов из коронковой трети

ES8



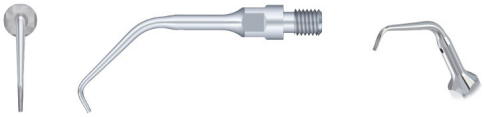
эндочак для боров, расширение канала и обработка жевательных зубов

ES10



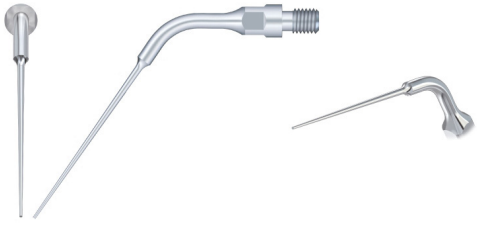
эндочак для боров, расширение канала и обработки жевательных зубов

ES11



мягкая обработка корневых каналов

ES14



мягкая обработка корневых каналов

ES15



мягкая обработка корневых каналов

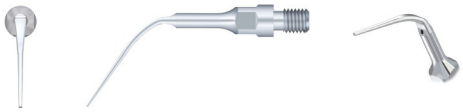
Пародонтология (насадки SIRONA)

PS1



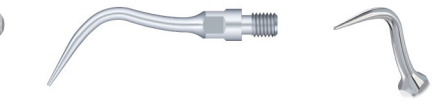
удаление поддесневого зубного камня

PS3



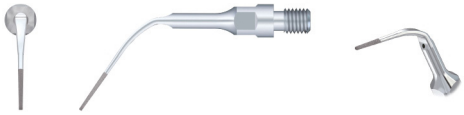
удаление поддесневого зубного камня

PS4



удаление поддесневого зубного камня

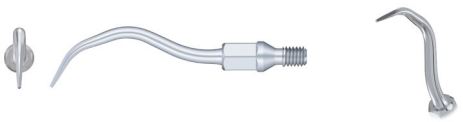
PS3D



сглаживание выступов реставрации

Пародонтология (насадки KAVO)

GK1



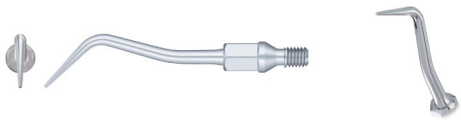
удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK2



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK3



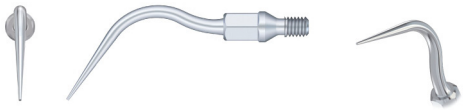
удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK4



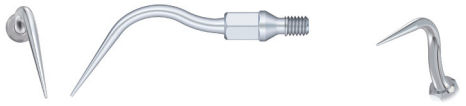
удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK5



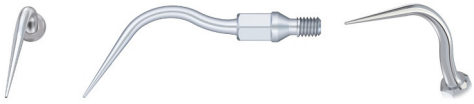
удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK6



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK7



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GK11



ортодонтическое лечение

GC1



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

GC2



удаление наддесневого и поддесневого зубного камня

EK8



держатель для боров

Пародонтология (насадки KAVO)

PC1



удаление наддесневого зубного камня

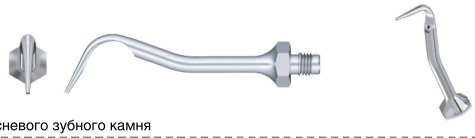
Пародонтология (насадки AMDENT)

A1



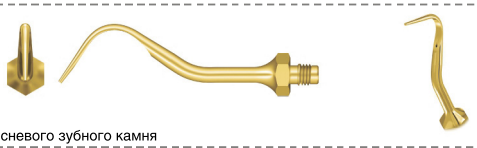
удаление наддесневого зубного камня

A2



удаление наддесневого зубного камня

A1T



удаление наддесневого зубного камня

ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510-56-24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

НОВИНКА!

Насадка P90 для чистки имплантатов к ультразвуковым скалерам WOODPECKER

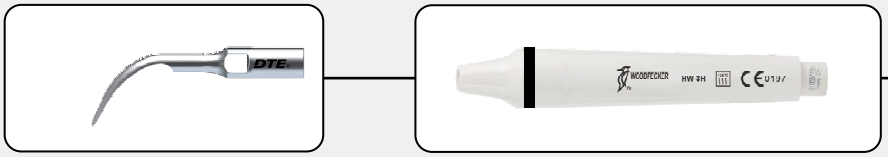


- Автоклавируемый колпачок из ПММА
- Продолжительный срок службы насадки
- Не царапает поверхность имплантата
- Идеальна для любого вида пришеечной части

Пожалуйста, пользуйтесь соответствующими насадками.



Использование насадок, имеющих маркировку DTE, с наконечником, имеющим маркировку WOODPECKER, приведет к серьезной проблеме.





Использование насадок, имеющих маркировку WOODPECKER, с наконечником, имеющим маркировку DTE, приведет к такой же проблеме.

Гарантия не распространяется на три вида повреждений.

Запрещено использовать одноразовые насадки.



Насадка DTE эффективно охлаждает и очищает



Насадка неизвестного китайского производителя уступает более чем на 70% насадке DTE в эффективности очистки и охлаждения



Насадка DTE после 300 циклов стерилизации и 1000 часов работы



Насадка неизвестного китайского производителя после 6 минут работы с пациентом после качественного процесса стерилизации



Насадка неизвестного китайского производителя через 1 час работы. Через 10 часов работы 35% насадок выходят из строя

Полимеризационная лампа, беспроводная

DTE LUX E *
с фотометром

DTE LUX E SIMPLE
без фотометра

Производитель:
WOODPECKER
Китай

Специальное предложение!

LUX E
артикул

Полимеризационная лампа с зарядным устройством – подставкой. Настройка времени: 5, 10, 15, 20 сек. Полного заряда батареи хватает более чем на 300 циклов.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm^2 1200mW/cm^2
Вес	147g
Габариты	260mm 40mm 50mm

* **Полимеризационная лампа LUX E** оснащена фотометром на правой стороне зарядного устройства. Фотометр позволяет контролировать мощность светового потока перед использованием.





Полимеризационная лампа, беспроводная

DTE LUX V

Производитель:
WOODPECKER
Китай

LUX V
артикул

Повышенная емкость аккумулятора, полного заряда батареи хватает более чем на 300 циклов полимеризации. Низкий уровень саморазряда. Индикатор заряда батареи. Универсальный дизайн для левой и правой руки.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm^2 1200mW/cm^2
Вес	85g
Габариты	263mm 31mm 23,5mm



Полимеризационная лампа, беспроводная

DTE LUX VI

Производитель:
WOODPECKER
Китай

LUX VI
артикул

Эргономичный дизайн, маленький и удобный. Особый дизайн рукоятки и световода, высокоэффективная фильтрация света. Настройка времени: 5, 10, 15, 20 сек. Полного заряда батареи хватает более чем на 300 циклов. Работает как от батареи, так и от провода зарядного устройства, подключенного к сети.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm^2 1200mW/cm^2
Вес	100g
Габариты	234mm 26mm 26mm



ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510-56-24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

Полимеризационная лампа, беспроводная DTE LUX I

Производитель:
WOODPECKER
Китай

LUX I
артикул

- Поворот световода на 220 градусов
- Одноразовые чехлы на световод позволяют экономить время на автоклавировании
- Поворот световода на 220 градусов
- Запоминание настроек
- Стаильная мощность полимеризации даже при низком заряде аккумулятора
- Более 400 циклов полимеризации при полном заряде аккумулятора

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	850mW/cm^2 1000mW/cm^2
Вес	230g
Габариты	232mm 25mm 25mm



Полимеризационная лампа, встраиваемая LED.C

Производитель:
WOODPECKER
Китай

LED.C
артикул

Лампа полимеризационная встраиваемая в стоматологическую установку. 3 режима работы и 4 интервала полимеризации.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm^2 1200mW/cm^2
Вес	120g
Габариты	263mm 23mm 23mm



Полимеризационная лампа, встраиваемая LED.G

Производитель:
WOODPECKER
Китай

LED.G
артикул

Лампа полимеризационная встраиваемая в стоматологическую установку. 3 режима работы и 4 интервала полимеризации.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm^2 1200mW/cm^2
Вес	135g
Габариты	260mm 25mm 26mm



Полимеризационная лампа, беспроводная LED.B

Производитель:
WOODPECKER
Китай

LED.B
артикул

Лампа световой полимеризации, беспроводная на светодиодах, автономная, 4 режима продолжительности полимеризации.

Питание	AC100V 240V 50Hz/60Hz
Мощность светового потока	1000mW/cm^2 1200mW/cm^2
Вес	145g
Габариты	260mm 31mm 34mm



Полимеризационная лампа, беспроводная bluephase®N

Производитель:
Ivoclar Vivadent
Лихтенштейн

BLUEPHASE® N	659683BE артикул

Покрывая весь диапазон длины волны и имея мощность света 1200 мВт/см2, работающая от батареи, Bluephase N ® устанавливает высочайшие стандарты в секторе полимеризационных светодиодных ламп.
Она удовлетворяет все повседневные стоматологиче–ские запросы благодаря множеству инновационных функций.



Полимеризационная лампа, беспроводная bluephase®N M

Производитель:
Ivoclar Vivadent
Лихтенштейн

BLUEPHASE®N M	647620BE артикул

Мощность света 800 мВт/см2 и три временных интервала полимеризации обеспечивают эффективность и надежность работы.
Полимеризационная лампа подходит для светоотверждаемых стоматологических материалов в диапазоне длины волны 430–490 нм.



Полимеризационная лампа, беспроводная bluephase®N MC

Производитель:
Ivoclar Vivadent
Лихтенштейн

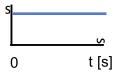
BLUEPHASE®N MC	647619BE артикул

Bluephase N MC – это работающая от сети светодиод–ная полимеризационная лампа с мощностью света 800 мВт/см2. Эта лампа отличается выдающимися свойствами и невысокой ценой.
Эта модель выполняет все основные требования эффективной полимеризации, не требовательна в плане технического обслуживании, и обеспечивает непрерывность работы.
Экономичный полимеризационный прибор подходит для полимеризации в диапазоне длины волны 430–490 нм.

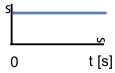


Программы полимеризации продуктов bluephase

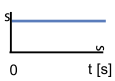
Турбо



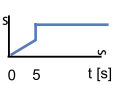
High Power – высокая мощность



Low Power – низкая мощность



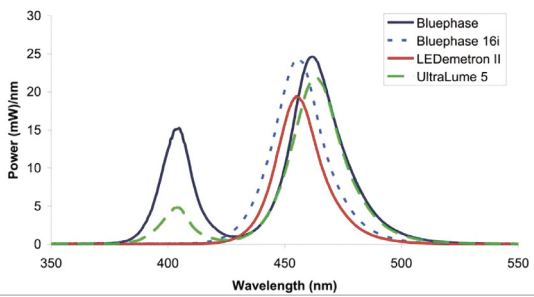
Soft Start – мягкий старт



Второе поколение линии продуктов bluephase с помощью уникального, разработанного на фирме поливолнового светодиода.

Поливолновой светодиод достигает оптимума в широте спектра, который составляет от 380 до 515 нм – точно так же, как у образца галогеновой лампы.

Полимеризует все виды светоотверждаемых материалов благодаря поливолновому светодиоду , который излучает в двух диапазонах, доминантный 410 нм и основной 470 нм.



ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5–я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510–56–24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

Запасные части для ультразвукового скалера



Автономная система подачи воды AT-1

Помпа электрическая объемная возвратно поступательная для подачи воды к стоматологическому скалеру в комплекте с резервуаром объемом 900мл



Автоклавируемый набор:

Наконечник x 1
Ключ для насадок x 1
Ключ для эндодонтических насадок x 1
(6 насадок опционально)





Ключ для насадок TD-1L:

Удерживает насадки

Ключ для насадок TD-1:

Не может удерживать насадки



Ключ TD-2L:
Удерживает насадки



Ключ для насадок
TD-4L для DTE
TS-4L для SIRONA
TK-4L для KAVO



Ключ для эндодонтических насадок TD-E1:

Используется для замены ультразвукового U-файла и закручивания/откручивания эндочака



Динамометрический ключ для насадок TW-3:



Переходник для быстрого подсоединения:



Помпа для D7



Держатель для насадок №1#:



Держатель для насадок №2#:



Педальный переключатель (круглый):



Педальный переключатель (квадратный):



Съемный кабель:

С различными соединителями, для наконечников HD-7H, HD-7L



Светодиод 5Вт



Светодиодная матрица для наконечника



Помпа для UDS

Запасные части для фотополимеризатора:



A B C

Волоконный световод:

Черный и белый опционально.
Может обрабатываться в автоклаве при высокой температуре и высоком давлении.

A – размеры: Ф 8мм
B – размеры: Ф 8мм
C – размеры: Ф 8мм
A – подходит для: LUX E
B – подходит для: LUX V, LUX VI
C – подходит для: LED.B

LUX I, LUX E:

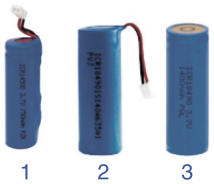


LUX V, LUX VI:



Блок питания:

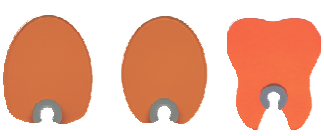
Входная мощность:	~ 100-240В 50-60Гц
Выходной вольтаж/ток:	5,0В/1,0А



1 2 3

Аккумуляторная батарея:

1. **ICR 14500:** Напряжение батареи: 3,7В.
   Подходит для: LUX V, LUX VI
2. **ICR 18490B:** Напряжение батареи: 3,7В
   Подходит для: LUX I
3. **ICR 18490A:** Напряжение батареи: 3,7В
   Подходит для: LUX E



1 2 3

Светозащитный экран:



Фотометр:



Батиметр:

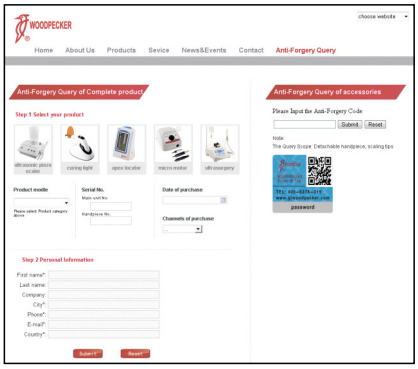


Одноразовый рукав для LUX I:

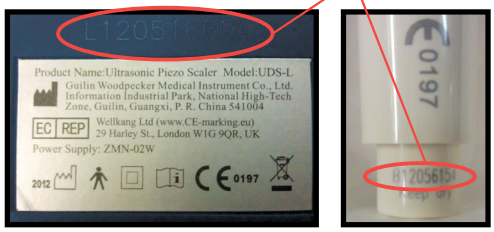
ВНИМАНИЕ

Компания WOODPECKER обращает внимание потребителей! В Китае участились случаи массовой подделки продуктов компании WOODPECKER DTE.
Особенно это касается позиций, которые пользуются большой популярностью среди российских потребителей, таких как LED.B и UDS-L.
Качество сборки оборудования и компонент к оборудованию у подобных "изделий" существенно отличается от оригинала.
Только приобретение товаров непосредственно у дистрибьютеров компании WOODPECKER в Российской Федерации («МайДент24» и «Стоматорг») дает 100% гарантию того, что клиент покупает качественный, сертифицированный товар.
Компания WOODPECKER размещает у себя на сайте http://glwoodpecker.com приложение, с помощью которого можно сверить серийный номер и определить наличие подделки **Anti-Forgery Query.**

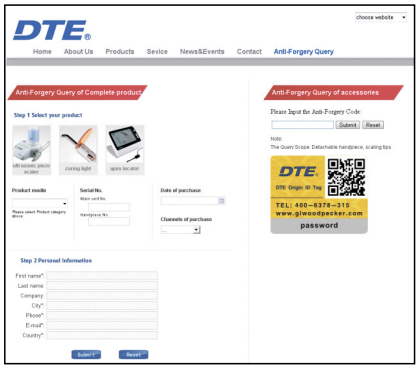




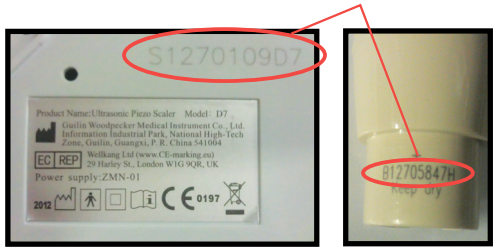
серийный номер







серийный номер





ООО "МайДент24", 125040, г. Москва, 5-я ул. Ямского поля, д.7, корп.2, тел./факс: (495) 510-56-24, www.mydent24.ru, info@mydent24.ru

Ультразвуковой скалер D600

Производитель:
Woodpecker
Китай

D600
артикул

Ультразвуковой скалер D600 - новая модель 2017 года, получившая лучшие свойства от лидера рынка скалера D7 и воплотившая в себе новейшие технологии в ультразвуковом лечении.

- превосходное сочетание комфорта и эффективности
- эффективная и полноценная чистка корневых каналов
- синусоидальная работа привода устройства
- "умная" система обратной связи от насадки



Ультразвуковой скалер PT MASTER 5

Производитель:
Woodpecker
Китай

PT MASTER 5
артикул

Новейшая модель ультразвукового скалера для парадонтального и эндодонтического лечения, а также для снятия зубных отиложений, совмещающая в себе современные технологии, дизайн и эргономику. Технология движения кончика насадки по эллипсоидной траектории позволяет проводить процедуры абсолютно безболезненно для пациента, а титановый сплав насадок не наносит микроцарапин на поверхности эмали, что препятствует бактериальному росту. Сенсорное управление прибором и удобная система добавления жидкости делают этот скалер лучшим выбором для профессионалов.



Полимеризационная лампа iLed

Производитель:
Woodpecker
Китай

iLed
артикул

Полимеризационная лампа iLed помимо великолепных технических характеристик получила современный эргономичный дизайн.

- полимеризация за 1 секунду!
- постоянная мощность полимеризации
- поворот световода на 360 градусов
- эргономичный дизайн



Ультразвуковой хирургический аппарат DS II LED

Производитель:
Woodpecker
Китай

DS II LED
артикул

Второе поколение ультразвуковых хирургических аппаратов DTE. Увеличенная мощность вибрации позволяет проводить распил кости с максимальной эффективностью и делать надпилы идеально точно. Богатый выбор разнообразных насадок и режимов работы открывают широкий горизонт возможностей использования аппарата в хирургии и имплантнотолгии.

Частота колебаний	24-36 кГц
Мощность	5-35Вт

